

** 2017 年 6 月 改訂（第 5 版）（新記載要領に基づく改訂）
* 2014 年 6 月 改訂（第 4 版）

承認番号 : 20200BZZ01498000

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器 汎用吸引用カテーテル 34923102

吸引カテーテル

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- 先端が開口し、カテーテル先端部に側孔が付いている。
- 手許側にコネクタが付いている。

＜本品の基本構成＞

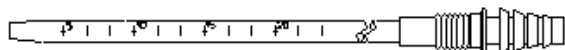

- 本品はポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))を使用している。

【使用目的又は効果】

本品は滅菌済であるので、そのまま直ちに使用できる。

【使用方法等】

1. 清潔操作で本製品を滅菌袋から取り出し、吸引機（器）と接続したチューブに無菌的に接続すること。
2. 本製品の接続部が吸引機（器）と接続したチューブと確実に接続されていることを確認の上、カテーテル先端から体液等を吸引し、接続した吸引機（器）に排出すること。
3. 吸引の目的にのみ使用すること。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

1. すべての操作は無菌的に行うこと。
2. 再滅菌しないこと。
3. 包装を開封したらすぐに使用すること。
4. 乱暴な取扱いをすると破損・亀裂のおそれがあるので、製品の取扱いには注意すること。
5. 使用中につまり等の異常が認められた場合は使用を中止し、新しい製品と交換すること。
6. 使用中はチューブの折れによる閉塞に注意すること。
7. 吸引以外の目的には使用しないこと。
8. 使用中、先端部が粘膜に密着することにより陰圧が上昇することがあるため、陰圧が上昇した場合は速やかに使用を中止すること。
9. 気管チューブ等、他のチューブまたはカテーテル内に挿入する場合は、適切なサイズを選択すること。

【相互操作（他の医薬品・医療機器との併用に関すること）】

1. コネクタにひび割れが生じる可能性があるので、アルコールを含む薬液等で接続部を拭かないこと。
2. 吸引管等と接続して使用する場合、接続部が緩んでいないか注意すること。また、接続部が外れないよう注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
- 蛍光灯下やオゾンが発生する器械の周辺等に保管しないこと。

【使用期限】

- 包装（ラベル）に使用期限を表示している。〔自己認証による〕

* 【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売元】

フォルテグロウメディカル株式会社
TEL : 0283-22-2801

* 【発売元（お問合せ窓口）】

東レ・メディカル株式会社
TEL : 03-6262-3822