

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
 管理医療機器 単回使用マルチルーメンカテーテル 32330102

ベリプラスト注入器具

再使用禁止

【警告】

＜使用方法＞

- スプレー使用の場合、内圧が 15mmHg を超えないように厳重に管理すること。[ガス塞栓のおそれがある。]


【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

**組織の接着及び閉鎖、気管支の空気漏れの閉鎖時に適用する。

＜本品の基本構成＞

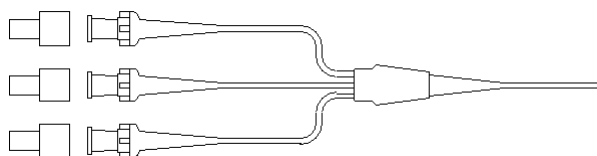


【使用目的又は効果】

本品は滅菌済であるので、そのまま直ちに使用できる。


【使用方法等】

**本製品は、ベリプラスト 3mL、5mL 製剤に適合しており、
 内視鏡・気管支鏡の内腔に挿入して使用が可能である。
 (噴霧も可能)

図 1

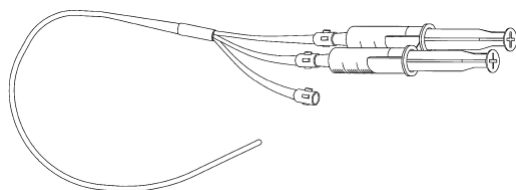

○調製方法に従って溶解された A 液、B 液の入ったシリンジに本製品のメスコネクターに差し込み固定すること。(同じ色のシリンジとコネクターを固定すること) (図 1 参照)

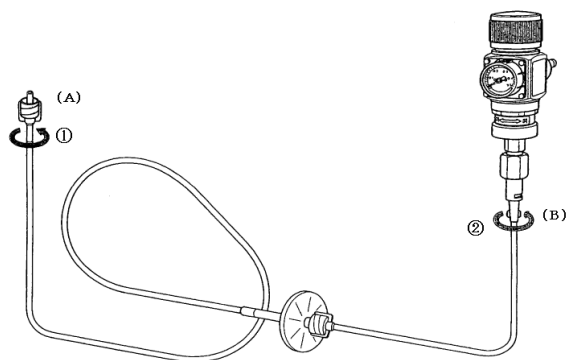

- ①エアチューブの先端 (A) を回転させながら本製品の残りのメスコネクター (図 1) に差し込み固定すること。
- ②ガス圧力調整器のコネクターにエアチューブの先端 (B) を回転させながら差し込み固定する。
- ③ガス圧 0.1～0.15MPa に調整すること。

【使用方法に関する使用上の注意】

- ・スプレー使用による内圧上昇には十分注意すること。(15mmHg 以下とする)
- ・ガス圧は 0.2MPa 以上に上げないこと。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 乱暴な取り扱いをすると、破損、亀裂の恐れがあるので、製品の取り扱いには注意すること。
- 包装を開封したら、すぐに使用すること。
- 活動性出血部位に対してのスプレーはガス塞栓の危険があるため、絶対に行わないこと。
- ベリプラスト® 付属のシリンジを使用すること。
- 先端部が破損すると薬液が流出しないおそれがあるので、先端部に強い衝撃を与えないこと。
- 接続部は、緩み、液漏れ等がないことを常に確認し、使用すること。
- 使用中に液漏れ、詰まり等の異常が認められた場合は、新しい製品と交換すること。

＜参考文献＞

- 1) Warning About Gas / Air Embolism During Intrauterine Laser Surgery : JAMA, July 11, Vol. 264, No. 2, p. 168, 1990
- 2) 腹腔鏡下胆嚢摘出術中、フィブリン糊スプレーにより換気困難に陥った症例 : 日本麻酔学会誌, Vol. 14, No. 8, p. S186, 1994

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
- *2. 使用期限
包装 (ラベル) に使用期限を表示している。[自己認証による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

■製造販売業者

フォルテ グロウ メディカル 株式会社
 電話番号 0283-22-2801

■製造業者

フォルテ グロウ メディカル 株式会社
 フォルテ グロウ メディカル ベトナム
 (FORTE GROW MEDICAL VIETNAM CO., LTD.) ベトナム

*■供給業者

C S L ペーリング株式会社
 電話番号 0120-534-587