

イトー easyangle

【警告】


- ・ 機器は改造しないでください。

【禁忌・禁止】

次のような状況では絶対に使用しないでください。

- ・ 高酸素環境
 - ・ 高電磁波環境、高粒子放射線環境、高イオン化環境
- 次のような部位へは使用しないでください。
- ・ 外傷のある皮膚部位

【形状・構造及び原理等】

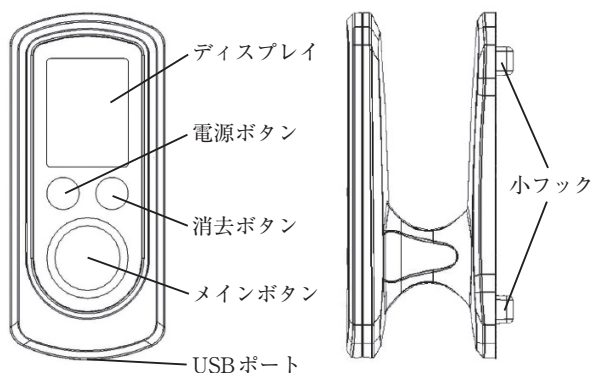

1. 構成

- 1) 本体
- 2) ガイド物差し（長）
- 3) ACアダプター

なお、構成の詳細は本体付属の取扱説明書を参照してください。

2. 本体の寸法

- ・ 本体寸法：(W)86mm × (D)38mm × (H)37mm

3. 電氣的定格

- ・ 定格電源

本 体：DC3.7V（リチウムイオン充電電池）

ACアダプタ：入力 AC100V 50/60Hz

出力 DC5.0V 0.6A

- ・ 電撃に対する保護の形式と程度：内部電源機器、B形

4. 電磁両立性

本製品はEMC規格IEC60601-1-2：2014に適合しています。

5. 原材料

- ・ 本体：ポリブチレンテレフタレート、非晶性ポリエチレン

レフタレート、ポリエステル

- ・ ガイド物差し（長）：ポリエチレンテレフタレートグリコール

6. 作動原理

機器の説明

MEMS-IMUを使用することで、2つのポジションの角度差を測定する。角度差を計算するためにソフトウェアを用いる。

【使用目的又は効果】

骨の角度を測定するために用いる器具である。

【使用方法等】

- 1) 本体のUSBポートにACアダプターを接続し、充電を行います。（充電時間は最長で2時間）
- 2) ガイド物差し（長）を取り付けます。本体底面に位置する4点の小フック箇所にガイド物差し（長）の4箇所のくぼみを合わせて設置し、物差しを前あるいは後ろ方向へスライドさせてロックします。
- 3) 電源ボタンを押します。
- 4) メインボタンを押し、測定モード画面へ移動します。
- 5) 本体を最初の測定位置（基本軸）に移動し、再度メインボタンを押して測定を開始します。
- 6) 本体を次の測定位置（移動軸）まで移動させ、再度メインボタンを押します。ディスプレイ中央に角度の測定値が表示され、測定した角度の方向が画面上部に円弧で表示されます。
- 7) 測定結果を保存する場合はメインボタンを押します。消去する場合は消去ボタンを2回押します。
- 8) 電源ボタンを押して測定を終了します。2分間機器操作がない場合は、節電のため自動的に電源が落ちます。

【使用上の注意】

- 1) 本製品を液体に入れないでください。
- 2) 本製品を滅菌しないでください。
- 3) 殺菌剤、溶解力のある物質、酸性物質や油を付着させないでください。

*【保管方法及び有効期間等】

有効期間等

- 1) 耐用期間：3年（自己認証）当社データによる

【保守・点検に係る事項】

- 1) ACアダプターを取り外してからクリーニングしてください。
- 2) 除菌の際は、70%エタノール／イソプロピルアルコールで

取扱説明書を必ずご参照ください。

湿らせた布で機器を拭いてください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：伊藤超短波株式会社

住 所：埼玉県川口市栄町3-1-8

電 話 番 号：048-254-1012

製 造 業 者：Meloq AB（スウェーデン）

販 売 元：

電話番号：