

機械器具 30 結紮器及び縫合器

一般医療機器 持針器（JMDN：12726010）

販売名： デリケート型持針器


【禁忌・禁止】

1. 本品の二次加工（改造・調整等）は絶対にしないこと〔折損及び本来機能を損なう原因となるため〕。
2. 角膜縫合用と限定された持針器、マイクロ持針器、糸切り用刃の付いた持針器は、医療用縫合針（JIS T 3102）の「眼科わん 0000」（長さ7mm／加工前線材径0.35mm）以上の縫合針を使用しないこと〔先端部が変形するため〕。

【形状、構造及び原理等】

ハンドル部はウレタン型で、ハンドルの凹凸部に圧力を掛ける（握る）ことにより先端部が閉じる。先端部内側には、タングステンカーバイドコーティング（特殊な滑り止め加工）が施されている。複数機器を同時に使用する場合に器具の識別が容易となるように熱処理による色加工が施されている（標準色：ブルー、GO：ゴールド、PU：パープル）。

外観写真

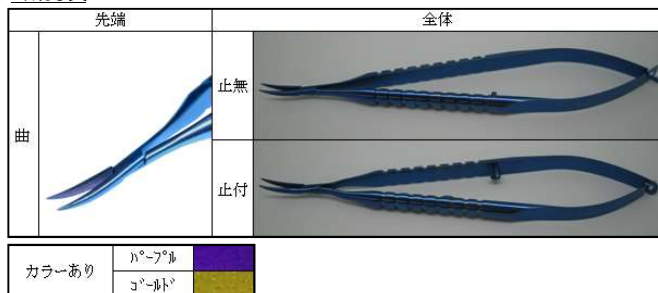

形状及び寸法

形状		型式			商品名	全長	先端幅
		標準色	ゴールド	パープル			
曲	止無	MB-029	MB-029GO	MB-029PU	デリケート型持針器 曲 12mm 止無 ※	124 mm	12 mm
	止付	MB-030	MB-030GO	MB-030PU	デリケート型持針器 曲 12mm 止付 ※	124 mm	12 mm

※標準色以外の場合には、商品名の後方に色名称（ゴールド、パープル）が入ります。
チタニウム

【使用目的又は効果】

眼科手術の縫合時に縫合針を把持する。

【使用方法等】

縫合糸を取り付けた眼科用縫合針又は糸付縫合針を先端部で把持し、患部を縫合する。滅菌方法：高圧蒸気滅菌

【使用上の注意】

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌（保守・点検に係る事項参照）をすること。
2. 既定の使用目的以外に使用しないこと。
3. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。
4. 電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電、火傷をする危険性があり、また、器具の表面を損傷するので併用しないこと。

5. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるので、出来るだけ使用を避けること。使用中に付着したときには水洗いすること。
6. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに直ちに洗浄液等に浸漬すること。また、必要以上の浸漬は表面を劣化させるおそれがあるので、洗浄液の適正な用法用量（時間）で浸漬後、蒸留水で洗い流し、十分に乾燥させること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温・多湿・直射日光を避けて保管すること。
2. 滅菌したものを保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管するとともに有効保管期間の管理をすること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前に汚れ、傷、曲がり等の異常がないか点検すること。
2. 洗浄／滅菌を装置で行う場合には、器具同士が接触して微細な先端部を損傷させないように隔離されたシリコンメッシュマットあるいはラック式滅菌用コンテナ等にセットすること。
3. ロック機能付（止付）の器具を洗浄・滅菌する場合には、ロック機能を開放してから行うこと。
4. スプリングハンドルの関節式ジョイント部を外す場合には、ジョイント部周辺を捻らないように注意すること（ハンドル部やヒンジ部の変形や劣化、かみ合わせ不良の原因により本来の機能が発揮できなくなる恐れがあるため）。
5. 洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げすすぎには、浄化水（濾過、蒸留、脱イオン化等）を用いることを推奨する。
6. 強アルカリ／強酸性/塩素系/ヨウ素系の洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させるおそれがあるので使用を避けること。
7. 金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が損傷するので汚物除去及び洗浄時の使用はしないこと。
8. 使用後は、出来るだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、職業感染防止のために洗浄・消毒すること。
9. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに直ちに洗浄液等に浸漬すること。また、必要以上の浸漬は表面を劣化させるおそれがあるので、洗浄液の適正な用法用量（濃度・時間）で浸漬後、蒸留水で洗い流し、十分に乾燥させること。
10. 点検後、セット・包装をし、高圧蒸気滅菌をすること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 株式会社イナミ

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目24番2号

TEL 03-3814-1731 / FAX 03-3814-3334

製造業者 Eye Technology Ltd.(英国)