

機械器具 25 医療用鏡

一般医療機器 顕微鏡付属品（JMDN：37294000）

特定保守管理医療機器 販売名：顕微鏡用対物レンズ OBJ-ACRO

【警告】

1. 患者及び使用者の安全を守り機器を正しく使用するために、注意事項は必ず守ること。
2. 本器に衝撃を与えないこと。
3. 熟練した人以外は操作しないこと。操作を熟知していない人が操作をすると、誤った操作をしてケガや故障の原因となるため、操作講習を受けた眼科医師、眼科医療従事者以外は操作しないこと。
4. 患者や子供の行動に注意すること。
患者や付き添いの子供のいたずらなどの機械操作で事故を起こすことがあります。目を離さないように注意すること。


【禁忌・禁止】

1. 本体を分解したり、改造したりしないこと。
2. 故障や異常状態での使用をしないこと。
3. 未整備状態での使用をしないこと。
4. 濡れた手でさわらないこと。
5. 本器に水をかけないこと。
6. 機器を強くたたいたり、揺すったり、擦ったりしないこと。

*【形状、構造及び原理等】

顕微鏡用対物レンズ OBJ-ACRO(以下「本器」という)は、レンズ、レンズ枠、レンズを固定する押さえ缶から構成され、レンズ枠の上側にある外ネジ部を手術用顕微鏡の変倍部の下側(内ネジ部)に取り付けることにより、手術部位や診療科に最適な焦点を実現する。

1. 外観写真

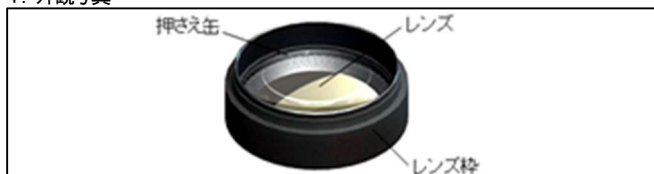

2. 形状及び寸法




焦点距離	A	B	C	型式	商品名
f=175	φ48.5	6.9	13.9	OBJ-A008	顕微鏡用対物レンズ OBJ-ACRO f=175
f=200	φ49	11.5	17	OBJ-001	顕微鏡用対物レンズ OBJ-ACRO f=200
f=250	φ49	9.5	15	OBJ-002	顕微鏡用対物レンズ OBJ-ACRO f=250
f=275	φ49	9.5	15	OBJ-011	顕微鏡用対物レンズ OBJ-ACRO f=275
f=300	φ49	9.5	15	OBJ-003	顕微鏡用対物レンズ OBJ-ACRO f=300
f=350	φ49	9.5	15	OBJ-012	顕微鏡用対物レンズ OBJ-ACRO f=350
f=375	φ49	9.5	15	OBJ-013	顕微鏡用対物レンズ OBJ-ACRO f=375
f=400	φ49	9.5	15	OBJ-014	顕微鏡用対物レンズ OBJ-ACRO f=400

【使用目的又は効果】

当社が製造販売する手術用顕微鏡に取り付けることにより、手術部位や診療科に合わせて、対物レンズから焦点までの距離を変更する。

【使用方法等】

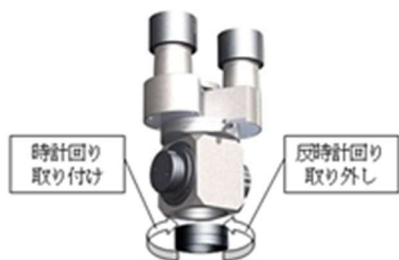

取扱説明書を必ずご参照ください。

1. 手術部位や診療科に最適なf値であることを確認する。
2. 本器のレンズ枠を持ち、レンズ枠の上側にある外ネジ部を手術用顕微鏡の変倍部の下側(内ネジ部)に合わせ、時計回りに回転させ、固定する（回転が止まるところまで回転させる）。
3. 本器を交換する場合には、反時計回りに回転させ取り外し後、上記(1)(2)の手順をとる。

【使用上の注意】

詳細については取扱説明書を必ずお読みください。

1. 熟練した者以外は本器を使用しないこと。
2. 本器を設置する時には、次の事項に注意すること。
 - (1) 室温+10～+30℃、湿度85%以下、ほこりが無く水の掛からない場所に設置すること。
 - (2) むやみに振動や衝撃を与えない安全性であること。
 - (3) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所でないこと。
3. 本器を使用する前には、次の事項に注意すること。
 - (1) 点検を行い本器が正確に動作することを確認すること。
4. 本器の使用中は、次の事項に注意すること。
 - (1) 本器及び患者に異常のないか絶えず監視すること。
 - (2) 本器及び患者に異常が発見されたら、直ちに使用を止めること。
 - (3) 本器に患者が触れることのないよう注意すること。
5. 本器の使用後は、次の事項に注意すること。
 - (1) 本器全般を清浄にしておくこと。
 - (2) 本器を勝手に修理したり、改造したりしないこと。
6. 保守点検
 - (1) 必ず定期点検を受けること。
 - (2) しばらく使用しなかった本器を再使用するときには、正常にかつ安全に作動することを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオン分を含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
3. 傾斜、振動、衝撃など安定状態に注意すること。
4. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないで下さい。
5. 保管時には下記の環境条件を厳守して下さい。

保管環境条件	
温度	-10℃～+55℃
相対湿度	10%～95%

【保守・点検に係る事項】

詳細については取扱説明書を必ずお読みください。

1. 機器及び部品は必ず点検（日常点検、定期点検）を行うこと。
2. 連結部が確実に接続されていること。
3. 望遠部接続部および変倍部接続部の回転動作がスムーズなこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 株式会社イナミ

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目24番2号

TEL 03-3814-1731 / FAX 03-3814-3334

製造業者 株式会社イナミ 美女木研究所