

特定保守管理医療機器 L-02LM 可動式アダプター ラクミール アルファ

【禁忌・禁止】

本体を分解したり、改造をしたりしないこと[故障/誤動作により事故を起こす可能性があるため]。

② 故障や異常状態での使用をしないこと[故障/誤動作により事故を引き起こす可能性があるため]。


③ 未整備状態での使用をしないこと[故障/誤動作により事故を引き起こす可能性があるため]。

④ 本体に水をかけないこと[故障の可能性があるため]。

⑤ 機器を強くたたいたり、揺すったり、擦ったりしないこと[故障/誤動作により事故を引き起こす可能性があるため]。

【形状、構造及び原理等】

1) 形状及び名称

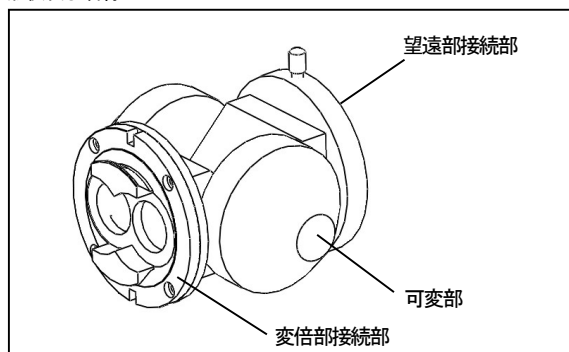

2) 構造

可動式アダプター ラクミール アルファ(以下「本器」という。)は顕微鏡の望遠部および変倍部に連結することで対象物を観察することができる。

本器は、望遠部接続部、可変部および変倍部接続部から構成され、可変部を中心として、連結した望遠部を回転(上下動)させることができる。

【使用目的又は効果】

本器は、顕微鏡の望遠部および変倍部に連結し、対象物を観察することができ、且つ、可変部を中心として、接眼部の角度を変えることができるので、使用者の姿勢にあわせて無理なく使用することができる。

仕様：可変角度 -45° ～ $+90^{\circ}$

【使用方法等】

- 1) 変倍部接続部を本体へ取り付け固定する。
- 2) 望遠部接続部に望遠部を取り付け固定する。
- 3) 接続した望遠部(接眼部)を持ち、上下に回転させ角度を調節する。

【使用上の注意】

- 1) 熟練した者以外は本器を使用しないこと。
- 2) 本器を設置する時には、次の事項に注意すること。
 - (1) 室温 $+10^{\circ}\text{C}$ ～ $+30^{\circ}\text{C}$ 、湿度 85%以下、ほこりが無く水の掛からない場所に設置すること。
 - (2) むやみに振動や衝撃を与えない安全性であること。

(3) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所でないこと。

3) 本器を使用する前には、次の事項に注意すること。

(1) 点検を行い本器が正確に動作することを確認すること。

4) 本器の使用中は、次の事項に注意すること。

(1) 本器に異常が発見されたら、直ちに使用を止めること。

(2) 本器に患者がふれることのないよう注意すること。

5) 本器の使用後は、次の事項に注意すること。

(1) 本器全般を清浄にしておくこと。

(2) 本器を勝手に修理したり、改造しないこと。

6) 保守点検

(1) 必ず定期点検を受けること。

(2) しばらく使用しなかった本器を再使用する時には、正常にかつ安全に作動することを確認すること。

7) 熟練した人以外は操作しないこと。

8) 操作を熟知していない人が操作をすると、誤った操作をしてケガや故障の原因となるため、操作講習を受けた眼科医師、眼科医療従事者以外は操作しないこと。

9) 患者や付き添いの子供のいたずらなどの機械操作で事故を起こすことがあります。目を離さないように注意すること。

10) 本体に衝撃を与えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1) 貯蔵・保管方法

- ①水のかからない場所に保管すること。
- ②気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオン分を含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- ③振動、衝撃など安定状態に注意すること。
- ④化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- ⑤保管時には下記の環境条件を厳守すること。

保管環境条件	
温度	-10°C ～ $+55^{\circ}\text{C}$
相対湿度	10%～95%

2) 使用期間

耐用期間 7年間〔自己認証(当社データ)による〕

【保守・点検に係る事項】

機器及び部品は必ず点検(日常点検、定期点検)を行なうこと。

- (1) 連結部が確実に接続されていること。
- (2) 可変動作がスムーズであること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社イナミ

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目 24 番 2 号

TEL 03-3814-1731 / FAX 03-3814-3334

製造業者：株式会社イナミ 美女木研究所