

特定保守管理医療機器 LC-100 C マウントアダプター

【警告】

1. 本体に衝撃を与えないこと[故障/誤作動により事故を引き起こす可能性があるため]。
2. 熟練した人以外は操作しないこと。
操作を熟知していない人が操作をすると、誤った操作をしてケガや故障の原因となるため、操作講習を受けた眼科医師、眼科医療従事者以外には操作しないこと[誤った操作をしてケガや故障の原因となるため]。

【禁忌・禁止】

1. 本体を分解したり、改造したりしないこと[故障/誤作動により事故を引き起こす可能性があるため]。
2. 故障や異常状態での使用をしないこと[故障/誤作動により事故を引き起こす可能性があるため]。
3. 未整備状態での使用をしないこと[故障/誤作動により事故を引き起こす可能性があるため]。
4. 本体に水をかけないこと[故障/感電の可能性のあるため]。
5. 機器を強くたたいたり、揺すったり、擦ったりしないこと[故障/誤作動により事故を引き起こす可能性があるため]。


【形状、構造及び原理等】

LC-100 C マウントアダプター(以下「本器」という。)(は、顕微鏡接続部、本体部、フォーカスリング、絞りリングおよびカメラマウント部から構成されている。本器を手術顕微鏡に接続することにより、C マウントカメラが接続でき、顕微鏡からの観察像を 90 度反射することができる。

1. 外観写真



2. 形状及び寸法

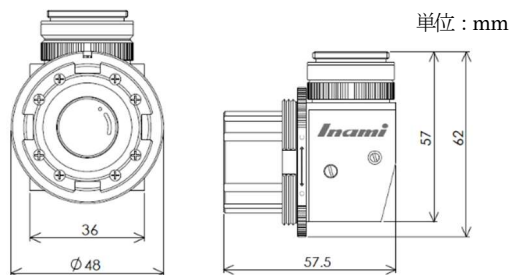

型式	商品名
LC-100-37	C マウントアダプター 37mm
LC-100-55	C マウントアダプター 55mm

3. 基本仕様

	LC-100-37	LC-100-55
マウント方式	Cマウント方式	
焦点距離	37mm	55mm
寸法	Φ48×57.5×62mm	
重量	180g	
顕微鏡接続部	イナミ専用顕微鏡用接続マウント	

4. 付属品

六角レンチ 二面幅寸法 0.7

【使用目的又は効果】

手術顕微鏡の接眼部から観察している対象物をカメラで撮影する為に用いるアダプターである。

【使用方法等】

1. 本器の顕微鏡接続部を手術顕微鏡に連結する。
2. カメラをカメラマウント部に連結する。
3. フォーカスリングを廻すことで、カメラの焦点を調整することができる。
4. 絞りリングを廻すことで、カメラに入る光量を調整することができる。

【使用上の注意】

1. 熟練した者以外は本器を使用しないこと。
2. 本器を設置する時には、次の事項に注意すること。
 - (1) 室温+10～+30℃、湿度 85%以下、ほこりが無く水の掛からない場所に設置すること。
 - (2) むやみに振動や衝撃を与えない安全性であること。
 - (3) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所でないこと。
3. 本器を使用する前には、次の事項に注意すること。
 - (1) 点検を行い本器が正確に動作することを確認すること。
4. 本器の使用中は、次の事項に注意すること。
 - (1) 本器に異常が発見されたら、直ちに使用を止めること。
 - (2) 本器に患者がふれることのないよう注意すること。
5. 本器の使用後は、次の事項に注意すること。
 - (1) 本器全般を清浄にしておくこと。
 - (2) 本器を勝手に修理したり、改造したりしないこと。
6. 保守点検
 - (1) 必ず定期点検を受けること。
 - (2) しばらく使用しなかった本器を再使用するときには、正常にかつ安全に動作することを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- (1) 水のかからない場所に保管すること。
- (2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオン分を含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- (3) 振動、衝撃など安定状態に注意すること。
- (4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- (5) 保管時には下記の環境条件を厳守すること。

保管環境条件	
温度	-10℃～+55℃
相対湿度	10%～95%

【保守・点検に係る事項】

機器及び部品は必ず点検(日常点検、定期点検)を行なうこと。

1. 連結部が確実に接続されていること。
2. ガラスにヒビや割れのないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社イナミ

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目 24 番 2 号

TEL 03-3814-1731 / FAX 03-3814-3334

製造業者：株式会社イナミ 美女木研究所