

I MGグリーン接続チューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、送気装置と、内視鏡用処置具等との接続に用いるため、柔軟性のあるプラスチック製のチューブと、チューブ両端に接続のためのコネクタで構成されている接続チューブである。


チューブ各端のコネクタの形状、チューブの長さが1.3m～3.3mの範囲によるバリエーションがある。

本品は、EOG滅菌をしたものである。


1. 形状及び寸法

1) 全体の形状と寸法

メス-メスコネクタのタイプ

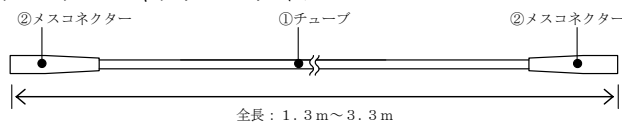


①チューブの断面

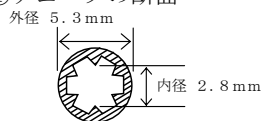

2) コネクタ部の形状と寸法

②メスコネクタの端末部

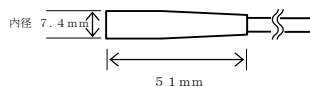

【使用上の注意】

1. 製品及び包装に傷、異物、破損、劣化などを発見した場合は使用しないでください。＊＊
2. 刃物等鋭利なものに接触させないこと。[切断等により、空気が漏れる恐れがある]
3. 接続チューブの取り外しは、チューブを持って引くなど、無理な力をかけないこと。[破損につながる恐れがある]
4. 接続チューブに冷暖房の風が、直接あたらないようにする。[チューブの中に水滴が発生する恐れがある]
5. その他の注意
使用後は、医療機関、行政及び地方自治体の定める規則に従って、製品及び包装を廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法 ＊＊
温度：10～40℃、湿度：30～90%の場所で保管してください。
2. 使用期限
包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：eastsidemed株式会社 ＊

東京都文京区本郷3-24-5

TEL 03-3815-0056 FAX 03-3818-4085

【使用目的又は効果】

送水装置又は送気装置と、内視鏡又は内視鏡用処置具等との接続に用いる柔軟性のあるチューブをいう。

【使用方法等】

1. 本品のコネクタ、チューブの長さ及び内径が、接続器具の形状や距離に適しているか確認する。
2. 包装に破損や劣化がないことを確認のうえ、包装より取り出す。＊＊
3. 本品の2つのコネクタを、接続先端末にしっかりと接続し、容易に脱落しないかを確認する。
4. 使用前及び使用中は、チューブの折れ曲がりや他のものから押さえられてチューブの閉塞がないことを確認する。
5. 使用前及び使用中は、本品のコネクタが、抜けていないか又は抜けかかっているかを確認する。また、装着者を移動させる際は、接続部分が外れないようにしっかりと固定すること。