

機械器具（55）医療用洗浄器
手動式生体用洗浄器 34630000 一般医療機器

es イヤーシリンジ


再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、シリコン製（種類：EU260CH）またはポリ塩化ビニル製（種類：EU160NA）で一体成型された中空の球体に円錐（先端が開いている噴出口）が付いたスポイト状の生体用洗浄器具である。
円錐先端部は柔軟な先細形状のため、鼻腔・耳腔などへの洗浄に適している。
本品のシリコン製（種類：EU260CH）は、E O G滅菌をしたものである。
本品のポリ塩化ビニル製（種類：EU160NA）は、未滅菌である。

1. 形状及び寸法
形状

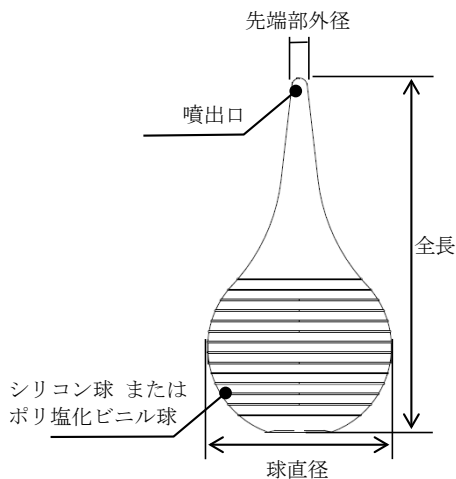

寸法

種類	色	球		全長	先端部 外径	重量
		容量	直径			
EU260CH：#60	ライトブルー	55cc	55.5mm	112.1mm	4.8mm	約 29 g
EU160NA：#60	ブルー	55cc	54.5mm	106.0mm	4.6mm	約 33 g

- 本品の種類：EU160NA は、ポリ塩化ビニル（DINCH（ヘキサモールディンチ）非フタル酸系可塑剤）を使用しています。

【使用目的又は効果】

身体の一部に適用する液体を噴出する装置をいう。衛生状態の維持又は治療の一環として用いる。手動式である。

【使用方法等】

- 種類：EU260CH の場合
- 1. 滅菌袋より取り出す。
- 2. 本品の球部を手で押し潰しながら噴出口を液体中に入れ、押し潰している球部の手を徐々に緩めることで

球部の復元力が働き、液体などを吸引する、または噴出する。

- 3. 液体を吸引した後、本品の噴出口を洗浄部位に向け、再度球部を押し潰して、吸引物の排出もしくは目的部位の洗浄を行なう。

■種類：EU160NA の場合

使用部位に応じて、使用前に本品を洗浄・E O G滅菌を行なって清潔にする。

- ・洗浄する場合は、中性洗剤での洗浄もしくは 80℃以下の温水での洗浄を行ない清潔な状態で使用する。表面の余分な水分をよく振り払い、球部を押し潰して球体内部の水分を十分に乾燥させてからご使用ください。
- ・滅菌する場合は、E O G滅菌（温度 60℃以下）のみ可能。
- 1. 包装より取り出す。
- 2. 本品の球部を手で押し潰しながら噴出口を液体中に入れ、押し潰している球部の手を徐々に緩めることで球部の復元力が働き、液体などを吸引する、または噴出する。
- 3. 液体を吸引した後、本品の噴出口を洗浄部位に向け、再度球部を押し潰して、吸引物の排出もしくは目的部位の洗浄を行なう。

【使用上の注意】

- 1. 万一本品に傷・異物・劣化等を発見した場合は、使用しないこと。
- 2. 刃物等鋭利なものに接触させないこと。[切断の恐れ]
- 3. 身体の一部に使用する際は、ぬるま湯または生理食塩水を使用すること。それ以外の液体（消毒液等）を使用しないこと。
- 4. その他の注意
使用後は、医療機関、行政及び地方自治体の定める規則に従って、製品及び包装を廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1. 保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管してください。
種類：EU260CH 常温 0℃～45℃、常湿 0%～80%
種類：EU160NA 常温 -5℃～40℃、常湿 30%～80%
- 2. 有効期限
包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：eastsidemed 株式会社
東京都文京区本郷3-24-5
TEL 03-3815-0056 FAX 03-3818-4085