

オールシリコンマスク


【形状・構造及び原理等】

本品は、本体が一体成型されたマスクである。
大きさと形状により以下の種類がある。


種 類	形 状	バンド用フック
0 乳児用小	丸型	なし
1 乳児用大		
2 小児用小		
3 小児用大		あり
4 成人用		
5 成人用大		

1. 形状及び寸法

0 乳児用小、1 乳児用大

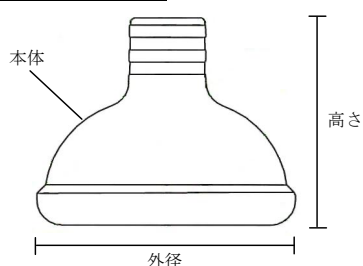


2 小児用小

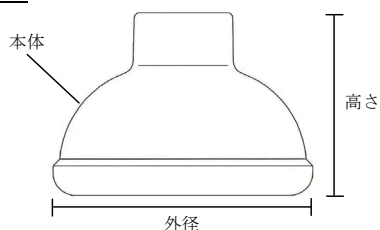

寸 法	種類	外径	高さ
	0 乳児用小	52 mm	42 mm
	1 乳児用大	67 mm	52 mm
	2 小児用小	79 mm	55 mm

3 小児用大、4 成人用、5 成人用大

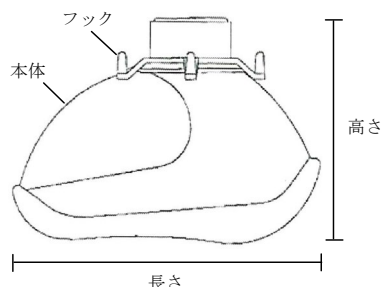

寸 法	種類	長さ×幅	高さ
	3 小児用大	101×78 mm	72 mm
	4 成人用	113×89 mm	80 mm
	5 成人用大	124×98 mm	87 mm

2. 接続する呼吸回路のポート

種 類	適合する呼吸回路 のポート
0 乳児用小、1 乳児用大	15 mm (内径)
2 小児用小、3 小児用大、 4 成人用、5 成人用大	22 mm (外径)

【使用目的又は効果】

人工呼吸器の呼吸回路に接続し、患者の鼻、口をおおい、
患者に人工呼吸器からのガスを供給するためのマスクをい
う。マウスピース型のものを含む。

【使用方法等】

使用にあたり、本品を洗浄後、滅菌を行ない清潔にすること。
滅菌は高圧蒸気滅菌を行なうこと。（耐熱温度：134℃）

**

1. 患者に適したサイズを選択する。
2. 本品を包装より取り出す。
3. 呼吸回路のポートを本品のポート結合部にしっかり挿入する。
4. 本品を患者の顔に装着し、正しい位置に装着していることを確認する。 **
5. 漏れがないことを確認し、漏れが認められる場合は装着位置を調整すること。 **
6. 必要に応じて、バンドを掛けて、外れないようにする。（サイズ 3、4、5 の場合は、アダプターにあるフックにバンドを掛けることができる。）

【使用上の注意】

1. 使用する前に、本品に汚れ、破れ、変色などの異常がないことを確認すること。落下、衝撃等により外観上の異常が認められた場合は使用しないこと。 **
2. 呼吸回路との接続は、径の合致する種類を使用すること。
3. 固定バンド等を使用する場合は、過度に締め付けないこと。必要に応じて装着部位の皮膚状態を確認すること。長時間連続使用する場合は、適宜装着部位の状態を確認すること。 **

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 - ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管してください。
2. 有効期間（使用期限） **
製造年月より 5 年 [自己認証（当社データ）による]。

【保守・点検に係る事項】

1. 本品を再使用する場合は、洗浄後、高圧蒸気滅菌を行なうこと。 **
 - ・洗浄は、洗浄前に本体とフック（サイズ 3、4、5）を外して、40℃以下の水で予備洗浄をした後、中性洗剤を使用して 20～40℃のぬるま湯で 5 分間漬けておき、全表面と内腔を十分に洗浄し清潔な水で濯ぐ。最後に柔らかい布で拭き取りまたは自然乾燥を行なうこと。 **
 - ・高圧蒸気滅菌は、134℃ 10 分で行なうこと。 **
2. 本品を再使用する場合は、最大 30 回を目安とすること。使用期限および再使用回数に係らず、外観上の異常が認められた場合は、使用を中止すること。 **

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：eastsidemed 株式会社 *
東京都文京区本郷3-24-5
TEL 03-3815-0056 FAX 03-3818-4085