

バイトブロック

【警告】

1. 本品は未滅菌品なので、使用前に洗浄・E O G滅菌を行なうこと。
2. 本品は、天然ゴムを使用している。
 - ・天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な措置を施すこと。
 - ・天然ゴムと接触する機会の多い人は、天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意すること。

【禁忌・禁止】

- ・天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある医療関係者の使用及び患者への使用をしないこと。
- ・高圧蒸気滅菌は行なわないこと。〔変形・破損〕

【形状・構造及び原理等】


本品は、外側が天然ゴム、内管がアルミ管の二重管構造になっており、経口挿管したチューブに本品を沿わせ、患者の上下歯の間にくわえさせることで、チューブが噛まれて閉塞されることを防止し、内管の貫通孔から口腔内の気道を確保することができる。

本品は、サイズによりS・M・Lの3種類及び色によるバリエーションを有する。


1. 形状及び寸法

形状


<上 面>

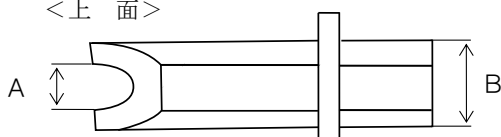

<側 面>

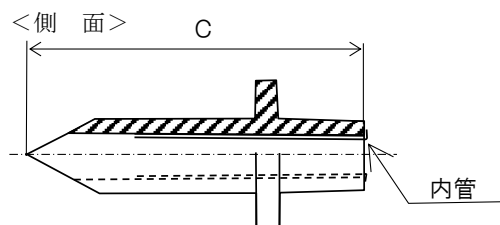

<後 面>

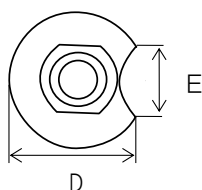

寸 法 単位：mm

	種 類（サイズ）		
	S	M	L
A：内管の内径	4	6	8
B：本体胴の外径	12	16	18
C：全長	54	70	75
D：本体つばの幅	24	25	29
E：つばのカット	13	18	17

- 本品は、天然ゴムを使用しています。

【使用目的又は効果】＊

管状手術器具で、吸引又は灌流あるいは他の手術器具の挿入のための通路を残すものをいう。本品は洗浄・滅菌後に再使用する。

【使用方法等】＊

1. 本品を洗浄・消毒・滅菌等行なって清潔にする。
滅菌は、E O G滅菌（温度 60℃以下）を推奨します。
2. 患者へ経口挿管したチューブを本品のつば部の半円カット部に沿わせ、サージカルテープ等でチューブに固定する。
3. チューブを固定した本品を患者の上歯と下歯との間に挟む。
4. 使用中は、正しい位置に装着していることを確認する。

【使用上の注意】

1. 本品に傷・異物・劣化等が認められた場合は、使用を中止すること。
2. 何回も滅菌で高温に曝されると、弾性がなくなったり、ヒビが生じます。このような場合は、使用を中止すること。
3. 長期使用の場合、1日1回は本器の固定を外し、オーラルケアを行ない、設置する位置を移動して固定し直すこと。〔チューブやバイトブロックが口角、口唇、口蓋、舌の同じところを長く圧迫し続けると、口角の発赤や口唇の損傷、粘膜のびらんや壊死を起こすことがある〕

【保管方法及び有効期間等】＊

1. 保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管してください。

【保守・点検に係る事項】

1. 本品を再使用する場合は、感染防止のために、洗浄後E O G滅菌を行なってから使用してください。
滅菌温度：60℃以下

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】＊

製造販売業者：eastsidemed株式会社 **
東京都文京区本郷3-24-5
TEL 03-3815-0056 FAX 03-3818-4085