

IMGポリチエル氏送気球

【警告】

1. 本品は未滅菌品なので、必要に応じて使用前に洗浄・消毒・E O G滅菌を行なうこと。
2. 本品は、天然ゴムを使用している。
 - ・天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な措置を施すこと。
 - ・天然ゴムと接触する機会の多い人は、天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意すること。


【禁忌・禁止】

- ・天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある医療関係者の使用及び患者への使用をしないこと。
- ・高圧蒸気滅菌は行なわないこと。〔変形・破損〕＊

【形状・構造及び原理等】

本品は、天然ゴム製の中空球体（ゴム球）に取り外し可能なポリチエル先（鼻腔挿入用ノズル）が大・小2種類附属したスポイト状の手動式鼻腔洗浄器具である。型式は、ゴム球の寸法および内容量により2型式を有している。


1. 形状及び寸法
《全体図》

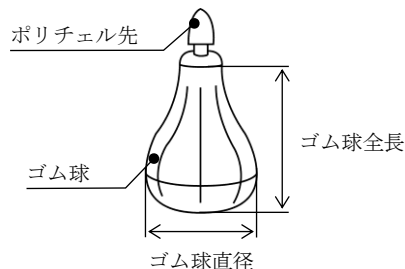

寸 法

製品番号	型式	ゴム球		
		容量	直径	全長
05081	No. 6	100cc	74mm	99.5mm
05082	No. 8	130cc	80mm	107mm

《ポリチエル先》

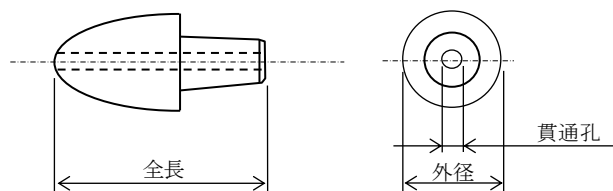

寸 法

サイズ	全長	貫通孔	外径
小	32mm	4mm	15mm
大	42mm	5mm	18mm

- 本品は天然ゴムを使用しています。

【使用目的又は効果】＊

身体の一部に適用する液体を噴出する装置をいう。衛生状態の維持又は治療の一環として用いる。手動式である。

【使用方法等】＊

1. 必要に応じて使用前に洗浄・消毒・滅菌等を行ない清潔にする。滅菌の場合は、E O G滅菌（温度 60℃以下）を推奨します。
2. 患者のサイズに適したポリチエル先を選択し、ポリチエル先をゴム球へしっかり挿入する。
3. 洗浄液を用意し、ゴム球を押圧したままで、ポリチエル先を洗浄液容器の中に入れ、次に手を緩めると洗浄液が本品内へ吸い込まれ貯まる。
4. ポリチエル先を鼻腔に軽く密着させ、始めはゴム球を軽く押し、口を少し開けさせ、声を出させながら徐々に洗浄する。他方の鼻または口から洗浄水が出ることを確認し、以後ゴム球の押圧加減によって噴出量を調節しながら洗浄する。他方の鼻または口から洗浄水が出ないときは、すぐ使用を中止すること。
5. 同様に他方の鼻腔も洗浄する。洗浄後、鼻腔内の残留水は鼻をかんで出す。

【使用上の注意】

1. 各構成品がしっかり接続されていることを確認してから使用すること。〔液漏れの怖れ〕
2. 万一製品に傷・異物・劣化などを発見した場合は使用しないこと。
3. 刃物等鋭利なものに接触させないこと。〔切断の怖れ〕
4. 何回も滅菌による高温に曝されると、弾性が減じたり、亀裂が生じます。このような場合は使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】＊

1. 保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管してください。

【保守・点検に係る事項】

1. 本品を再使用する場合は、感染を防止するために、洗浄・消毒・E O G滅菌を行なってから再使用してください。
滅菌温度：60℃以下

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】＊

製造販売業者：eastsidemed 株式会社 ＊＊
東京都文京区本郷3-24-5
TEL 03-3815-0056 FAX 03-3818-4085