

機械器具（76）医療用吸入器
超音波ネブライザ 12719000 一般医療機器

e s メッシュネブライザ MN100ZH

【警告】

1. 本品を使用する際は必ず医師の指導に従うこと。
2. 薬液の種類、用量、用法については、必ず医師の指導に従うこと。〔症状悪化の恐れがある〕
3. 薬液ボトル、マウスピース、マスク、マスク用コネクタは、使用後に必ず洗浄・消毒すること。洗浄・消毒後は、速やかに乾燥させ、汚染を防ぐこと。〔雑菌の繁殖、感染の恐れがある〕
4. 本品を複数の患者が共有する場合は、必ず使用する患者ごとに薬液ボトル、マウスピース、マスク、マスク用コネクタを使用すること。〔感染の恐れがある〕


【禁忌・禁止】

1. 本品を改造しないこと。
2. 自動呼吸装置に本品を接続しないこと。
3. 薬液消毒後の部品は、水洗いで十分に消毒液を洗い落とすこと。
4. 次亜塩素酸ナトリウム系の消毒液で消毒しないこと。〔錆びの原因となる〕
5. 専用ACアダプタ以外は使用しないこと。〔火災、感電の原因となる〕
6. 水の吸入はしないこと。〔症状悪化の恐れがある〕
7. メッシュや振動子（薬液ボトルと器械本体との接点）を触ったり、綿棒・ピンなどで突かないこと。〔破損の原因となる〕

【形状・構造及び原理等】

本品は、機械的振動により発生させたエアロゾル化した医薬品を供給する装置である。
本品は、器械本体、薬液ボトル、マウスピース、マスク、マスク用コネクタで構成されている。

1. 形状及び寸法 形 状

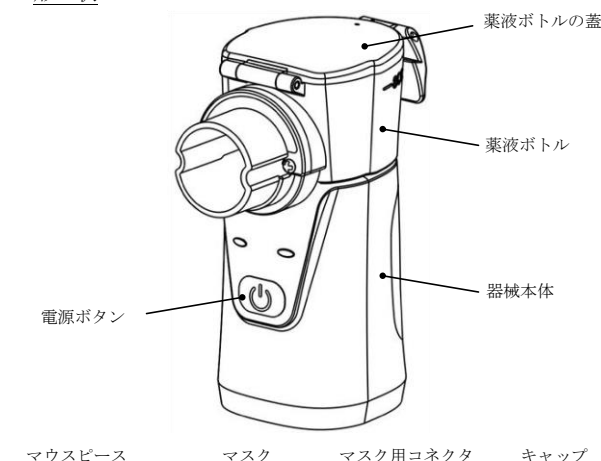

寸 法：本体外形 41.5mm×45mm×93mm
重 量：85 g（電池含まず）＊

2. 原材料

マウスピース：シリコーン

3. 電氣的定格 機器の分類

電撃に対する保護の形式による分類：

単3形アルカリ乾電池使用時：内部電源機器

専用ACアダプタ使用時：クラスⅡ機器

電撃に対する保護の程度による装着部の分類：BF形装着部

定格電圧

DC 3 V（単3形アルカリ乾電池×2本使用時）

AC 100V 50/60Hz、DC 3 V/1.6 A（専用ACアダプタ使用時）

消費電力：約2 W

専用ACアダプタ：入力 AC 100-240V、50/60Hz、0.2 A
出力 DC 3 V、1.6 A

本品は、IEC60601-1-2のEMDに適合しています。＊＊

4. I P 規格・防水保護構造及び保護等級

水及び微粒子状物質の有害な浸入に対する保護の程度：IP22

【使用目的又は効果】

機械的振動により発生させたエアロゾル化した医薬品を供給する装置をいう。エアロゾル発生源、リザーバ等から構成される。

【使用方法等】

1. 薬液の入れ方
 - 1) 器械本体から薬液ボトルを取り外す。
 - 2) 薬液ボトルの蓋を開け薬液を入れる。薬液の量は最大8 mLです。
 - 3) 薬液ボトルの蓋を閉める。固定されたことを確認する。固定されていない場合、薬液漏れが発生します。
 - 4) 薬液ボトルを器械本体に取り付ける。
 - 5) マウスピースまたは、マスク＋マスク用コネクタを本体に接続する。
2. 作動方法
 - ・電源ボタンを押すと、右上のランプが緑に点灯し作動する。
 - 電源ボタンを押すと消灯し止まる。
3. エアロゾル発生／噴霧
 - 1) 本体を手に持ち、楽な姿勢で吸入してください。
 - 2) 吸入が終わったら、電源ボタンを押して電源を切ってください。
4. 薬液ボトルの薬液がなくなると、自動的に電源が切れる。

【使用上の注意】

1. 長期間使用しないときは、電池を取り出すこと。
2. 長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜くこと。
3. 薬液ボトル内に薬液が入っていない状態で電源を入れないこと。
4. 乾電池交換の際には、2本同時に同じ種類のアルカリ乾電池へ交換すること。マンガン乾電池は高電圧を保てる期間が短いため使用しないこと。また、充電式乾電池は必要な電圧に満たないため使用しないこと。
5. 器械本体、専用ACアダプタの水濡れに注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

1. 温度：0～45℃、湿度：80％以下の場所で保管してください。
2. 直射日光のあたる場所には置かないでください。

【保守・点検に係る事項】

1. 初めて使うとき、使用前、長時間使用しなかったときは、薬液ボトル、マウスピース、マスク、マスク用コネクタを洗浄・消毒すること。
2. 薬液ボトルは煮沸消毒しないこと。
3. 器械本体、専用ACアダプタ、薬液ボトル、マウスピース、マスク、マスク用コネクタを電子レンジ内で乾燥させたり、煮沸しないこと。
4. 薬液ボトルをティッシュなどで拭かないこと。
5. 薬液ボトルに薬液を入れたまま放置しないこと。
6. 使用前、使用後に点検をし、異常が認められたときは、製造販売業者に点検依頼をしてください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：eastsidemed 株式会社

東京都文京区本郷3-24-5

TEL 03-3815-0056 FAX 03-3818-4085