

再使用禁止

技工用ツール


【禁忌・禁止】

プロセシングメール、プロセシングスパーサー、ワキシングスクリューは再使用禁止。

*【形状・構造及び原理等】

*1.形状

ABH

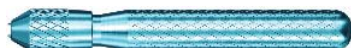

1000-86




1000-96-L



1000-96-LEA



1000-96-LCTD

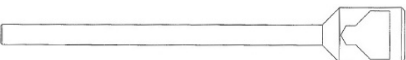

1000-93-L4

1000-93-L20



1000-100-L4

1000-100-L20



1000-52XL



1000-54XL



*2.構成品

(単位:mm)

カタログ番号	カタログ名	全長
ABH	アバットメントホルダー	127

カタログ番号	カタログ名	A	B	C
1000-86	ボールアバットメントツールセット	1.6	2.5	3.0

カタログ番号	カタログ名	先端径
1000-96-L	ロケーター コアツール	3.9
1000-96-LEA	ロケーター アバットメントドライバー	-

カタログ番号	カタログ名	刃部内径
1000-96-LCTD	デンチャーキャップ リムーバルトレフ インドリル	5.6

カタログ番号	カタログ名	内径
1000-93-L4	ロケーター リプレースプロセシングメール黒 (4 列)	3.6
1000-93-L20	ロケーター リプレースプロセシングメール黒 (20 列)	
1000-100-L4	ロケーター プロセシングスパーサー (4 列)	4.0
1000-100-L20	ロケーター プロセシングスパーサー (20 列)	

カタログ番号	カタログ名	全長	シャフト径
1000-52XL	AC ワキシングスクリュー D2.6	31	2.6
1000-54XL	AC ワキシングスクリュー D2.2	31	2.2

※プロセシングメール、プロセシングスパーサー、ワキシングスクリューは単回使用である。

*3.組成

アルミニウム、ナイロン、ステンレス鋼、真鍮、ポリスルホン、ポリエチレン、ポリアセタール、チタン合金

【使用目的又は効果】

本品は、歯科インプラント用の補綴物の設計、製作、装着などに用いる器具である。

【使用方法等】

[ABH] アナログを併用して本品でアバットメントを把持し、形成を行う。

[1000-86] 本品の先端でアタッチメントの着脱、維持力の調整を行う。

[1000-96-L, 1000-96-LEA] 本品の先端でメール又はロケーターアバットメントの着脱を行う。アバットメントの着脱に際し清潔性が求められる場合は、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。(推奨滅菌条件:121℃ 40 分間)

[1000-96-LCTD] 義歯内面のデンチャーキャップの除去に用いる。

[1000-93-L4, 1000-93-L20] 義歯作製中に、メールの代わりとして一時的に使用する。

[1000-100-L4, 1000-100-L20] デンチャーキャップが納まるスペースを義歯内面に設けるために使用する。

[1000-52XL, 1000-54XL] アバットメントに直接ワックスを築盛して鑄接する際に、本品でアバットメント本体をアナログに連結する。

【使用上の注意】

- 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
- 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- 洗浄剤・消毒剤を使用する場合は材質(アルミニウム、樹脂等)への腐食・変質等を避けるため適切な溶液、用量を用いること。
- プロセシングメール、プロセシングスパーサー、ワキシングスクリューは、使用後に適切に廃棄し、再使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。
- 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
- 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
- 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり、刃の損傷等の異常がないか点検をすること。
- 強アルカリ/強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
- 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社 インプラテックス
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>
TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505
輸入先国 :アメリカ合衆国
輸入先製造業者:インプラントダイレクト社
(Implant Direct Sybron Manufacturing, LLC)