


ドライバーツール

**【形状・構造及び原理】

**1.形状



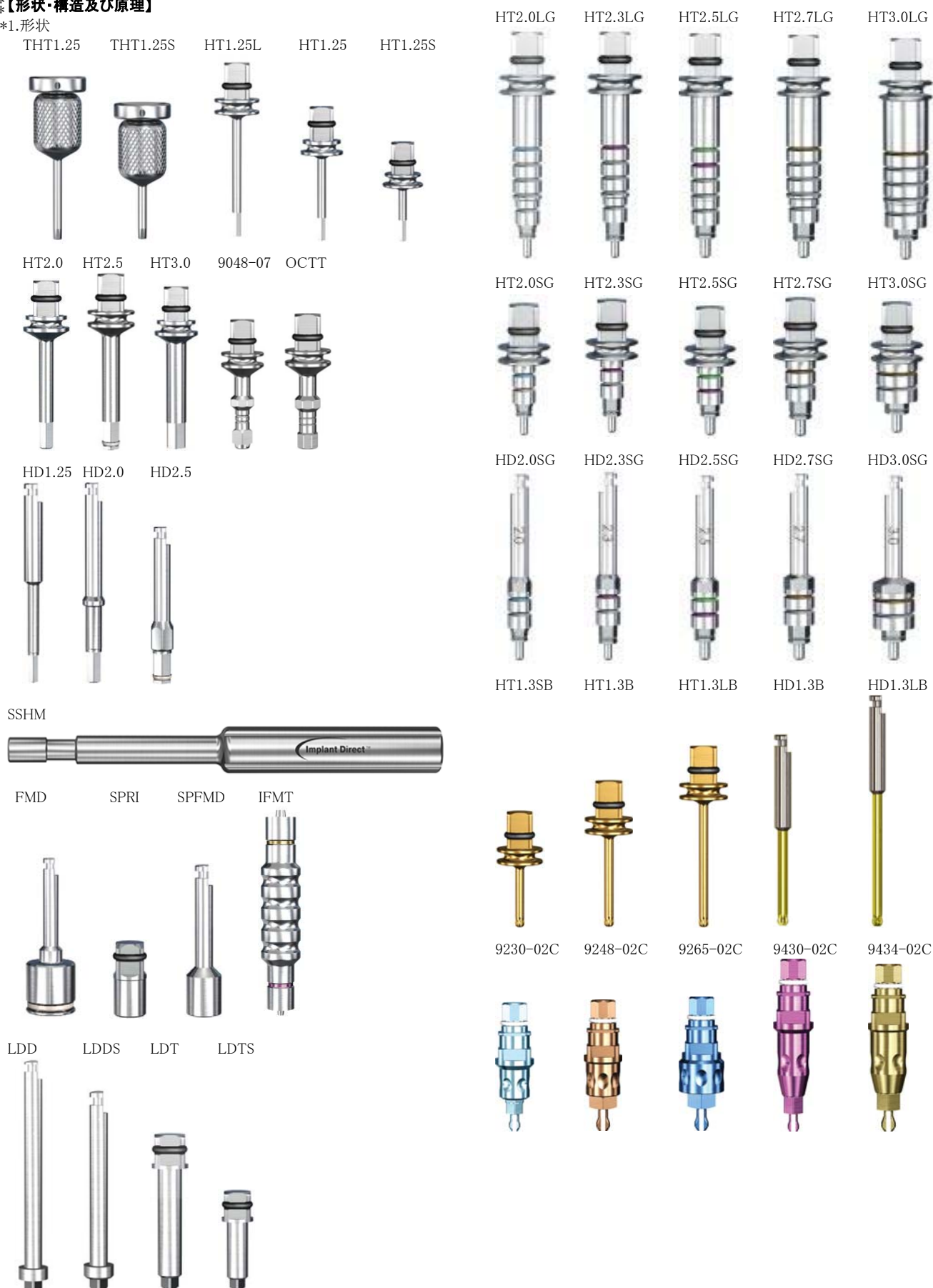

*** 2.構成品

カタログ番号	カタログ名	六角二面幅 (mm)
THT1.25	1.25mm テーパードヘックスドライバーL	1.25
THT1.25S	1.25mm テーパードヘックスドライバーS	1.25
HT1.25L	1.25mm ヘックスドライバーエクストラロング	1.25
HT1.25	1.25mm ヘックスドライバーL	1.25
HT1.25S	1.25mm ヘックスドライバーS	1.25
HT2.0	2.0mm ヘックスインサージョンツール L	2.0
HT2.5	2.5mm ヘックスインサージョンツール L	2.4
HT3.0	3.0mm ヘックスインサージョンツール L	3.0
カタログ番号	カタログ名	先端四角二面幅 (mm)
9048-07	SP ST インサージョンツール	2.5
カタログ番号	カタログ名	先端八角二面幅 (mm)
OCTT	オクタゴンアライメントツール	3.1
カタログ番号	カタログ名	六角二面幅 (mm)
HD1.25	1.25mm ヘックスツール CA	1.25
HD2.0	2.0mm ヘックスツール CA	2.0
HD2.5	2.5mm ヘックスツール CA	2.4
カタログ番号	カタログ名	四角穴二面幅 (mm)
SSHM	インサージョンハンドドライバー	4.0
FMD	フィクスチャーマウントツール CA	4.0
カタログ番号	カタログ名	八角穴二面幅 (mm)
SPRI	SW ラチェットインサート	3.0
SPFMD	SW フィクスチャーマウントツール CA	3.0

カタログ番号	カタログ名	両端径 (mm)	
IFMT	IA フィクスチャーマウントツール	4.4/4.8	
カタログ番号	カタログ名	先端呼び (mm)	全長 (mm)
LDD	ロケーター ドライバー 29mm CA	2.5	30
LDDS	ロケーター ドライバー 23mm CA	2.5	24
カタログ番号	カタログ名	先端呼び (mm)	全長 (mm)
LDT	ロケーター スクエアドライバー 21mm レンチ	2.5	21
LDS	ロケーター スクエアドライバー 15mm レンチ	2.5	15
カタログ番号	カタログ名	六角二面幅 (mm)	
HT2.0LG	2.0mm ヘックスインサージョンドライバーL	2.0	
HT2.3LG	2.3mm ヘックスインサージョンドライバーL	2.2	
HT2.5LG	2.5mm ヘックスインサージョンドライバーL	2.4	
HT2.7LG	2.7mm ヘックスインサージョンドライバーL	2.6	
HT3.0LG	3.0mm ヘックスインサージョンドライバーL	3.0	
カタログ番号	カタログ名	六角二面幅 (mm)	
HT2.0SG	2.0mm ヘックスインサージョンドライバーS	2.0	
HT2.3SG	2.3mm ヘックスインサージョンドライバーS	2.2	
HT2.5SG	2.5mm ヘックスインサージョンドライバーS	2.4	
HT2.7SG	2.7mm ヘックスインサージョンドライバーS	2.6	
HT3.0SG	3.0mm ヘックスインサージョンドライバーS	3.0	
カタログ番号	カタログ名	六角二面幅 (mm)	
HD2.0SG	2.0mm ヘックスインサージョンドライバーCA	2.0	
HD2.3SG	2.3mm ヘックスインサージョンドライバーCA	2.2	
HD2.5SG	2.5mm ヘックスインサージョンドライバーCA	2.4	
HD2.7SG	2.7mm ヘックスインサージョンドライバーCA	2.6	
HD3.0SG	3.0mm ヘックスインサージョンドライバーCA	3.0	
カタログ番号	カタログ名	先端呼び (mm)	全長 (mm)
HT1.3SB	1.3mm オフアクシスドライバーS	1.3	17.9
HT1.3B	1.3mm オフアクシスドライバーM		22.4
HT1.3LB	1.3mm オフアクシスドライバーL		27.4
HD1.3B	1.3mm オフアクシス CA		27.7
HD1.3LB	1.3mm オフアクシス L CA		32.8
カタログ番号	カタログ名	二面幅 (mm)	
9230-02C	SW キャリアー/ドライバー P3.7	2.0	
9248-02C	SW キャリアー/ドライバー P4.8	2.5	
9265-02C	SW キャリアー/ドライバー P6.5	2.5	
カタログ番号	カタログ名	六角二面幅 (mm)	
9430-02C	SA キャリアー/ドライバー P3.0	2.2	
9434-02C	SA キャリアー/ドライバー P3.4	2.6	
カタログ番号	カタログ名	ブラットフォーム径 (mm)	
3.0CPD	3.0mm コニカルブラットフォームドライバー	3.0	
3.4CPD	3.4mm コニカルブラットフォームドライバー	3.4	
3.0CPT	3.0mm コニカルブラットフォームツール	3.0	
3.4CPT	3.4mm コニカルブラットフォームツール	3.4	
3.0CRS	3.0mm コニカルリプレースメントスクリュー	3.0	
3.4CRS	3.4mm コニカルリプレースメントスクリュー	3.4	

カタログ 番号	カタログ名	プラットフォーム 径(mm)
3.0HPD	3.0mm ヘックスプラットフォームドライバー	3.0
3.5HPD	3.5mm ヘックスプラットフォームドライバー	3.5
4.5HPD	4.5mm ヘックスプラットフォームドライバー	4.5
3.0HPT	3.0mm ヘックスプラットフォームツール	3.0
3.5HPT	3.5mm ヘックスプラットフォームツール	3.5
4.5HPT	4.5mm ヘックスプラットフォームツール	4.5
3.0HRS	3.0mm ヘックスリブレースメントスクリュー	3.0
3.5HRS	3.5mm ヘックスリブレースメントスクリュー	3.5
4.5HRS	4.5mm ヘックスリブレースメントスクリュー	4.5

カタログ 番号	カタログ名	プラットフォーム 径(mm)
HTXS3.0	3.0mm ヘックスツールエクストラクタースクリュー	3.0
HTXS3.5	3.5mm ヘックスツールエクストラクタースクリュー	3.5
HTXS4.5	4.5mm ヘックスツールエクストラクタースクリュー	4.5
CTXS3.0	3.0mm コニカルツールエクストラクタースクリュー	3.0
CTXS3.4	3.4mm コニカルツールエクストラクタースクリュー	3.4

3.組成

ステンレス鋼、ニトリルゴム、シリコンゴム、PEEK、チタン合金

【使用目的又は効果】

本品は、片端がネジ等の頭部と嵌合する形状をしており、トルクをかけて器具を締めたり外したりする目的で使用するものである。

【使用方法等】

1. キャリアー/ドライバー以外は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件： 132℃ 15 分間
2. 本品を、手指で又はレンチや歯科用ハンドピース等を併用して操作し、本品の片端に嵌合する器具を締めたり外したりする。
3. 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して保管する。

【使用上の注意】

1. 本品の使用前に、必ずサイズを確認すること。
2. 折損、変形等の原因になり得るので過度の締め付け等、使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
3. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
4. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり等の異常がないか点検をすること。
7. 強アルカリ/強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者 : 株式会社 インプラテックス
 ホームページ: <http://www.itx.co.jp>
 TEL: 03-5850-8555 FAX: 03-5850-8505
 輸入先国 : アメリカ合衆国
 輸入先製造業者: インプラントダイレクト社
 (Implant Direct Sybron Manufacturing, LLC)