


機械器具 58 整形用機械器具

一般医療機器 手術用レンチ (32871000)

レンチ

**【形状・構造及び原理】

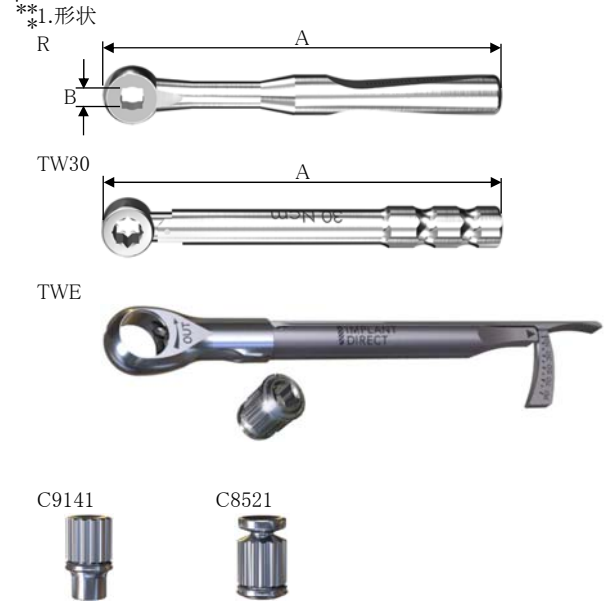

- 1.使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。
- 2.汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- 3.超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- 4.洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
- 5.洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
- 6.使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり等の異常がないか点検をすること。
- 7.強アルカリ／強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
- 8.洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。
- 9.トルクレンチは、定期的に(半年に1回程度)校正を行うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社 インプラテックス
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>
TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505

輸 入 先 国 :アメリカ合衆国
輸入先製造業者:インプラントダイレクト社
(Implant Direct Sybron Manufacturing, LLC)

**2.寸法 (単位:mm)

カタログ番号	カタログ名	A	B
R	ラチェットレンチ	76.2	4.0
TW30	トルクレンチ 30Ncm	72.4	—

カタログ番号	カタログ名	全長
TWE	トルクレンチ 10-90Ncm	99

カタログ番号	カタログ名	六角部呼び
C9141	3mm ヘックスドライバー	3

カタログ番号	カタログ名	スクエア部呼び
C8521	4×4mm ドライバー	4

**3.組成

ステンレス鋼、チタン合金

【使用目的又は効果】

本品は、固定したかみ合い部をもつ手動式の手術器具であり、ドライバー等の把持、回転に用いるためのものである。

*【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高压蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件: 132℃ 15 分間
2. 4mm スクエアや 3mm 六角の頭部をもつドライバー等に本品を接続し、回転させる。
3. 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して保管する。

**【使用上の注意】

- 1.使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
2. 首折れ式のトルクレンチ(TW30)は、滅菌前に首折れ部分に注油を行うこと。首を折った状態にして滅菌し、滅菌後に適切に首折れするかどうか手指で操作して確認すること。
3. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
4. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
5. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。
6. 本品の使用前に既定の又は任意に設定したトルク値を必ず確認すること。
7. トルクレンチに劣化や異常が見られた場合は、速やかに使用を中止し、専門家による校正を依頼すること。

【保守・点検に係る事項】