
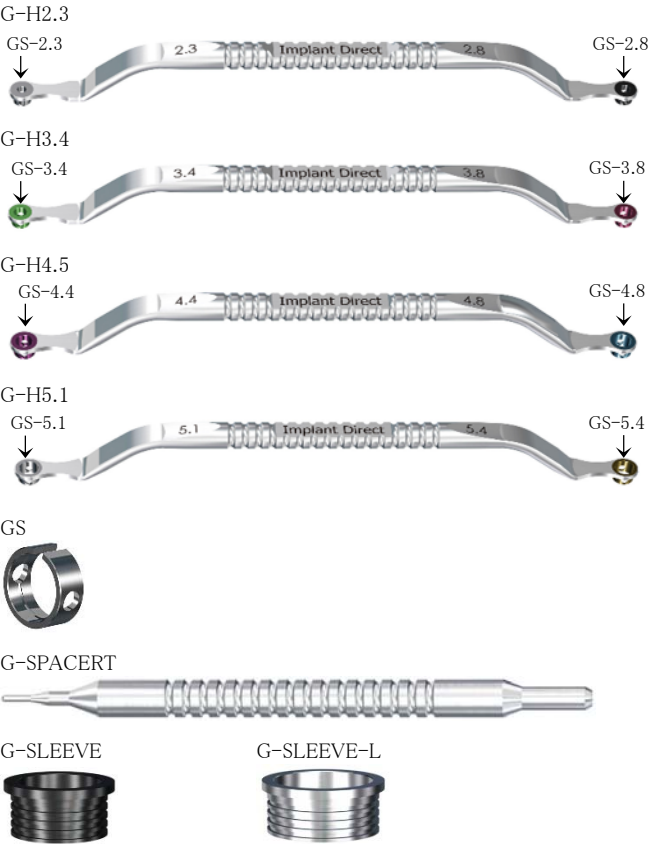


機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科用インプラント手術器具 (70965001)

ガイドッドサージェリー ツール

【形状・構造及び原理等】

1.形状
G-HK

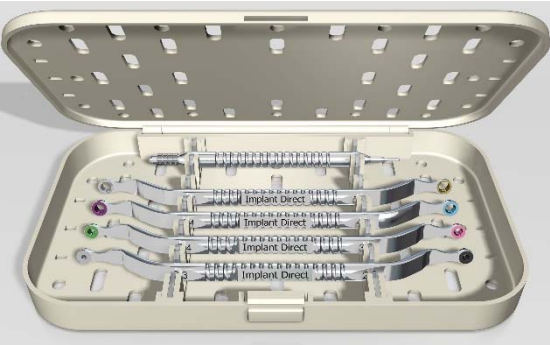

2.寸法

・ガイドッドサージェリー ハンドルキット LG/IA (G-HK)

カタログ番号	カタログ名	高さ(mm)
G-H2.3	ガイドッドサージェリー ハンドル 2.3-2.8	1.5
G-H3.4	ガイドッドサージェリー ハンドル 3.4-3.8	
G-H4.5	ガイドッドサージェリー ハンドル 4.4-4.8	
G-H5.1	ガイドッドサージェリー ハンドル 5.1-5.4	
カタログ番号	カタログ名	内径(mm)
GS	ガイドッドサージェリー スペーサー	4.9
カタログ番号	カタログ名	先端径(mm)
G-SPACERT	ガイドッドサージェリー ツール	1.5/5.0
※	ガイドッドサージェリー ハンドルキット トレイ	

※雑品

・その他

カタログ番号	カタログ名	内径(mm)
GS-2.3	ガイドッドサージェリー ドリルアダプター2.3	2.3
GS-2.8	ガイドッドサージェリー ドリルアダプター2.8	2.9
GS-3.4	ガイドッドサージェリー ドリルアダプター3.4	3.4

GS-3.8	ガイドッドサージェリー ドリルアダプター3.8	3.8
GS-4.4	ガイドッドサージェリー ドリルアダプター4.4	4.5
GS-4.8	ガイドッドサージェリー ドリルアダプター4.8	4.8
GS-5.1	ガイドッドサージェリー ドリルアダプター5.1	5.1
GS-5.4	ガイドッドサージェリー ドリルアダプター5.4	5.5
G-SLEEVE	サージカルガイドスリーブ S	5.0
G-SLEEVE-L	サージカルガイドスリーブ L	6.1

3.組成

ステンレス鋼、チタン合金

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの外科手術において、正確な位置及び方向の骨孔を形成するために用いる。

【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件:132℃ 15 分間
2. CT 撮影データを基に、スリーブを用いてサージカルガイドを作製する。
3. 適切なハンドルを選択してドリルアダプターをサージカルガイドに嵌め、専用ドリルにて骨を穿孔する。ハンドルはサイズの小さなものから順に使用し、徐々に骨孔を拡大する。
4. 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して保管する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1) ドリルは、ハンドルのドリルアダプター内に入れてから回転を開始すること。
- 2) 本品を使用する際は、ドリルの深度マーキングがインプラントの長さとは一致しない点に注意すること。
- 3) ドリルアダプターは摩耗したら交換すること。ツールの先端を使って下図の方向に回して着脱する。

(取り外し)



(装着)



- 4) サージカルガイドの作製にスリーブ L を用いた場合で、ドリルアダプターの直径が 3.8mm 以下のハンドルを使用する際は、ドリルアダプターにスペーサーを装着すること。
- 5) スペーサーはドリルアダプターにパチンと嵌められるようになっている。取り外す時は、ツールの先端をスペーサー側面の穴に差し込んで操作する。

(装着)



(取り外し)



【使用上の注意】

1. 本品の使用前に、必ずサイズを確認すること。
2. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
3. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
4. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよ

- う、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
5. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり等の異常がないか点検をすること。
7. 強アルカリ／強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社 インプラテックス
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>
TEL: 03-5850-8555 FAX: 03-5850-8505

輸 入 先 国 : アメリカ合衆国
輸入先製造業者: インプラントダイレクト社
(Implant Direct Sybron Manufacturing, LLC)