
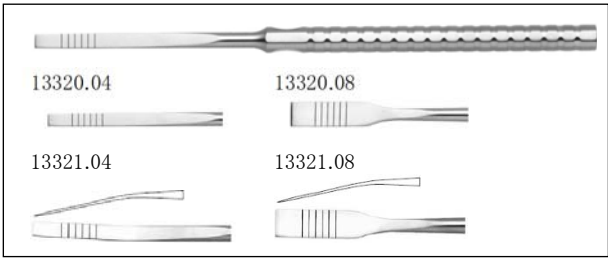


機械器具 41 医療用のみ
一般医療機器 のみ(10824000)

STM チゼル

***【形状・構造及び原理等】

***1.形状

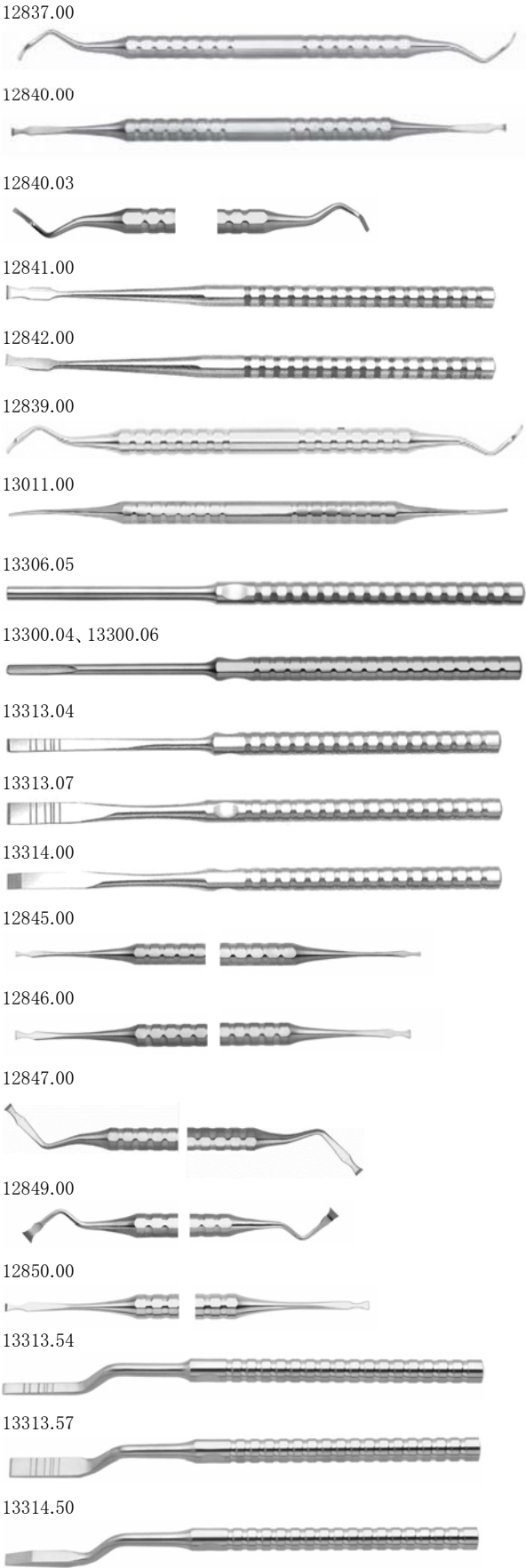

***2.寸法

カタログ 番号	カタログ名	刃部幅 (mm)
12837.00	ロードス バックアクション 36-37 hy-grip	3.0/3.0
12840.00	オッセンバイン チゼル 2.5/2.5mm hy-grip	2.5/2.5
12840.03	オッセンバイン チゼル 1.5/1.5mm hy-grip	1.5/1.5
12841.00	オッセンバイン チゼル 曲アップ 5mm hy-grip	5.0
12842.00	オッセンバイン チゼル 曲ダウン 5mm hy-grip	5.0
12839.00	ボーンチゼル 2.5/3.0mm hy-grip	2.5/3.0
13011.00	ウェデルステット チゼル CP1/2 2/2mm hy-grip	2.0/2.0
13306.05	ヘモスタティック チゼル φ5mm hy-grip	5.0
13300.04	ルーカス ゴージ 4mm 17cm hy-grip	4.0
13300.06	ルーカス ゴージ 6mm 17cm hy-grip	6.0
13313.04	イクルホウト チゼル 4mm 目盛付 hy-grip	4.0
13313.07	イクルホウト チゼル 7mm 目盛付 hy-grip	7.0
13314.00	イクルホウト チゼル 5mm hy-grip	5.0
12845.00	フェディ チゼル 2/2mm hy-grip	2.0/2.0
12846.00	フェディ チゼル 2.5/2.5mm hy-grip	2.5/2.5
12847.00	フェディ チゼル 3/3mm hy-grip	3.0/3.0
12849.00	オッセンバイン チゼル 4/4mm hy-grip	4.0/4.0
12850.00	ペリオドンタルチゼル 3/2mm hy-grip	3.0/2.0
13313.54	イクルホウト チゼル 曲 4mm 目盛付 hy-grip	4.0
13313.57	イクルホウト チゼル 曲 7mm 目盛付 hy-grip	7.0
13314.50	イクルホウト チゼル 曲 5mm hy-grip	5.0
13320.04	バルチ チゼル 4mm 目盛付 hy-grip	4.0
13320.08	バルチ チゼル 8mm 目盛付 hy-grip	8.0
13321.04	バルチ チゼル 曲 4mm 目盛付 hy-grip	4.0
13321.08	バルチ チゼル 曲 8mm 目盛付 hy-grip	8.0
13321.14	シュメルツァイゼン チゼル曲 4mm 目盛付 hy-grip	4.0
13321.18	シュメルツァイゼン チゼル曲 8mm 目盛付 hy-grip	8.0

3.組成

ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は片面に斜角をつけた一枚刃の手術器具、及び槍状で軸の近位端に専用ハンドルを取り付けて使用するステンレス製の器具からなり、骨孔の形成や骨を押し広げる目的で使用し、垂直的又は水平的な骨造成が可能である。

【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件: 121℃ 20 分間
134℃ 5 分間
2. チゼルの先端刃部を歯槽骨にあてがい、必要に応じてハンドル部の端部をマレットにて槌打し、骨を切断する。
3. 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ

等にて滅菌して保管する。

【使用上の注意】

1. 本品の使用前に、必ずサイズを確認すること。
2. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
3. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
4. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
5. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり、刃の損傷等の異常がないか点検をすること。
7. 強アルカリ／強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社 インプラテックス
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>
TEL: 03-5850-8555 FAX: 03-5850-8505
輸 入 先 国 : ドイツ
輸入先製造業者: ストーマ社
(Storz am Mark GmbH)