

機械器具 62 歯科用切削器
一般医療機器 歯周用キュレット(41660000)

STM 歯周用キュレット

***【形状・構造及び原理等】

***1.形状

7751.00, 7751.10



7753.00, 7753.10



7755.00, 7755.10



7757.00, 7757.10



7759.00, 7759.10



7761.00, 7761.10



7763.00, 7763.10



7765.00, 7765.10



7767.00, 7767.10



2765.00



7555.00



7557.00



7559.00



7561.00



7563.00



7861.00, 7861.10



7863.00, 7863.10



7865.00, 7865.10



7771.00, 7771.10



7772.00, 7772.10




7774.00, 7774.10




7894.00, 7894.10



2861.00

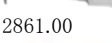

2863.00

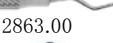

2865.00



2771.00



2774.00



2807.00



7755.22, 7755.32



7761.22, 7761.32



7763.22, 7763.32



12861.10



12863.10



12865.10



12771.10



12774.10



12807.10



2783.00



2784.00



7751.12



***2.寸法

単位:mm

カタログ 番号	カタログ名	ハンド ル径
7751.00	グレーシーキュレット GRC1-2 φ8mm (黄)	8.0
7751.10	グレーシーキュレット GRC1-2 φ10mm (黄)	10
7753.00	グレーシーキュレット GRC3-4 φ8mm (黄)	8.0
7753.10	グレーシーキュレット GRC3-4 φ10mm (黄)	10
7755.00	グレーシーキュレット GRC5-6 φ8mm (黄)	8.0
7755.10	グレーシーキュレット GRC5-6 φ10mm (黄)	10
7757.00	グレーシーキュレット GRC7-8 φ8mm (緑)	8.0
7757.10	グレーシーキュレット GRC7-8 φ10mm (緑)	10
7759.00	グレーシーキュレット GRC9-10 φ8mm (緑)	8.0
7759.10	グレーシーキュレット GRC9-10 φ10mm (緑)	10
7761.00	グレーシーキュレット GRC11-12 φ8mm (紫)	8.0
7761.10	グレーシーキュレット GRC11-12 φ10mm (紫)	10
7763.00	グレーシーキュレット GRC13-14 φ8mm (紺)	8.0
7763.10	グレーシーキュレット GRC13-14 φ10mm (青)	10
7765.00	グレーシーキュレット GRC15-16 φ8mm (紫)	8.0
7765.10	グレーシーキュレット GRC15-16 φ10mm (紫)	10
7767.00	グレーシーキュレット GRC17-18 φ8mm (紺)	8.0
7767.10	グレーシーキュレット GRC17-18 φ10mm (紺)	10
2765.00	グレーシーキュレット GR15-16 φ8mm	8.0
7555.00	プロフィラクスキュレット GRPC5-6 φ8mm (黄)	8.0
7557.00	プロフィラクスキュレット GRPC7-8 φ8mm (グレー)	8.0
7559.00	プロフィラクスキュレット GRPC9-10 φ8mm (紫)	8.0
7561.00	プロフィラクスキュレット GRPC11-12 φ8mm (紺)	8.0
7563.00	プロフィラクスキュレット GRPC13-14 φ8mm (スレートグレー)	8.0
7861.00	ランガーキュレット LC1-2 φ8mm (緑)	8.0
7861.10	ランガーキュレット LC1-2 φ10mm (緑)	10
7863.00	ランガーキュレット LC3-4 φ8mm (グレー)	8.0
7863.10	ランガーキュレット LC3-4 φ10mm (グレー)	10
7865.00	ランガーキュレット LC5-6 φ8mm (黄)	8.0
7865.10	ランガーキュレット LC5-6 φ10mm (黄)	10
7771.00	コロンビアキュレット CUC13-14 φ8mm (水色)	8.0

7771.10	コロンビアキュレット CUC13-14 φ10mm (水色)	10
7772.00	コロンビアキュレット CUC2R-2L φ8mm (水色)	8.0
7772.10	コロンビアキュレット CUC2R-2L φ10mm (水色)	10
7774.00	コロンビアキュレット CUC4R-4L φ8mm (水色)	8.0
7774.10	コロンビアキュレット CUC4R-4L φ10mm (水色)	10
7894.00	ユニバーサルキュレット GXC4 φ8mm (水色)	8.0
7894.10	ユニバーサルキュレット GXC4 φ10mm (水色)	10
2861.00	ランガーキュレット L1-2 φ8mm	8.0
2863.00	ランガーキュレット L3-4 φ8mm	8.0
2865.00	ランガーキュレット L5-6 φ8mm	8.0
2771.00	コロンビアキュレット CU13-14 φ8mm	8.0
2774.00	コロンビアキュレット CU4R-4L φ8mm	8.0
2807.00	ヤンガーグッドキュレット YG7-8 φ8mm	8.0
7755.22	グレーシーキュレット GRXST5-6 φ8mm (黄) チタン	8.0
7755.32	グレーシーキュレット GRXST5-6 φ10mm (黄) チタン	10
7761.22	グレーシーキュレット GRXST11-12 φ8mm (紫) チタン	8.0
7761.32	グレーシーキュレット GRXST11-12 φ10mm (紫) チタン	10
7763.22	グレーシーキュレット GRXST13-14 φ8mm (紺) チタン	8.0
7763.32	グレーシーキュレット GRXST13-14 φ10mm (紺) チタン	10
12861.10	ランガーキュレット L1-2 φ10mm hy-grip	10
12863.10	ランガーキュレット L3-4 φ10mm hy-grip	10
12865.10	ランガーキュレット L5-6 φ10mm hy-grip	10
12771.10	コロンビアキュレット CU13-14 φ10mm hy-grip	10
12774.10	コロンビアキュレット CU4R-4L φ10mm hy-grip	10
12894.10	ユニバーサルキュレット GXC4 φ10mm hy-grip	10
12807.10	ヤンガーグッドキュレット YG7-8 φ10mm hy-grip	10
2783.00	ゴールドマンフォックスキュレット GF3	8.0
2784.00	ゴールドマンフォックスキュレット GF4	8.0
7751.12	グレーシーキュレット GRCXS1-2 φ10mm (黄)	10

3.組成

ステンレス鋼/チタン/PEEK

【使用目的又は効果】

本品は作業端の横断面が凹面の研磨された鋭利な刃をもち、歯科治療において歯周ポケット及び根面の搔爬に使用するための歯科用器具である。

【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件:121℃ 20 分間
134℃ 5 分間
2. 本品の両端部を歯根面に沿わせて根表面の搔爬を行う。
3. 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して、保管する。

【使用上の注意】

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
2. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
3. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
4. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり、刃の損傷等の異常がないか点検をすること。

7. 強アルカリ/強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。
9. シャープニングの反復により、刃部の形態が変わったもの、薄くなったものは使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社 インプラテックス
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>
TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505
輸 入 先 国 :ドイツ
輸入先製造業者: ストーマ社
(Storz am Mark GmbH)