
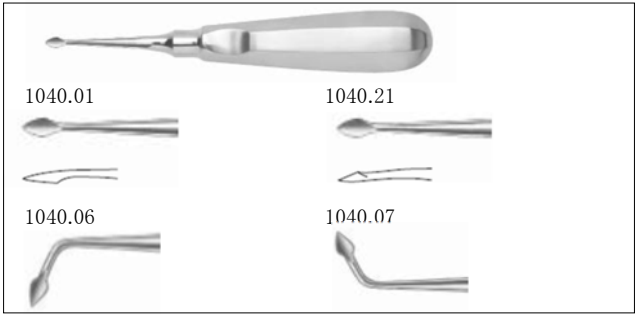


機械器具 45 医療用てこ
一般医療機器 歯科用エレベータ(16480000)

ミニヘーベル

【形状・構造及び原理等】

1.形状

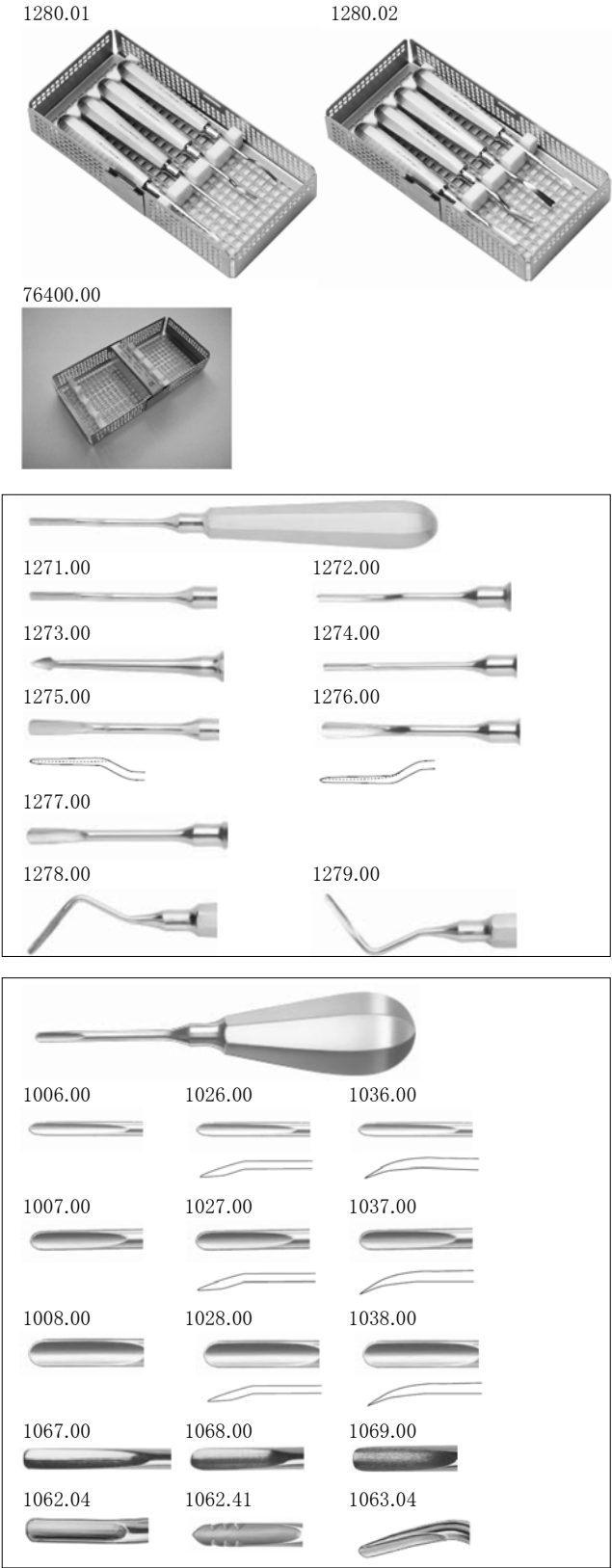

*2.寸法

ミニラクスエーターキット 1 (1280.01)

カタログ番号	カタログ名	先端幅(mm)
1271.00	ミニラクスエーター 近心用 2.5mm	2.5
1272.00	ミニラクスエーター 遠心用 2.5mm	2.5
1273.00	ミニラクスエーター 4mm	4.0
1274.00	ミニラクスエーター 2.5mm	2.5
※76400.00	ミニラクスエータートレイ	—

ミニラクスエーターキット 2 (1280.02)

カタログ番号	カタログ名	先端幅(mm)
1273.00	ミニラクスエーター 4mm	4.0
1275.00	ミニラクスエーター 近心用 5mm	5.0
1276.00	ミニラクスエーター 遠心用 5mm	5.0
1277.00	ミニラクスエーター 5mm	5.0
※76400.00	ミニラクスエータートレイ	—

その他

カタログ番号	カタログ名	先端幅(mm)
1278.00	ミニラクスエーター 曲レフト 2.5mm	2.5
1279.00	ミニラクスエーター 曲ライト 2.5mm	2.5
1006.00	ゲルトネル ルートエレベーター 2.5mm	2.5
1026.00	ゲルトネル ルートエレベーター アングル 2.5mm	2.5
1036.00	ゲルトネル ルートエレベーター 曲 2.5mm	2.5
1007.00	ゲルトネル ルートエレベーター 3.5mm	3.5
1027.00	ゲルトネル ルートエレベーター アングル 3.5mm	3.5
1037.00	ゲルトネル ルートエレベーター 曲 3.5mm	3.5
1008.00	ゲルトネル ルートエレベーター 4.5mm	4.5
1028.00	ゲルトネル ルートエレベーター アングル 4.5mm	4.5
1038.00	ゲルトネル ルートエレベーター 曲 4.5mm	4.5
1067.00	パイン ルートエレベーター 3mm	3.0
1068.00	パイン ルートエレベーター 4mm	4.0
1069.00	パイン ルートエレベーター 5mm	5.0
1062.04	ルートエレベーター 4mm 近心用	4.0
1062.41	ルートエレベーター 4mm 近心用 溝入	4.0
1063.04	ルートエレベーター 4mm 遠心用	4.0
1040.01	バーナード ラクスエーター	4.0
1040.21	バーナード ラクスエーター 曲	5.0
1040.06	バーナード ラクスエーター 曲レフト	4.2
1040.07	バーナード ラクスエーター 曲ライト	4.2

※雑品

3.組成

ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は抜歯又は歯根除去のために用いる、てこ様の形状の歯科用器具をいう。

**【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担

保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。

推奨滅菌条件:121℃ 20 分間

134℃ 5 分間

2. 本品を口腔内の目的箇所差し入れ、てこの原理又は楔の作用を利用して、抜歯又は歯根除去を行う。
3. 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗いし、その後、オートクレーブ等にて滅菌して保管する。

【使用上の注意】

1. 本品の使用前に、必ずサイズ確認すること。
2. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
3. 破損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。
4. 使用後は、付着している血液、体液、組織等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
5. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり、刃の損傷等の異常がないか点検をすること。
7. 強アルカリ／強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社 インブラテックス

ホームページ:<http://www.itx.co.jp>

TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505

輸 入 先 国 :ドイツ

輸入先製造業者:ストーマ社

(Storz am Mark GmbH)