

機械器具 55 医療用洗浄器  
一般医療機器 洗浄器キット(11297001)

再使用禁止


イリゲーションキット

【禁忌・禁止】

再使用禁止。

\*【形状・構造及び原理等】

\*1.形状

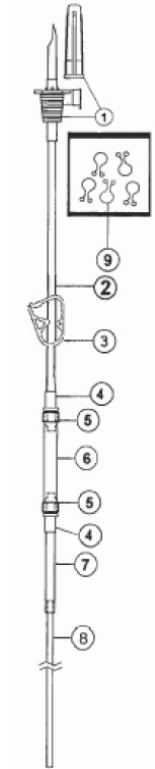

\*2.寸法

| No. | 構成品名        | 外径(mm) | 内径(mm) |
|-----|-------------|--------|--------|
| 1   | ピン針/キャップ    | —      | —      |
| 2   | イリゲーションチューブ | 4.1    | 3.0    |
| 4   |             | —      | —      |
| 5   |             | 4.1    | 3.0    |
| 7   |             | 4.1    | 3.0    |
| 8   |             | 3.0    | 1.2    |
| 3   | クランプ        | —      | —      |
| 6   | ポンプチューブ     | 5.6    | 2.4    |
| 9   | クリップ        | —      | —      |

\*3.組成

ポリ塩化ビニル、シリコン、ポリエチレン、ABS 樹脂、高密度ポリエチレン

【使用目的又は効果】

本品は、患者・ユーザーの身体の特定の部分又は部位の処置を行うために洗浄器ユニット又は装置とともに用いるパッケージ品をいう。

【使用方法等】

1. 本品とクリップを包装から取り出し、イリゲーションチューブの先をハンドピースに接続する。
2. クリップを用いてイリゲーションチューブとハンドピースコードを束ねる。
3. 併用する機器本体のハンドピース接続部にハンドピースコードを接続する。
4. ポンプの蓋を開き、ポンプチューブの部分をセットしポンプの蓋を閉じる。
5. 生理食塩水のバッグをバッグサポートロッドに掛け、ピン針のキャップをはずしてバッグに取り付ける。
6. 空気孔のキャップとクランプを開く。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1) 本品は洗浄液の容器のゴム栓に対し、斜めに刺通中に横方向へ

の力を加えないこと。

- 2) チューブを折り曲げたり、引っ張られた状態で使用しないこと。
- 3) 使用中は本品の破損、結合部のゆるみ及び薬液漏れについて、定期的に確認すること。
- 4) 併用する機器を作動させる前に、本品のクランプが開いていることを確認すること。
- 5) 使用後に本品を生理食塩水のバッグから取り外す時は、クランプを閉じてから行うこと。

\*\*【使用上の注意】

1. 開封時又は使用時に、接合部などの緩みが無いことを確認すること。
2. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。

\*【保管方法及び有効期間等】

滅菌製品の有効期間は 5 年間である。(自己認証による。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社 インプラテックス  
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>  
TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505  
輸入先国 :イタリア  
輸入先製造業者:メクトロン社  
(Mectron S.p.A.)