


機械器具 58 整形用機械器具  
一般医療機器 手術用クラウンドリルビット (37871001)

MEIS 歯科用バー

\*\*【形状・構造及び原理等】

\*\*1.形状

7407120

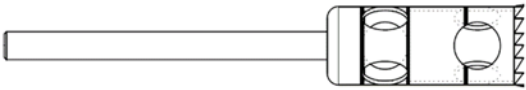

\*\*2.寸法

MEIS トレフィンバー/バーシックキット (7407120)

| カタログ番号        | カタログ名                      | 刃部外径/<br>内径 (mm) |
|---------------|----------------------------|------------------|
| 3300229205020 | MEIS トレフィンバー φ 3.0/2.0mm   | 3.0/2.0          |
| 3300229205040 | MEIS トレフィンバー φ 5.0/4.0mm   | 5.0/4.0          |
| 3300229205060 | MEIS トレフィンバー φ 7.0/6.0mm   | 7.0/6.0          |
| 3300229205080 | MEIS トレフィンバー φ 9.0/8.0mm   | 9.0/8.0          |
| 3300229205100 | MEIS トレフィンバー φ 11.0/10.0mm | 11.0/10.0        |
| 3300229205120 | MEIS トレフィンバー φ 13.0/12.0mm | 13.0/12.0        |


全サイズ一覧

| カタログ番号        | カタログ名                       | 刃部外径/<br>内径 (mm) |
|---------------|-----------------------------|------------------|
| 3300229205020 | MEIS トレフィンバー φ 3.0/2.0mm    | 3.0/2.0          |
| 3300229205025 | MEIS トレフィンバー φ 3.5/2.5mm    | 3.5/2.5          |
| 3300229205030 | MEIS トレフィンバー φ 4.0/3.0mm    | 4.0/3.0          |
| 3300229205035 | MEIS トレフィンバー φ 4.5/3.5mm    | 4.5/3.5          |
| 3300229205040 | MEIS トレフィンバー φ 5.0/4.0mm    | 5.0/4.0          |
| 3300229205045 | MEIS トレフィンバー φ 5.5/4.5mm    | 5.5/4.5          |
| 3300229205050 | MEIS トレフィンバー φ 6.0/5.0mm    | 6.0/5.0          |
| 3300229205055 | MEIS トレフィンバー φ 6.5/5.5mm    | 6.5/5.5          |
| 3300229205060 | MEIS トレフィンバー φ 7.0/6.0mm    | 7.0/6.0          |
| 3300229205065 | MEIS トレフィンバー φ 7.5/6.5mm    | 7.5/6.5          |
| 3300229205070 | MEIS トレフィンバー φ 8.0/7.0mm    | 8.0/7.0          |
| 3300229205075 | MEIS トレフィンバー φ 8.5/7.5mm    | 8.5/7.5          |
| 3300229205080 | MEIS トレフィンバー φ 9.0/8.0mm    | 9.0/8.0          |
| 3300229205090 | MEIS トレフィンバー φ 10.0/9.0mm   | 10.0/9.0         |
| 3300229205100 | MEIS トレフィンバー φ 11.0/10.0mm  | 11.0/10.0        |
| 3300229205110 | MEIS トレフィンバー φ 12.0/11.0mm  | 12.0/11.0        |
| 3300229205120 | MEIS トレフィンバー φ 13.0/12.0mm  | 13.0/12.0        |
| 330229L205030 | MEIS トレフィンバー-L φ 4.0/3.0mm  | 4.0/3.0          |
| 330229L205035 | MEIS トレフィンバー-L φ 4.5/3.5mm  | 4.5/3.5          |
| 330229L205040 | MEIS トレフィンバー-L φ 5.0/4.0mm  | 5.0/4.0          |
| 330229L205045 | MEIS トレフィンバー-L φ 5.5/4.5mm  | 5.5/4.5          |
| 330229L205050 | MEIS トレフィンバー-L φ 6.0/5.0mm  | 6.0/5.0          |
| 330229L205055 | MEIS トレフィンバー-L φ 6.5/5.5mm  | 6.5/5.5          |
| 330229L205060 | MEIS トレフィンバー-L φ 7.0/6.0mm  | 7.0/6.0          |
| 330229L205065 | MEIS トレフィンバー-L φ 7.5/6.5mm  | 7.5/6.5          |
| 330229L205070 | MEIS トレフィンバー-L φ 8.0/7.0mm  | 8.0/7.0          |
| 330229L205075 | MEIS トレフィンバー-L φ 8.5/7.5mm  | 8.5/7.5          |
| 330229L205080 | MEIS トレフィンバー-L φ 9.0/8.0mm  | 9.0/8.0          |
| 33229XL205030 | MEIS トレフィンバー-XL φ 4.0/3.0mm | 4.0/3.0          |
| 33229XL205035 | MEIS トレフィンバー-XL φ 4.5/3.5mm | 4.5/3.5          |
| 33229XL205040 | MEIS トレフィンバー-XL φ 5.0/4.0mm | 5.0/4.0          |
| 33229XL205045 | MEIS トレフィンバー-XL φ 5.5/4.5mm | 5.5/4.5          |
| 33229XL205050 | MEIS トレフィンバー-XL φ 6.0/5.0mm | 6.0/5.0          |
| 33229XL205060 | MEIS トレフィンバー-XL φ 7.0/6.0mm | 7.0/6.0          |
| 33229XL205070 | MEIS トレフィンバー-XL φ 8.0/7.0mm | 8.0/7.0          |
| 33229XL205080 | MEIS トレフィンバー-XL φ 9.0/8.0mm | 9.0/8.0          |
| 33T229L205040 | T-C トレフィンバー-CA φ 5.0/4.0mm  | 5.0/4.0          |
| 33T229L205050 | T-C トレフィンバー-CA φ 6.0/5.0mm  | 6.0/5.0          |
| 33T229L205060 | T-C トレフィンバー-CA φ 7.0/6.0mm  | 7.0/6.0          |
| 33T229L205070 | T-C トレフィンバー-CA φ 8.0/7.0mm  | 8.0/7.0          |
| 33T229L205080 | T-C トレフィンバー-CA φ 9.0/8.0mm  | 9.0/8.0          |
| 33T229L104040 | T-C トレフィンバー-HP φ 5.0/4.0mm  | 5.0/4.0          |
| 33T229L104050 | T-C トレフィンバー-HP φ 6.0/5.0mm  | 6.0/5.0          |
| 33T229L104060 | T-C トレフィンバー-HP φ 7.0/6.0mm  | 7.0/6.0          |


3300229205020, 3300229205025




3300229205030, 3300229205035, 3300229205040, 3300229205045,  
3300229205050, 3300229205055

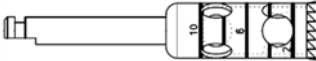


3300229205060, 3300229205065, 3300229205070, 3300229205075,  
3300229205080, 3300229205090, 3300229205100, 3300229205110,  
3300229205120

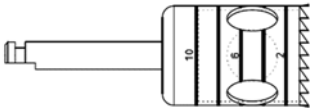

330229L205030, 330229L205035, 330229L205040, 330229L205045,  
330229L205050, 330229L205055

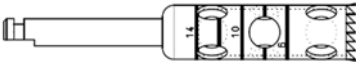


330229L205060, 330229L205065, 330229L205070, 330229L205075,

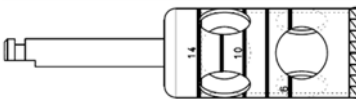


33229XL205030, 33229XL205035, 33229XL205040, 33229XL205045,  
33229XL205050, 33229XL205060, 33229XL205070, 33229XL205080




33T229L205040, 33T229L205050

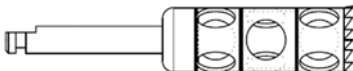

33T229L205060, 33T229L205070, 33T229L205080

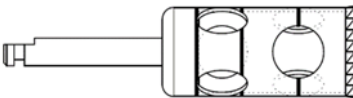

33T229L104040, 33T229L104050

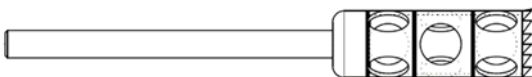

33T229L104060

3.組成  
ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は、骨の中心部を採取するために用いるクラウン(王冠型)ドリル又はホローミルとしての中空型穿孔器具であり、骨の中心部を採取するために用いる。

\*【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。  
推奨滅菌条件： 121℃ 20 分間  
134℃ 5 分間
2. 必要サイズのトレフィンを選択し、バーの中空部分で骨を採取する。
3. 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して保管する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1) 本品は使用前に芯ぶれなどに支障のないことを確認すること。使用に適さない場合には新品と交換すること。
- 2) 本品は使用の際、発熱、外科的損傷など組織への侵襲を最小限にするため、十分な生理食塩水の注水下で適正に使用すること。
- 3) 本品を使用中に切削力が低下したり、汚染したりした恐れのある場合には直ちに使用を中止し、新しいものと交換すること。

【使用上の注意】

1. 本品の使用前に、必ずサイズを確認すること。
2. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
3. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
4. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
5. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり、刃の損傷等の異常がないか点検をすること。
7. 強アルカリ／強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 インプラテックス  
ホームページ：<http://www.itx.co.jp>  
TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505

輸入先国：ドイツ

輸入先製造業者：ハガーアンドマイジンガー社  
(Hager & Meisinger GmbH)