

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科用インプラント手術器具 (70965001)
歯科用スチールバー (16669000)

マスターピンコントロール

【形状・構造及び原理等】

1.形状

79BMPC1 (Master-Pin-Control)




39203RF205006



39203RF205008



39BMP000011

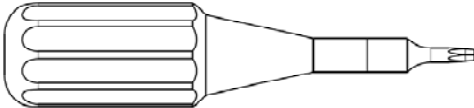

39BMP000012



39BMP000014



2.寸法

カタログ番号	カタログ名	ドリル 径(mm)	刃部長 (mm)
39203RF205006	MEIS 203RF ツイストドリル φ 0.6mm	0.6	7.0
39203RF205008	MEIS 203RF ツイストドリル φ 0.8mm	0.8	7.0

カタログ番号	カタログ名	六角二面幅 (mm)	全長 (mm)
39BMP000011	MEIS マスターピンヘキサゴ ンスクレュードライバー WS0.8	0.8	35

カタログ番号	カタログ名	全長(mm)
39BMP000012	MEIS マスターピンホルダー	170

カタログ番号	カタログ名	先端厚/幅 (mm)	全長 (mm)
39BMP000014	MEIS MP フィクシングホルダ ー 0.25	0.25/2.0 0.5/2.0	165

3.組成

ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

メンブレン等を固定するための歯科用ピンを挿入もしくは抜去するために用いる。

【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。

推奨滅菌条件: 121℃ 20 分間
134℃ 5 分間

2. ピンの挿入位置の骨が硬い等など、必要であればプレドリリングを行う。

最大回転数 ツイストドリル:2000rpm

3. マスターピンホルダーをピンのヘッドに上から垂直に押し付け、ピンをホルダーにロックする。
4. 顎骨にあてがったピン付きのホルダーを槌打し、ピンを挿入する。
5. ピンホルダーを横に倒しピンからロックを外す。
骨が柔らかい場合など骨からピンが浮きそうな場合は、フィクシングホルダーのコーティングされていない先端をピンホルダー先端のスリットに挿入し、ピンを抑えながらロックを外すことができる。
メンブレンには触れないようにすること。

ピンの除去。

フィクシングホルダーのブラックコーティングされている先端を用いて注意深くピンを緩め、鉗子等で抜去する。

ヘキサゴンスクリュードライバーを使用してマスターピンを反時計回りに回転させ、ヘッドを浮かすことができる(フラットヘッドは不可)。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1) バー及びドリル使用前に芯ぶれなどに支障のないことを確認すること。使用に適さない場合には新品と交換すること。
- 2) 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
- 3) 本品は使用の際、発熱、外科的損傷など組織への侵襲を最小限にするため、十分な生理食塩水の注水下で適正に使用すること。
- 4) 本品を使用中に切削力が低下したり、汚染したりした恐れのある場合には直ちに使用を中止し、新しいものと交換すること。
- 5) スクリュードライバーはマスターピンを保持できないので、キャリアとしては使わないこと。

【使用上の注意】

1. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
2. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。
3. ピンはオーガナイザーに固定されていないので、オーガナイザーを揺るとホルダー部から外れる場合があるので、オーガナイザーを開ける際やピンホルダーにピンをロックする際には注意すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く(最大2時間)血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないよう注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり、刃の損傷等の異常がないか点検すること。
7. 強アルカリ/強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社 インプラテックス
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>
TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505

輸入先国 :ドイツ

輸入先製造業者:ハガーアンドマイジンガー社
(Hager & Meisinger GmbH)