

機械器具 34 医療用刀
管理医療機器 単回使用メス(35130002)

再使用禁止

ボーンスクレイパー (ミクロス)

【禁忌・禁止】

再使用禁止。

*【形状・構造及び原理等】

本品の形状・構造は下記のとおりである。




【使用目的又は効果】


本品は、先端部に切刃をもつ骨切削、成形用の外科手術器具であり、この骨は通常、移植に使用される。

【使用方法等】


1. 使用直前に開封する。開封は汚染に注意し、滅菌されている場所に取り出す。
2. 使用中に機能良い動きを確保するために下図のように装置表面のマークを術者に向くようにして把持する。

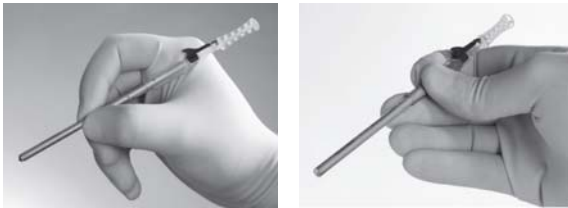


3. 骨の採取は装置の先端を骨面に押し付けると同時に装置を後ろに引くことによって行われる。装置の角度や押さえつける力を変えることによって希望する硬さの薄膜や骨の薄片を得ることが出来る。本品は 0.25ml までの骨片を収容することが可能。

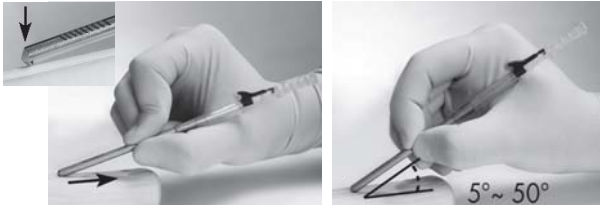

4. 採取した骨を取り出すには滅菌したシャーレ上に本体を置き、レバーを解除する。その後ハンドルをいっぱいまで押し込む。滅菌した器具を使用し、本体タンク部から下図のように採取骨を取り出す。

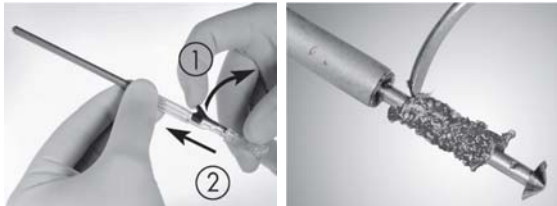

更に骨を採取したい場合は、下図のように①ハンドルを元の位置に戻し、②レバーにてロックする。

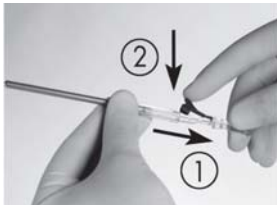

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1) 使用直前に開封すること。
- 2) 操作は無菌的に行うこと。
- 3) 上手く切削できない場合はブレードと骨面の角度及び、骨面への押えつける圧を調節すること。もし、どうしても良い結果が得られない場合は本体タンクを開け、採取骨を取り出し、再度骨採取を試みる。それでもダメな場合は、手術を中断し、新品に交換すること。
- 4) タンク内に採取される骨量は 0.25ml で、もしそれ以上採取が必要な場合はタンク内の採取骨を滅菌済みシャーレやトレーに移して再度同様にして骨を採取すること。

【使用上の注意】

1. 先端のブレードの取扱いには十分注意すること。
2. 本品の使用にあたっては、外科的手技及び、解剖学的状況を充分把握した上で使用すること。

**【保管方法及び有効期間等】

滅菌製品の有効期間は製造年月より 3 年間である。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社 インプラテックス
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>
TEL: 03-5850-8555 FAX: 03-5850-8505
輸入先国 : イタリア
輸入先製造業者: メタ社
(C.G.M. S.p.A. Divisione Medica META)