

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 医療用スポンジ 13695000

PVA 鼻腔パッキング

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止。
- ・再滅菌禁止。
- ・本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

ホルダーの先端に吸水スポンジが取り付けられたものである。

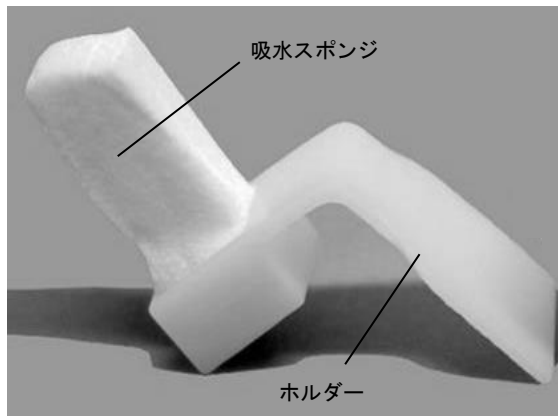

2. 原材料

吸水スポンジ：PVA（ポリビニルアルコール）
ホルダー：ABS 樹脂

3. 原理

本品は鼻腔内で使用される。鼻出血又は手術後に血液、体液を吸収し、タンポナーデ効果により止血する。

【使用目的又は効果】

本品は、鼻出血又は手術後に血液及び滲出液を吸収除去するために用いる吸水スポンジである。

【使用方法等】

- (1) 本品のスポンジ部を鼻腔内に挿入する。必要に応じて本品を生理食塩水で湿らせる。
- (2) 抜去する際はホルダー部を持ってゆっくり抜去する。抜去時にスポンジが乾燥している場合は、生理食塩水で湿らせてから抜去すること。
- (3) 30 分以上鼻腔内に挿入しないこと。30 分を経過しても出血が止まらない場合は、医師に相談すること。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・使用前に包装に異常が認められる場合は使用しないこと。
- ・本品を使用するために包装から取り出す際は、使用直前に開封し、以後の使用は無菌的操作により行うこと。
- ・使用前に包装に記載されている使用期限を確認し、使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- ・使用前に埃、異物などが付着していないことを確認すること。
- ・使用後は感染防止に留意し、医療廃棄物として適切な方法で廃棄すること。

＜不具合・有害事象＞

1. その他の不具合

- ・破損
- ・設置位置からの脱落

2. その他の有害事象

- ・手術に起因する感染、発熱、嘔吐、下痢、めまい、失神又は発疹の可能性
- ・本品の留置に伴う不快感
- ・出血

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて清潔な場所に保管すること。

2. 有効期間

3 年（表示ラベルに記載）
〔自己認証（当社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

アズワン株式会社

TEL：0120-711-875

受付時間：平日 9：00～17：30（土日祝・弊社休業日は除く）

製造業者 Genefom Corporation

セネフォーム社

製造国名 台湾