

機械器具 30 結紮器及び縫合器
管理医療機器 単回使用ステープルリムーバ 16787002

ステープルリムーバー


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止、再滅菌禁止
- ＜適用対象（患者）＞
- ・本品の成分に対する感作又はアレルギー反応を示す可能性のある患者への適用禁止 [ニッケル・クロムを含むため]。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び構造

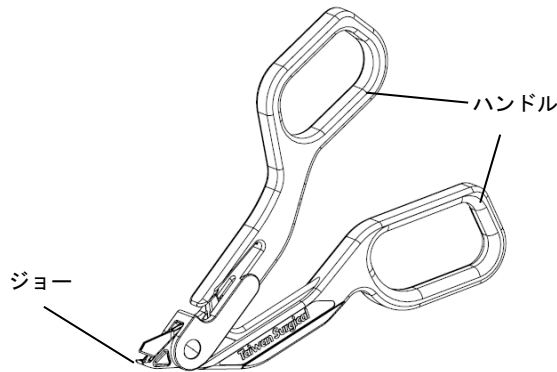

2. 原材料

ハンドル：ポリカーボネート
ジョー：ステンレス（SUS304、ニッケル・クロム含有）

3. 原理

本品のジョーをスキンステープルの下に滑り込ませ、ハンドルが完全に閉じるまで握ると、ジョー部が閉じることでスキンステープルが変形し開く。本品を上方に引き上げると、スキンステープルが抜去される。

【使用目的又は効果】

手術に使用するステープルを抜去するために用いること。

【使用方法等】

- 1) 本品を滅菌包装から無菌的に取り出す。
- 2) ステープルリムーバーのジョーを、ステープルと皮膚の間に平行に差し込む。



- 3) ハンドルを完全に閉じるまで握り、ステープルを変形させる。
- 4) 変形したステープルを皮膚から持ち上げ、除去する。
- 5) 本品は単回使用のため、使用後は廃棄する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・ハンドルを完全に握りこむまでステープルを引き上げないこと。
- ・包装容器を開封後は、無菌状態を維持できないので、取り扱いに注意すること。
- ・使用前に包装が破損または汚損等している場合には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れ、高温多湿、火気や直射日光を避け、清潔な場所で保管すること。
2. 有効期間
個包装及び外箱に記載 [自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

アズワン株式会社

TEL：0120-711-875

受付時間：平日 9：00～17：30（土日祝・弊社休業日は除く）

製造業者 Taiwan Surgical Corporation

タイワンサージカル社

製造国名 台湾