

機械器具 34 医療用刀
管理医療機器 単回使用メス用刀 37445000

再使用禁止

Razormed 替刃メス

【禁忌・禁止】

<適用対象（患者）>

- ・本品に感作またはアレルギー反応を示す患者には使用しないこと。

<併用医療機器>

- ・ISO7740:1985 に適合するハンドル以外への取り付け禁止。[「相互作用」の項参照]


<使用方法>

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止
- ・電気メスを用いた接触凝固は行わないこと。[術者の感電・熱傷及び器具表面の損傷のおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び構造

本品は、ブレードのみからなる単回使用メス用刀である。
(代表的な形状)

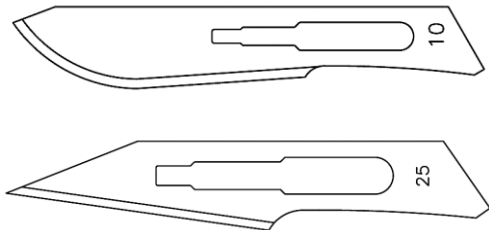

2. 原材料

ステンレス鋼

3. 原理

本品は、外科器具（メス）の構成部品であり、メスの把柄に取り付けて使用する。下方に押し付けるように動かして細胞を切り通すことができる。

【使用目的又は効果】

外科的手術、切離並びに検査・研究用試料及び物体の切断に使用すること。

【使用方法等】

本品を包装から無菌的に取り出し、ISO 7740:1985 に適合するハンドル（一般的名称：ナイフハンドル）に装着して使用する。使用後は医療廃棄物として適切に廃棄する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・使用前に、汚れ・破損・変形・摩耗等がないことを確認すること。
- ・本製品を取り扱う際、刃先に触れてけがをしないように、取り扱いには注意すること。[刃先は鋭利であり触れるとけがをするおそれがあるため。]
- ・ブレードがハンドルに確実に装着され、ぐらつき等がないことを確認してから使用すること。
- ・軟骨や骨等の硬組織には使用しないこと。[刃先が破損するおそれがある。]
- ・使用時に必要以上の力を加えたり、ブレードを曲げた状態で使用したりしないこと。[破損等の原因になるおそれがある。]
- ・本品は滅菌品のため使用直前に無菌的に開封し、開封後は直ちに使用すること。
- ・使用前に包装が破損または汚損等している場合には使用しないこと。
- ・使用後は感染防止に留意し、医療用廃棄物として適切な処理をすること。

<相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）>

1. 併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ISO7740:1985 に適合しないハンドル	不具合の危険性が高まる恐れがある。	本品との併用に関する安全性が確認されていない。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・水濡れ、高温多湿、火気や直射日光を避け、清潔な場所で保管すること。
- ・包装材に傷をつけたり、ピンホールを生じさせたりしないように保管すること。

2. 有効期間

製造日より 5 年（個包装及び外箱に記載）

[自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

アズワン株式会社

TEL：0120-711-875

受付時間：平日午前 9：00～12：00、午後 1：00～5：30

（土日祝・弊社休業日は除く）

製造業者 Jai Surgicals Limited

ジャイサージカルズ社

製造国名 インド