

Hライン 酸素マスク

再使用禁止

HSF0073


【禁忌・禁止】

- 使用方法
・再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

1. 形状

(1) 酸素マスク

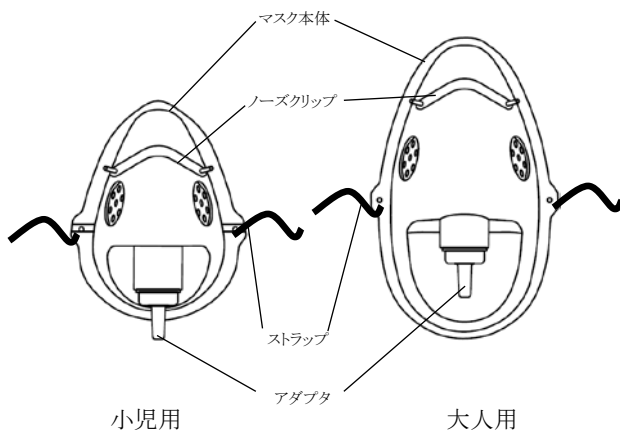

(2) 酸素チューブ

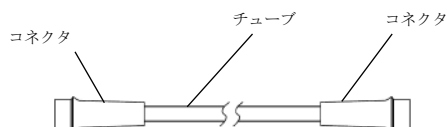

2. 材料

本品のマスク本体及び酸素チューブは軟質ポリ塩化ビニル製である。

3. 種類

サイズ
小児用
大人用

4. 原理

マスク本体の周縁部を患者の顔にあてることにより、機器から供給された空気・酸素ガスを患者の気道に供給するための通路として機能する。

【使用目的又は効果】

本品は、患者の気道に空気・酸素ガスを供給するために鼻と口に設置するマスクである。

【使用方法等】

- 酸素チューブの片方のコネクタを酸素マスクのアダプタに接続する。
- 酸素チューブのもう一方のコネクタを酸素供給ラインに接続する。
- 適切な酸素流量となるようにフローメータを設定する。
注：一般的に推奨する流量は5～10L/分である。吸入酸素濃度は、流量及びマスクの装着状態や患者の換気量などにより変化する。
注：酸素が流れていることを確認すること。
- しっかり接続されていることを確認する。
- ストラップを耳の下から首の周りに掛ける。
- ストラップの両端をそっと引張り、マスクを患者の顔に固定する。
- 顔にフィットするようノーズクリップで調節する。

* 【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・本品については、試験によるMR安全性評価を実施していない。
- ・本品のノーズクリップはアルミニウムを使用している。MRI検査における使用には注意すること。[アルミニウムが発熱するおそれがある。]

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて室温で保存すること。

<有効期間>

包装の使用期限欄を参照[自己認証による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

■製造販売業者

株式会社インターメドジャパン
大阪市中央区道修町1-6-7 TEL:06-6222-1951

■外国製造所

シーナ社 (Hsiner Co., Ltd.) 台湾

—製造販売元—

 株式会社 インターメド ジャパン