

Hライン エアゾールマスク

再使用禁止

HSF0083

【禁忌・禁止】

- 使用方法
・再使用禁止

＜有効期間＞
包装の使用期限欄を参照[自己認証による]


【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

■製造販売業者
株式会社インターメドジャパン
大阪市中央区道修町1-6-7 TEL:06-6222-1951

■外国製造所
シーナ社 (Hsiner Co., Ltd.) 台湾

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

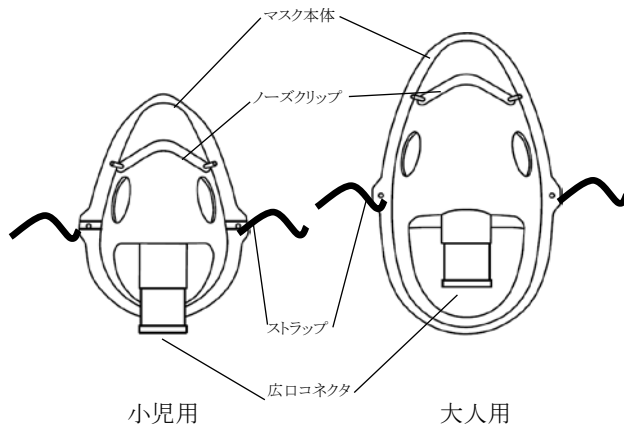

2. 材料

本品のマスク本体は軟質ポリ塩化ビニル製である。

3. 種類

サイズ
小児用
大人用

4. 原理

マスク本体の周縁部を患者の顔にあてることにより、水粒子を含む空気・酸素ガスを患者の気道に供給するための通路として機能する。

【使用目的又は効果】

本品は、患者の気道にエアロゾル粒子を含有する空気・酸素ガスを供給するために鼻と口に設置するマスクである。

【使用方法等】

1. 内径22mmの広径チューブ(別売)を介して、ネプライザシステムに広口コネクタを接続する。
2. 適切な酸素流量となるようにフローメータを設定する。
3. しっかり接続されていることを確認する。
4. ストラップを耳の下から首の周りに掛ける。
5. ストラップの両端をそっと引張り、マスクを患者の顔に固定する。
6. マスクが顔にフィットするようノーズクリップで調節する。

* 【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・本品については、試験によるMR安全性評価を実施していない。
- ・本品のノーズクリップはアルミニウムを使用している。MRI検査における使用には注意すること。[アルミニウムが発熱するおそれがある。]

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて室温で保存すること。

－製造販売元－

 株式会社 インターメド ジャパン