

機械器具06 呼吸補助器
一般医療機器 人工呼吸器用マスク コード 70564000
Hライン フェイスマスク シングルユース

再使用禁止

HSF0210

【警告】**＜使用方法＞**

- ・使用前に接続に誤りがないか、使用前および使用中に各接続部が気密かつ確実に漏れや閉塞がないか、また、酸素の吹き出しを確認すること。[適切な呼吸管理が行えないおそれがある。]
- ・使用中は患者の状態を定期的に確認すること。[患者の異常を発見できないおそれがある。]

【禁忌・禁止】**＜使用方法＞**

- ・再使用禁止。一患者限りの使用とすること。
- ・火気のある場所および発火のおそれのあるものの近くでは本品を使用しないこと。[爆発や火災の原因となるため]

- ・マスクに患者の分泌物などが付着した場合、湿った布で拭拭すること。


【使用上の注意】**＜重要な基本的注意＞**

- ・本品の滅菌および消毒は行わないこと。[本品に変形および破損の発生、有毒ガスが残留するおそれがある。]
- ・本品の死腔が与える影響を使用する患者毎に専門医が評価した上で使用すること。
- ・呼吸の状態、血液ガス検査、また SpO_2 の評価など、本品の使用中は適切なモニタリングを実施すること。
- ・本品をねじったりするなど接続部に過度な負荷をかけないように注意すること。[回路が接続部から外れるおそれがある。]
- ・使用中に発疹などが生じた場合には、直ちに使用を中止し、医師の指示に従うこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状


フェイスマスク

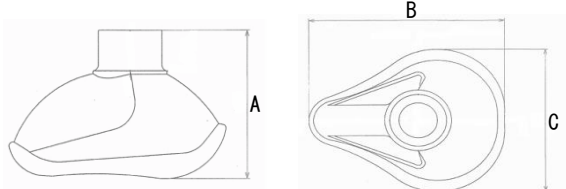

種類と寸法

種類	サイズ (A×B×C)	接続口径
サイズ3	71mm×102mm×82mm	内径 22mm
サイズ4	77mm×114mm×94mm	
サイズ5	86mm×126mm×104mm	

フックリング

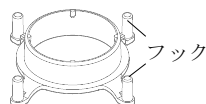

ヘッドストラップ



2. 材料

本品のマスク本体は軟質ポリ塩化ビニル製である。(可塑剤にフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを不使用)

3. 原理

呼吸回路に接続し、患者の鼻と口をおおうように顔面に密着させることにより、蘇生装置や人工呼吸器からのガスを供給する。

【使用目的又は効果】

本品は、人工呼吸器(手動式を含む)、蘇生装置等の呼吸回路に接続し、患者の鼻、口をおおい患者にガスを供給するためのマスクである。

【使用方法等】

1. 適切なサイズのマスクを選択する。
2. 人工呼吸器、蘇生装置等の呼吸回路と接続する。
3. 患者の口と鼻を覆うようにマスクを顔面にあてる。
4. 必要に応じて、フック先端を上向きにしたフックリングをマスクの機器側端に取り付け、そのフックにストラップをかけてマスクを固定する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- ・ヘッドストラップはきつく締めすぎないこと。

【保管方法及び有効期間等】**＜保管の条件＞**

- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて室温で保管すること。

＜有効期間＞

- ・包装の使用期限欄を参照。[自己認証による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

■製造販売業者

株式会社インターメドジャパン
大阪市中央区道修町1-6-7 TEL:06-6222-1951

■外国製造業者

シーナ社 (Hsiner Co., Ltd.) 台湾

—製造販売元—



株式会社 インターメド ジャパン