

機械器具（52）医療用拡張器
一般医療機器 鼻腔拡張器具（JMDNコード：11260000）

いびきヘルパー

【警告】


- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。[誤った使用方法による窒息や破損による破片誤飲の恐れがあるため。]
- 本品の改造は絶対にしないでください。[形態を変えたり、柔らかくするために無理な力や熱を加えると機能が損なわれるだけでなく破損や鼻腔内を傷つける原因になるため。]

【禁忌・禁止】

- 12歳未満のお子様には使用できません。[誤った使用方法による窒息や破損による破片誤飲の恐れがあるため。]
- 個人の使用に限ります。家族を含めた他者と共有して使用しないでください。[感染防止のため。]
- 消毒薬や研磨剤は使用しないでください。[表面が傷つき、雑菌が繁殖しやすくなるため。]
- 本品に損傷、変形、汚染などがあるものは使用しないでください。[鼻腔内を傷つける原因になるため。]
- 本品を他の用途で使用しないでください。[誤った使用方法による窒息や破損による破片誤飲の恐れがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

1. 寸法

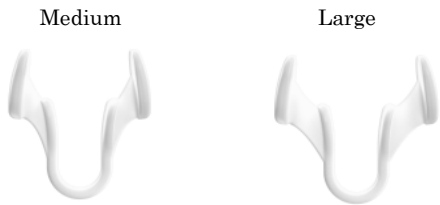

	Medium	Large
寸法	高さ 23.8mm× 幅 25.0mm	高さ 23.8mm× 幅 30.0mm

2. 原材料

熱可塑性エラストマー

3. 原理

左右の鼻腔に装着することで鼻腔の狭い部分を物理的に拡張し、鼻からの気流を増加させる。

【使用目的又は効果】

本品は、鼻の構造、鼻腔の拡張用に使用する。

【使用方法等】

- 使用前に本品と手が清潔であることを確認する。
 - 本品の中央部を持ち、ゆっくり鼻腔に挿入する。初回は鼻腔と本体の位置を鏡等で確認しながら挿入すると良い。
 - 中央部（コネクティングブリッジ）を鼻中隔に合わせる。装着に慣れるまで約2週間が目安となる。
 - 使用後は本品をゆっくりと鼻腔から取り出す。
 - 使用後は清潔な流水等で洗い、自然乾燥後、清潔に保管する。
- ※感染防止のため個人使用に限る。

【使用上の注意】

- 12歳未満のお子様には使用できません。
- 個人の使用に限ります。感染防止のため家族を含めた他者と共有して使用しないでください。
- 本品に損傷、変形、汚染などがあるものは使用しないでください。
- 本品を他の用途で使用しないでください。
- 痛みを感じた場合、無理な挿入はお止めください。
- 鼻腔への挿入が困難な場合は、耳鼻咽喉科医へご相談ください。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- 高温多湿を避け、直射日光の当たらない清潔な場所で保管してください。不適切な保管により変色や臭いの発生、劣化を引き起こす可能性があります。
- 消毒液や研磨剤等の薬液に晒されないよう保管してください。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄は自治体の指示に従ってください。
- 衛生面および装着感の観点から3か月を目安に交換をおすすめします。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

ディーマー・メディカル・ジャパン株式会社
電話番号：03-5614-2759

＜外国製造業者＞

Airmax B.V.（オランダ）