

機械器具 58 整形用機械器具
管理医療機器 歯科矯正用レジン材料 (JMDNコード：70730000)
エンジェルアライナー デンタルフィルム

再使用禁止

【禁忌・禁止】


- ・再使用禁止
- ・本材にアレルギーのある患者には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

製品は非腐食性ガスを避け、涼しく乾燥した清潔な環境で保管すること。

【形状・構造及び原理等】

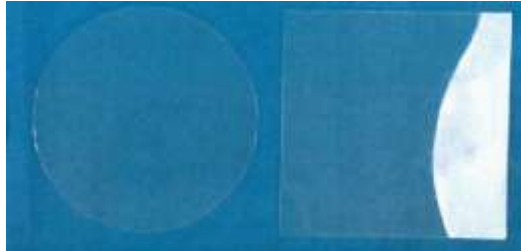

ラウンド形

スクエア形

型番	寸法	厚さ
Circle-1.00	直径 120mm 直径 125mm	1.00mm
Circle-0.76		0.76mm
Circle-0.70		0.70mm
Circle-0.63		0.63mm
Circle-0.40		0.40mm
Square-1.00	120mm×120mm 125mm×125mm	1.00mm
Square-0.76		0.76mm
Square-0.70		0.70mm
Square-0.63		0.63mm
Square-0.40		0.40mm

主成分

masterControl ポリウレタン

masterControl S コポリエステル-ポリウレタン複合材

原理

原材料の熱可塑性を利用して加圧成形を行い、歯列矯正用装置等を作製する。

【使用目的又は効果】

歯列矯正用の装置(歯列矯正器具、歯列矯正リテーナー)を作製するために用いること。

【使用方法等】

1. 使用する成型器に適応する寸法の本品を選択する。
2. 成型器の使用法・操作方法に従って本品を加熱する。
3. 加熱後、歯科模型でプレスする。
4. 冷却後、模型から成型品を取り外す
5. 余剰部分をトリミングし、研磨剤で磨く。

【使用上の注意】

1.重要な基本的事項

- 1) 本品の使用目的外で使用しないこと。
- 2) 加熱成形プロセスのパラメータは成型器毎に異なるため、成型器のパラメータに基づいて設定することを推奨する。
- 3) 本品の包装を開封したらすぐに使用することを推奨する。
- 4) 本品をヒーターの近くで使用する場合は、ヒーターから離して設置すること。
- 5) 本品の使用中にコポリエステル-ポリウレタン材料に対するアレルギーや発疹が生じた場合は、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けること。
- 6) 本品はきれいな水で洗浄することを推奨する。