

* 機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用練成充填形成器（41861000）

チップは再使用禁止


オプトラスカルプト

【禁忌・禁止】

本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往症のある患者には使用しないこと。
チップは再使用しないこと[感染防止のため]

【形状・構造及び原理等】

本品は、ハンドル部分と6種類の形状のチップで構成される。

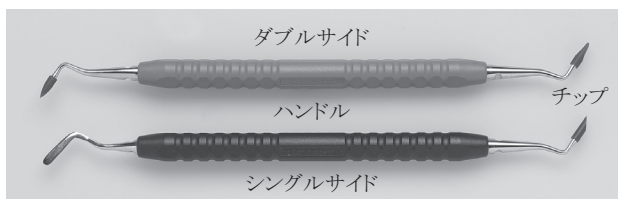

チップ形状



- (1) スパチュラ (Spatula)
- (2) スフィア (Sphere)
- (3) シリンダーアングル (Cylinder Angular)
- (4) シリンダー (Cylinder)
- (5) ピラミッド (Pyramid)
- (6) ポイント (Point)

【原理】

修復物の形状に合ったチップをハンドルに装着し、コンポジットレジン等の形状を整える。

【使用目的又は効果】

掻き取り又は削り取りにより、練成充填材料の表面の輪郭研削を行う。

【使用方法等】

1. 口腔内で使用する場合には、使用前にハンドル部分を134℃オートクレーブで少なくとも4分間オートクレーブで滅菌する。
2. 充填物の形状に合ったチップをハンドルに装着する。
3. 患者の口腔内で使用する場合はアタッチメント等を誤飲しないように、患者にオプトラダム（別売、一般医療器、歯科用ラバーダム、届出番号13B1X10049IV0011）を装着する。
4. 使用するレジン材料の取扱説明に従い前処理を行い、本品を使用して充填、表面性状を整える。
5. 使用材料の説明書に従い重合し硬化する。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- ・ハンドルは、凸凹の形成や応力腐食によるクラックを防止するため、塩化ナトリウム溶液の暴露を避けること。
- ・ハンドルは、オートクレーブ滅菌前に大きな残渣を除去し、その後ソフトブラシ等を使用し流水下で洗浄を行い、エアや柔らかい布で乾燥すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売元】

Ivoclar Vivadent株式会社
電話 03-6801-1301 Fax 03-5844-3657
www.ivoclarvivadent.jp
[製造元]
Ivoclar Vivadent AG（リヒテンシュタイン侯国）