

** 機械器具 67 歯科用防湿器
一般医療機器 歯科用ラバーダム (11155010)

オプトラダム

再使用禁止

* 【禁忌・禁止】

- ・ラテックスおよび本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往症のある患者には使用しないこと。
- ・本品を、外科手術時又はインプラント埋入手術時に使用しないこと。
- ・再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は、2種類のサイズ(レギュラー〈大〉、スモール〈小〉)で構成される使い捨てのラバーダムである。

【原材料】

- ・リング: ポリプロピレン
- ・ソフト部: 熱可塑性樹脂

【使用目的又は効果】


歯科治療中に口腔内で手術野を隔離するため、パンチで穴をあけ、歯牙に被せるゴム製シート。

【使用方法等】

1. 患者の口唇に応じた適切なサイズを選択する。
サイズはシートの中央に下記の記号で表示されている。

品 目	記 号
レギュラー〈大サイズ〉	R
スモール〈小サイズ〉	S

2. 本品に歯の位置が印刷してあるので、ラバーダムパンチで治療する歯の位置に穴を開ける。
3. 2つのリングの間を指でゆっくりと広げ、片方の手で、上下の白いリングを開口部から引き出し、上下に押し持つ。

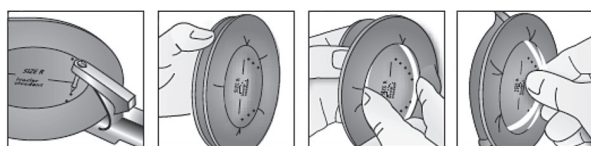

4. ラバーダムシートが貼ってある部分を患者側に向け、左右どちらか一端を、頬と歯牙の間に挿入する。
5. 4の操作で本品を片頬の所定の位置に装着したら直ちに、もう片方を4の操作と同様に軽く曲げながら口腔内へ装着する。



6. 上下の頬と歯牙の間に、インナーリングを挿入し、指で挿入位置を直す。



7. 治療する歯をラバーダムに開けた穴を広げて露出させ、デンタルフロス等を使って歯間に押し込む。
8. 装着後、本品を取り出すときは、ピンセットで口腔内の本品を引っ張り、はさみ等で歯の部分の穴を切り離す。リングを一方の口角から慎重に取り外す。復元力により本品全体が口腔内から自然に口外へ出る。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

1. 本品の使用時、軟組織(歯肉・粘膜)への接触により口腔内に損傷を与えることがあるため、注意を払って器具を十分にコントロールし、人体に影響を与えないよう十分に注意すること。
2. 本品使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、直ちに医師の診断を受けさせること。
3. 本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症のある術者は、手袋を用いて、直接本品に触れないようにすること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売元】

Ivoclar Vivadent株式会社
電話 03-6801-1301 Fax 03-5844-3657
www.ivoclarvivadent.jp

【製造元】

Ivoclar Vivadent AG (リヒテンシュタイン侯国)