

\* 機械器具 65 歯科用充填器  
一般医療機器 歯科用練成充填形成器（41861000）

パッドは再使用禁止

## オプトラスカルプト パッド


### 【禁忌・禁止】

本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往症のある患者には使用しないこと。  
パッドは再使用しないこと。[感染防止のため]

### 【形状・構造及び原理等】

本品はインスツルメント部分と使い捨てのパッドで構成される。

インスツルメント(Instrument)

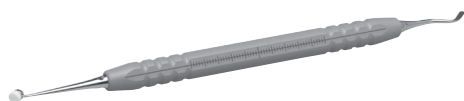

パッド(Pad)：直径4mmと6mmの2種類がある。



### 【原理】

修復物の形状に合ったパッドをインスツルメントに装着し、コンポジットレジン等の形状を整える。

### 【原材料】




- ・インスツルメント：スチール
- ・インスツルメントカバー：ポリエチルエステル ケトン
- ・パッド：エチレンビニルアセテート

### 【使用目的又は効果】

練成充填材料の表面の輪郭研削

### 【使用方法等】

1. 口腔内で使用する場合には、使用前にインスツルメントは、134℃で少なくとも4分間オートクレーブで滅菌する。
2. 充填物の大きさに合ったパッドを選択し、インスツルメントのリングに挿入して装着する。
3. 充填材の説明書に従い、歯面処理等を行い、本品を使用し充填、表面性状を整える。
4. 上顎前歯部の切縁部を含む数歯にわたる充填の場合、必要に応じてリファレンススケールを使用し、歯牙の幅径や歯牙傾斜角の決定を行う。

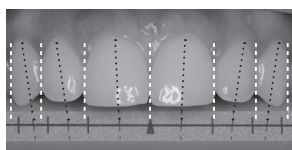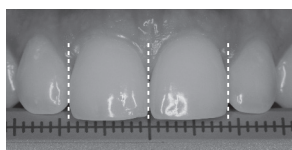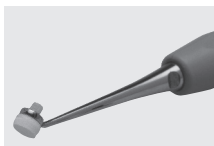

5. 充填材の説明書に従い光照射を行い、仕上げる。

### 【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- ・インスツルメントは、凸凹の形成や応力腐食によるクラックを防止するため、塩化ナトリウム溶液の暴露を避けること。
- ・インスツルメントは、オートクレーブ滅菌前に大きな残渣を除去し、その後ソフトブラシ等を使用し流水下で洗浄を行い、エアや柔らかい布で乾燥すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売元]

Ivoclar Vivadent株式会社

電話 03-6801-1301 Fax 03-5844-3657

www.ivoclarvivadent.jp

[製造元]

Ivoclar Vivadent AG（リヒテンシュタイン侯国）