

* 機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科用顔弓 (35700000)

ユニバーサル トランスファーボウ


【形状・構造及び原理等】



サムスクリュー付3D
レジストレーションジョイント



バイトフォーク

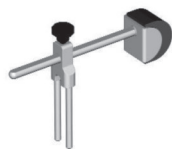


ノーズピース



ノーズパッド



セットスクリュー付
トランスファーボウ

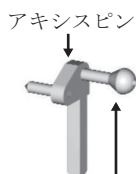

アキシピン



イヤープース



リファレンス
インディケーター

【使用目的又は効果】

側頭下顎関節又は顎の開口運動軸に対する上顎弓の相対位置を記録するほか、口腔模型を顎の開口運動軸と同じ関係に合わせるために用いるカリパス様歯科用器具。

【使用方法等】

- 1.取扱説明書に従って、本品を組み立てる。
- 2.バイトフォークに暖めたワックス又はシリコンをセットする。
- 3.バイトフォークを患者の口腔内に合わせて装着する。
- 4.位置を決定した後、レジストレーションジョイントを固定する。
- 5.患者からバイトフォークごと本品を取り外す。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1.患者が怪我をする危険があるので、トランスファーボウを患者に装着する際にアキシピンを使用しないこと。
- 2.イヤープースを装着する際に圧力をかけすぎると耳道を傷つける危険があるので注意すること。
- 3.リファレンスインディケーターを操作する際は、患者の目を突かないように注意すること。
- 4.トランスファーボウを動かす時は、関連インディケーター

ターをしっかりと固定し、眼などを傷つけないように十分注意すること。

- 5.本品は、多くの部品から成り立っているため、患者へ装着する時は、眼や皮膚、耳、口腔内などを傷つけないように取り扱いに十分注意すること。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- ・本品は精密機器のため、乱暴に扱ったり、衝撃を与えないように注意すること。精度に悪影響を与える恐れがあります。
- ・細かな部品が多くあるので、紛失しないようにケース等に入れて整理して保管すること。

【保守・点検に係る事項】

メンテナンスと清掃方法については取扱説明書をよく読むこと。

- ・表面の損傷を防止するために、強酸や溶剤（MMA等）がかからないように気をつけること。

クリーニング内容	方法	頻度
ワックスや石膏で汚れたネジ	温水で洗い、乾いた布で拭く	必要時
シリコンで汚れたネジ	布で拭く	必要時
バイトフォークに唾液や血液が付着した場合	消毒剤で拭く	使用後毎回
3D レジストレーションジョイント	消毒剤をスプレーする	使用後毎回
UTS 3D トランスファーボウ	消毒剤をスプレーする	使用後毎回
ノーズパッド	新しいものを使用する	使用後毎回
イヤープース	オートクレーブ装置を使用	使用後毎回

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売元〕

Ivoclar Vivadent株式会社

電話 03-6801-1301 FAX 03-5844-3657

www.ivoclarvivadent.jp

〔製造元〕

Ivoclar Vivadent GmbH（オーストリア）