

COMFORT IN ノズル


【禁忌・禁止】

- ・ 本器を下記目的以外の用途に使用しないこと。
- ・ ノズルは、使い捨ての滅菌包装製品です。再使用は禁止。

【形状・構造及び原理等】

構造・構成ユニット

1.構造図

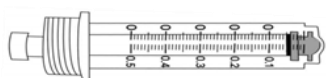

2.原材料

シリンダー：ポリカーボネート

ガスケット：シリコンゴム

3.〈原理〉

本器の微細な穴からワクチン又は薬剤等を高圧で噴射し、皮膚表面より直接皮下にワクチン又は薬剤等を注射するための注射筒（アンプル）である。

ワクチン又は薬剤等を充填し、注射器具に装着して、安全ロックを解除し、注射方向に90°の角度でしっかりと注射部位に合わせます。注射器具の注入ボタンを押すと、圧縮されたバネが伸びて、プランジャーが押し出されて、ワクチン又は薬剤等が瞬間的に体内に注入される。

【使用目的又は効果】

本器は、注射用器具に装着して機能するアンプルで有り、ワクチン又は薬剤等の注射に用いる器具である。ガンマ線滅菌がされている。




【使用方法等に関連する注意】

- ①ノズルは、使い捨ての滅菌包装製品です。開封する前に必ず包装をご確認ください。包装材に損傷がある場合は再滅菌が必要の為、使用しないでください。
- ②故障/損傷の警告: 薬液が注入されたノズルを取り付けた後に操作する必要があります。ノズルなしで操作すると故障の原因となります。この操作による製品破損は販売元と製造元は責任を負いかねます。

【使用方法等】

- ①滅菌したノズルを梱包から取り出します。


- ②ノズルのプランジャーを図のように一度最後まで押し込んだ後、0.5cc部まで引き戻して、再び最後まで押し込みま

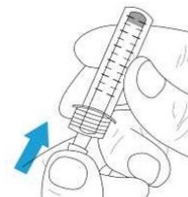

- ③ノズルをアダプター部に設置して時計回りに回して、固定します。



- ④ノズルのプランジャーを0.5ccの目盛りまで図のようにゆっくりと引き、その後、投与する薬剤量に合わせます。ノズルに気泡がある場合は、ノズルを指先で軽くたたいて気泡を取り除きま

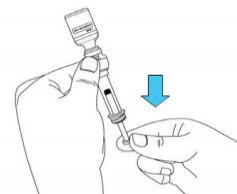


- ⑤ノズルが薬剤で満たされたらノズルを反時計回りに緩めてアダプターから分離し、アダプターは、再びキャップをして薬剤の保管方法に合わせて保管します。

- ⑥ノズルの容量に合わせてインジェクターの目盛りがセットされている事を再度確認してください。



- ⑦薬が充填されたノズルを時計回りに回してインジェクターのヘッドにしっかりと固定します。この時インジェクターのヘッドが動かないようにもう片方の手で固定します。

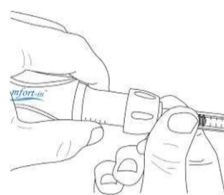

取扱説明書を必ずご参照下さい。

〈使用上の注意〉

注意事項

- ①本器を使用前に取扱説明書を熟読すること。
- ②本器を開封する前に必ず包装をご確認ください。包装材に損傷がある場合は再滅菌が必要の為、使用しないでください。
- ③本器はワクチン又は薬剤注射に使用すること。
- ④各ワクチン又は薬剤の適用及び安全性に関しては、医薬品製造販売業者に確認すること。
- ⑤アルコール綿による注射部位の消毒を行った際には、必ず乾燥させること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

直射日光及び高温多湿を避け、水漏れに注意して保管すること。

有効期限

使用期限は梱包材に記載（自己認証による）。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 INBYTE

〒106-0041 東京都港区麻布台二丁目4番2号 保科ビル4F

お問い合わせ先：TEL 03-6807-4126

製造元：Mika Medical Co. （韓国）

取扱説明書を必ずご参照下さい。