

DE 睡眠評価用カニューラ

再使用禁止

【禁忌・禁止】


- ・再使用禁止
- ・使用中に皮膚や鼻孔に発疹や刺激を感じた場合は、直ちに使用を中止すること。
- ・本品は一人の患者のみに使用すること。再使用・再処理・滅菌は行わず、必ず患者ごとに新しい製品を使用すること。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

(1) DE 睡眠評価用カニューラ

2. 形状及び構造

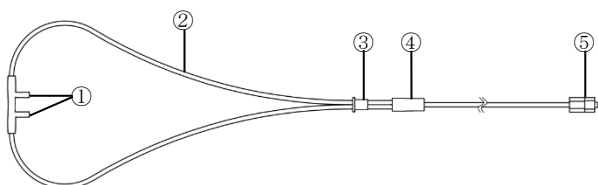

番 号	名 称
①	ブロング
②	チューブ
③	スライダ
④	接合部
⑤	コネクタ（ルアーロック）

原材料：ポリ塩化ビニル（可塑剤：非フタル酸系）

3. 作動原理

鼻腔に装着したブロングから、患者の吸気と呼気の圧力変化を、チューブを介して接続した睡眠評価装置へ送り測定する。

【使用目的又は効果】

睡眠評価装置に接続して患者の生体物理現象を測定するセンサで、鼻の気流を測定する。

【使用方法等】

1. カニューラの先端（鼻腔に入る部分）を鼻に正しく当てて装着する。
2. カニューラのチューブを両耳に回しかけ、頬から顎の方向へ自然に流れるように配置する。
3. スライダを移動させ、チューブが耳から外れないように長さを調整して固定する。その際、鼻や耳に過度な圧力がかからないように注意する。
4. 必要に応じて、サージカルテープで頬などに軽く留めて安定させる。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・開封時にチューブに折れ・ねじれ・潰れなどがないことを確認すること。
- ・センサの装着および接続は確実に行うこと。
- ・本体やセンサなどの付属品には、溶剤や化学薬品を使用しないこと。
- ・チューブを折り曲げたり強く引っ張ったりして使用しないこと。
[接合部が外れるおそれがある]。
- ・取り外しはルアーロック方式のため、コネクタを回して行い、無理な力を加えないこと。
- ・使用前に水や薬液で濡らさないこと。
- ・本品に過度な力や負荷をかけないこと。[破損や品質上の不具合の原因となる]。
- ・本品は睡眠時の呼吸状態の診断目的でのみ使用すること。
- ・長時間使用する場合は、分泌液などによるチューブ閉塞がないか、定期的に点検すること。
- ・破損や劣化が認められた場合は、使用を中止し、新しい製品と交換すること。
- ・包装が開封済みまたは破損している場合は使用しないこと。
- ・極端な温度や湿度で保管しないこと。涼しく乾燥した場所に保管すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜貯蔵・保管環境＞

使用条件：温度 16℃～+35℃、湿度 15%～90%（結露なし）

保管条件：温度 -20℃～+55℃、湿度 15%～90%（結露なし）

雨や直射日光を避け、高温多湿を避けて保管。

換気の良い清潔な部屋で、腐食性ガスのない場所に保管。

＜使用期間＞

指定の貯蔵・保管を実施した場合：3 年 [自己認証による。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 Inspired Medical Japan

電 話 番 号：03-5817-8471

製 造 業 者：Dongguan Rongrui-Century Science & Technology Co., Ltd.
(ドンガンロンルイ社)

製 造 国：中華人民共和国

販 売 元：大丸エナウイン株式会社

電 話 番 号：06-6685-5101