

ベントウェイ（Ventway）（MRI 環境対応モデル）

* 再使用禁止（呼吸回路、酸素添加キット）

【警告】

- ・警報機能付パルスオキシメータ、カプノメータ等の生体情報モニタを併用し、連続的にモニタリングすること。[装置の停止、呼吸回路の外れによる患者の異常を知らせるため。]
- ・装置が故障した場合、適切な代替換気手段を用意しておくこと。特に手動式人工呼吸器（通称アンビューバッグ）は必ず用意すること [患者が死亡又は重症を負う危険性を避けるため。]
- ・漏れに注意すること。[患者の呼気量は、マスク周辺の漏れにより、測定された呼気量と異なる場合がある。]

【禁忌・禁止】

使用方法

- ・加湿しないこと。[計測用チューブと制御用チューブが詰まるおそれがある。]
- ・装置にカバーはしないこと。[装置の過熱や損傷のおそれがある。]
- ・患者の呼吸通路にラテックスや天然ゴムの部品を使用しないこと。[原材料が粘着性となり、ガス経路を閉塞させるおそれがある。]
- ・患者回路は使い捨てのため、再使用しないこと。[感染のおそれがある。]
- ・麻酔及び病棟での長期人工呼吸に使用しないこと。[障害を受けるおそれがある。]
- ・本品を他の機器に隣接して使用したり、他の機器と積み重ねたりしないこと。隣接または積み重ねて使用する必要がある場合は本品を観察し、正常な動作を確認する必要がある。[不適切な操作や安全上の危険が生じるおそれがある。]
- ・ジアテルミー、砕石器、電気焼灼、RFID（無線周波数識別）などの電磁干渉、盗難防止/電子物品監視システム、金属探知機などの電磁セキュリティシステム、電気メス、除細動器等、高周波を発生する機器への干渉を避けること。携帯電話端末等（スマートフォン、タブレット端末等を含む。）を 1m 程度以内に近づけた場合は、電波干渉を受け不具合を発生させる可能性がある。干渉が疑われる場合は、距離を最大化するために、可能であれば機器の位置を変えること。[不適切な操作や安全上の危険が生じるおそれがある。]
- ・本品は、高压室では使用しないこと。[故障の原因になる。]
- ・本品は、一酸化窒素および爆発性または引火性の高いガス混合物、可燃性物質と一緒に使用しないこと。[爆発または火災を引き起こすおそれがある。]
- ・本品は、ヘリウムまたはヘリウムとの混合物では使用しないこと。[故障の原因になる。]
- ・ガスインレットを塞がないこと。[装置の過熱や損傷のおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

(1) 本体 ディスプレイ チューブ接続口



外形寸法：167(D)×165(W)×60(H)mm

(上面図)



* MR 条件付適合図記号

(2) バッテリ 本体後部に内蔵


- a) 乾電池ユニット
- b) リチウムイオン充電式バッテリー

(3) 電源アダプタ

- a) 電源コード AC/DC
- b) 電源コード AC/DC 400Hz.
- c) 電源コード DC/DC

(4) 呼吸回路

- ・ベントウェイ 成人用／小児用呼吸回路
VWSP-370 / VWSP-390

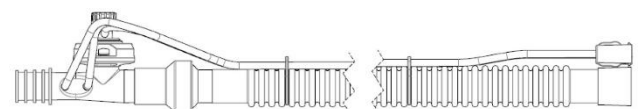

回路長・回路径

成人用：全長 240 cm、内径 22 mm

小児用：全長 240 cm、内径 15 mm

(5) フィルタ

- ・フィルターパック（エアインレットフィルタ 5 枚入）

(6) 酸素ミキサ（オプション品）



* MR 条件付適合図記号



外形寸法：Φ48×103(L)×77(H) mm

(7) ハイプレッシャー O2

DISS 又は AGA 規格チューブ（オプション品）

(8) ロープレッシャー O2

酸素添加キット（オプション品、単回使用）

(9) ハードキャリングバッグ（オプション品）

(10) ユニバーサル固定金具（オプション品）

2. 機器の分類

- ・電撃に対する保護の形式による分類：クラス I 機器
- ・電撃に対する保護の程度による装着部の分類：BF 形装着部
- ・酸素ミキサ使用時の水の有害な浸入に対する保護の程度の分類：IP45

3. 電氣的定格

本体

- ・定格入力：DC24V、4A

電源アダプタ

- a) 電源コード AC/DC アダプタ

取扱説明書を必ずご参照ください。

- ・定格入力：AC100～264V、～1.6A、50～60Hz
- ・定格出力：DC16～24V、5A
- b) 電源コード AC/DC 400Hz アダプタ
 - ・定格入力：AC90～264V、1.0～2.0A、50Hz/60Hz/400Hz
 - ・定格出力：DC18～38V、5A
- c) 電源コード DC/DC 乗用車用アダプタ
 - ・定格入力：DC11.5～16V、～19A
 - ・定格出力：DC24V、6.25A

バッテリー

- a) 乾電池ユニット
 - ・**定格出力：DC3V x 4 本=DC12V
 - ・容量：3000mA
- b) リチウムイオン充電式バッテリー
 - ・定格出力：DC14.8V
 - ・容量：2850mA±50mA

4.原理

本品は、外部電源又は内部電源により駆動するブロワが内蔵された人工呼吸器である。空気をガスインレットより取り込み、ブロワからの送気ガスを呼吸回路及びマスク等を経由し、患者に送気することにより、肺胞換気を支援及び管理するための機器である。

オプションの酸素ミキサまたは、酸素添加キットを接続することにより、30～100%の FiO_2 を患者に送気することが可能である。

【使用目的又は効果】

本品は、救急時及び医療機関内外での搬送時において、体重 5kg 以上の小児から成人までの機械的換気を必要とする患者に対し、肺胞換気を支援又は管理するために用いる。

【使用方法等】

使用前の準備

- 1)測定・コントロールチューブアダプタをフロントパネルのチューブ接続口に接続します。またベントウェイ呼吸回路（成人用又は小児用）をガスアウトレットに接続します。
- 2)装置背面の電源アダプタ接続口に電源コネクタを接続し、電源プラグを商用電源コンセントに接続します。
※電源アダプタのコードがモデルによって異なるので取り付け間違えないようにしてください。
- 3)本体背面の電源スイッチを 3 秒間押し、電源を“ON”にします。
- 4)患者と接続がされていないことを確認し、セルフテスト画面で[OK]を押します。システムはブロワを作動させ、装置と各種コンポーネント（患者回路、センサー、電気コンポーネントなど）の動作確認をおこないます。セルフテスト画面は約 15 秒間表示されます。
※セルフテスト実施時、回路の先端にキャップを付けるなど、閉塞状況のままセルフテストを行った場合は、ブロワに負荷がかかり出力が制限され、以後のセルフテストが正常に動作しないことがあります。その場合には一度電源を再起動してご使用ください。

・オプション品（酸素ミキサ、酸素添加キット）を併用する場合

- 1)22mm コネクタを人工呼吸器のガスインレットに接続し、ロックノブを時計回りに回してコネクタをガスインレットに固定します。
- 2) DISS 又は AGA 規格コネクタ部に高圧ガス用 O₂ 耐圧管を取り付け、院内の高圧酸素源 0.27～0.62 MPa に接続します。

使用方法

- 1) ディスプレイの表示に従い、コントロールノブを回して患者体重・換気モード・侵襲的または非侵襲的モード・換気量・呼吸回数等を設定、ノブを押して確定します。
- 2) 呼吸回路の接続を要求されるので、呼吸回路のもう一方の接続口に別に供給される気管内チューブ、LMA、またはフェイスマスク等を接続します。また患者と人工呼吸器の両方を感じ

染から保護するために、HME／フィルタを使用してください。患者とフローセンサーの間、又は人工呼吸器のガスアウトレットと呼吸回路のコネクタの間に接続してください。

- 3) 設定した呼吸回数でガスが流れている音、患者の胸郭の動きと回路内圧表示の動きを見て、換気が正常に行われていることを確認します。
- 4) 患者の状態及び生体情報モニタを常時観察し、必要に応じて各パラメータの設定を調整します。

・MRI 環境で使用する場合

- 1) *本体表面に MR 条件付適合図記号があることを確認してください。MR 条件付適合図記号がついていない場合、MRI での使用は安全ではありませんので使用しないでください。
- 2) MRI での撮像条件は次の通りです。この要件を満たさない場合、使用は安全ではありませんので使用しないでください。
静磁場強度 47mT 以下（3.0T 以下の MRI 装置にて）
- 3) 本体が安全に固定され、配置されていることを確認してください。
- 4) **オプションの酸素ミキサ使用時もミキサ表面に MR 条件付適合図記号が記載されていることを確認してください。

使用後の取扱い

- 1) 装置背面の電源スイッチを 3 秒間押し、電源を“OFF”にします。
- 2) 電源プラグを商用電源コンセントから外し、装置背面の電源アダプタ接続口から電源コネクタを外します。
- 3) 呼吸回路、測定・コントロールチューブなどのすべてのアクセサリ類を取り外し、地域の法令に従い、適切に廃棄します。患者回路は、7 日間の連続使用後交換してください。
- 4) 本体クリーニング
 - a) 機器の表面全体に 70%のアルコールをスプレーします。
 - b) 2～3 分間、その状態でおきます。
 - c) 機器の表面を拭きます。この時、機器に残留物がないか確認し、残留物が残っている場合、すべての残留物が除去されるまで、クリーニング手順全体を繰り返します。
 - d) 装置またはチューブ類への損傷を防ぐため、洗浄中は液体のこぼれを避けてください。
- 5) エアインレットフィルタの交換
300 時間（または 1 か月）の操作ごとに、または必要に応じて交換してください。
エアインレットフィルタは清掃したり、再利用したりしないでください。

併用可能なマスク

本装置と併用して使用可能なマスクは、次の条件に適合すること。

一般的名称：人工呼吸器用マスク
適合規格：ISO 5356-1：2015

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・ エアインレットフィルタ交換後、カバーネジをしっかり閉め、完全に閉じること。正しく閉じないと、酸素濃度が低下する可能性がある。
- ・ コントロールノブでパラメータの変更が許可されていない場合、デバイスは使用できない。
- ・ 呼吸回路は付属の回路を使用すること。
- ・ 画面の損傷を防ぐため、長時間直射日光に機器をさらさないこと。[装置が損傷するおそれがある。]
- ・ 電源ボタンが壊れている場合、患者を装置から外し、バッテリーを取り外すこと。
- ・ コントロールノブで設定値の変更が出来ない場合、装置を使用しないこと。
- ・ すべての専用部品を、製造元または代理店から購入した部品と交換すること。[他の部品を使用すると、装置が損傷し、保証が無効になる場合がある。]
- ・ *非臨床試験によって本品は MR 条件付適合であることが示されている。本品を装着した患者に対して、以下に示される条件下においては、MR 画像のアーチファクトを作成することなく安全に MR 検査を実施することが可能である；

静磁場強度 47mT 以下 (3.0T 以下の MRI 装置にて)

- **MR** を使用する際は以下の点に留意し、設置要件を満たした空間で使用するこゝと「重大な傷害が発生する可能性があるため。」
- **MRI** 環境での安全な使用に必要な条件を明確にし、**MR** 手順書を作成した上で、操作者に **MR** 手順書の教育を実施してください。
- **MRI** 装置の画質に対する影響や、本装置の動作に影響がないかを確認してください。
- 必ず本品付属の内蔵バッテリーのみで使用するこゝと。
- 磁力によって影響を受ける部品が本品に取り付けられていないか確認し、影響がある場合は使用しないこゝと。
- 本品を **MRI** ガントリー外郭から 1.1 メートル以上離して使用するこゝと。
- **MRI** ガントリー外郭に近づけすぎで、シャットダウンしたときは、点検とバッテリーを交換する必要があるため販売店に相談してください。
- **MRI** 画像収集中は、**MRI** の騒音でアラームが聞こえにくい場合があるため、ディスプレイ上で視覚的に監視してください。
- ****検査時は呼吸回路の PEEP 調整ノブを検査部位から 10 cm 以上離すこゝと。**
- ****PEEP** を調整する際には本装置の画面に表示される **PEEP** 値を確認しながら、呼吸弁上部の **PEEP** 調整ノブを少しずつ回してください。初期状態では 5cmH₂O で設定されています。
半時計回り→**PEEP** 減少
時計回り→**PEEP** 上昇
- ****PEEP** 調整ノブは少しずつ回してください。勢いよく回した場合破損する可能性があります。
- 取扱説明書の取り付け方に従い、本品がしっかりと固定されていることを確認すること。
- ユニバーサル固定金具 **MRI** 用を固定するスタンドは、しっかりと固定すること。
- ユニバーサル固定金具 **MRI** 用を移動式のスタンドに固定している場合は、スタンドごと **MRI** 装置に引き込まれる可能性があります。十分に注意して使用するこゝと。
- 使用中は気道内圧他、換気に変化がないか確認すること。又使用前に毎回一時的に回路を外したり閉塞させて、高圧アラーム等が作動することを確認すること。
- *本装置と接続することを想定していない製品を接続する必要がある場合は、患者に接続する前に全てを接続した状態で回路外れがあった際の警報が発生することを必ず確認すること。
- 本装置が正常に作動しない場合や、機器を落としたり、水をかけたりして破損した場合、機器を使用しないこゝと。[安全上の危険が生じる可能性がある。]
- 以下の疾患、あるいは状態にある患者に本品を使用する場合、精度又はパフォーマンスに影響を与える可能性がある。重度の肺閉塞や肺への非対称的な空気流路など、困難な気道がある
気道のコンプライアンスが低い
患者と人工呼吸器間の非同期
圧外傷
- 人工鼻 (HME) / フィルタを使用していて自発呼吸患者が呼吸困難を呈していたり、強制換気が異常となっていたり、またはガス交換が低下するようなケースでは、必ず呼吸回路に閉塞がないか確認すること。閉塞が検知された場合は、直ちに呼吸回路または **HME** / フィルタを交換すること。
- 水滴が流入しないように、呼吸コントロールチューブ (気道内圧チューブ) が常に上になるように設置してください。
- 呼吸コントロールチューブ (気道内圧チューブ) に水滴の混入を発見した場合は、速やかに取り除いてください。
[水滴でチューブ内が閉塞し、アラームの誤作動や適正な換気が維持されない等のおそれがあります]
- スピーキングバルブ、閉鎖式吸引カテーテル、人工鼻、及びフィルタの使用により抵抗が生じ、呼吸回路の外れが発生した場合に吸気圧下限アラームが発生しないことがあります。これらを併用した場合でも呼吸回路の外れを検出す

るように、吸気圧下限アラームを適正值 (抵抗により生じる圧力より高い値) に設定してください。

- 酸素ミキサや酸素添加キットが酸素供給源と接続されている場合、または酸素供給源から酸素が供給されている場合、**PEEP** 値が変動することがあります。ディスプレイを確認し、必要に応じて **PEEP** 値を再調整してください。
- 酸素添加キットは単回使用品ですので繰り返し使用しないでください。

その他の注意事項

- ポータブル RF 通信機器 (アンテナケーブルや外部アンテナなどの周辺機器を含む) は、製造元が指定したケーブルを含め、本品のどの部分からでも 30cm 以上近づけないで使用するこゝと。[機器のパフォーマンスが低下するおそれ]
- 本装置をパソコンと接続する際はメーカーが認証した同梱 **USB** ケーブル以外のものは使用しないでください。メーカーが認証していないケーブルを使用すると機器に不正プログラムが侵入し誤動作の原因になることがあります。
- 本装置に接続するパソコンには信頼できない **USB** 機器を接続しないでください。
機器に不正プログラムが侵入し誤動作の原因になることがあります。

【保管方法及び有効期間等】

1.環境条件

- 使用時 温度: -18℃~50℃
湿度: 10%~90%
気圧: 376hPa~1,060hPa
高度: -370m~7,620m まで
- 輸送/保管時 温度: -20℃~70℃

2.耐用期間

5 年「自己認証(自社データによる)」

【保守・点検に係る事項】

使用者による点検

キャリブレーションは 2 年毎に実施することを推奨します。
エアインレットフィルタは、300 時間 (又は 1 ケ月) ごとに交換してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 Inspired Medical Japan
電話番号: 03-5817-8471
製造業者: Inovytec Medical Solutions Ltd.
(イノヴィテックメディカル社)
製造国: イスラエル国