

管理医療機器 歯科材料02歯冠材料
アクリル系レジン歯 JMDN 70807000

レジン歯

【禁忌・禁止】

メタクリレート酸系モノマーに対して発疹皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。


【形状、構造及び原理等】

成分

種類	成分
臼歯	アクリル樹脂・メタクリル酸メチル・その他

形態及び色調

色調 S4・S56

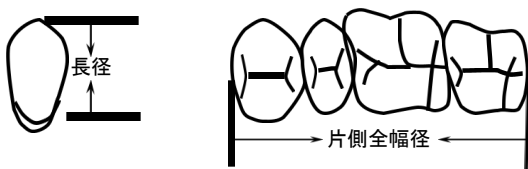

カメルレジン

単位/mm

形態		片側全幅径	第一小臼歯長径
M28	上顎	28	8
	下顎	30.2	7.6
M29	上顎	29.5	8.5
	下顎	31.5	8
M30	上顎	30.5	8.5
	下顎	32.5	8.1
M31	上顎	31.5	9.4
	下顎	33.8	8.4
M32	上顎	32.7	9
	下顎	34.5	8.5

クリスタルレジン

単位/mm

形態		片側全幅径	第一小臼歯長径
M28	上顎	27.2	8.1
	下顎	28.8	8.1
M30	上顎	29.3	8.7
	下顎	31.7	8.6
M32	上顎	32.9	9.2
	下顎	34	9.2

該当規格 JIS T 6506(レジン歯)

【使用目的又は効果】

本品は、全部床義歯、部分床義歯に使用されるアクリル系レジン歯。

【使用方法等】

- 義歯の製作
通法の床義歯製作方法によって作製すること。
- 研磨方法
ブラシ、布パフ等を用い、研磨材にて艶だし研磨を行うこと。

【使用上の注意】

- 一般
 - 適用対象:全部・部分床義歯の作製
 - 併用医療機器:義歯床材料
- 使用上の注意
 - 本品は、[使用目的、効果又は効能]の項に記載の用途以外には使用しないこと。
 - 本品を含む歯科技工物の研磨作業の際には、粉塵による人体への影響を避けるために、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
 - 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 重要な基本的注意
 - メタクリレート酸系モノマーに対して発疹皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
 - 本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が表れた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- 不具合・有害事象
本材の使用に伴い、発疹、皮膚炎などの過敏症が発生することがあります。

【保管方法及び有効期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- ・本品は高温・多湿の場所を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者/製造業者:
株式会社イセン