

* 機械器具48 注射筒
* 一般医療機器 家庭用精液注入用シリンジ 64137001

ジュンビーシリンジ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 本品の形状変更や改造等をしないでください。
- 使用期限を過ぎたものを使用しないでください。

*【形状・構造及び原理等】

「形状・構造」

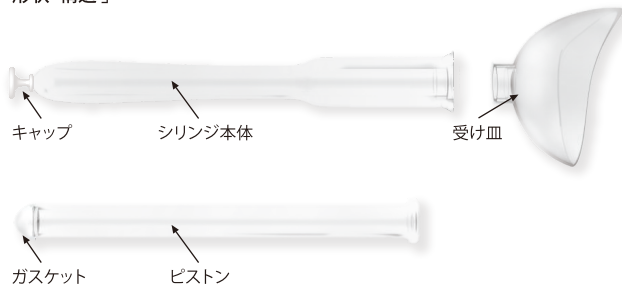

「原材料」

- シリンジ本体、ピストン、受け皿: ポリプロピレン
- キャップ: ポリエチレン
- ガスケット: エラストマー

「原理」

本品は、精液を膣内に挿入するための精液注入用器具である。

本品は、手でピストンを押すことで精液が膣の内部に移動するようになる。

【使用目的又は効果】

子宮内精液注入法において、精子を子宮内に注入するために使用する。


本品は単回使用である。

*【使用方法等】

「使用前の準備事項」

- 個別包装フィルムの破損有無を確認する。
- 有効期間の経過可否を確認する。
- 使用前、使用説明書を参考にして製品の使用方法を熟知する。

「使用方法」

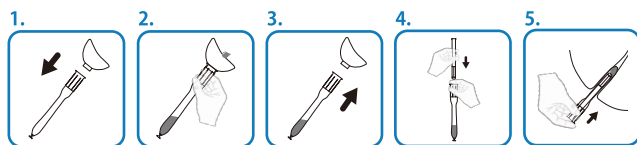

- 使用前、手をきれいに洗って個別包装フィルムの上段両面をとって左右方向へゆっくり引っ張って開ける。
- シリンジ本体の上端に受け皿下端を挿入し、取り付ける。
- 片手でシリンジ本体をつかみ、性器を受け皿にめがけて射精し、精液がシリンジ本体に流れ落ちるのを確認する。
- 受け皿をシリンジ本体から引き抜いて取り外す。
- ピストンをシリンジ本体の上端から2cm程度差し込む。
- シリンジ本体の先端が上になるように、一体となったシリンジ本体とピストンを持ち直す。
- シリンジ本体内の精液が下に落ちたことを確認したら、シリンジ本体の先端にあるキャップをひねり、取り外す。
- 枕等で臀部を腰より高くし、シリンジ本体の上端をつかみ、シリンジ本体上部のくびれ部分が膣内に隠れるまで、膣内に挿入する。
- ピストンを押し、精液を注入する。
- 本体をゆっくり膣から取り出す。
- 本体を膣から取り出した後、そのままの姿勢で約10分間、姿勢を維持する。

「使用後の保存及び管理方法」

- 本製品は1回用使い捨て医療機器で再使用しない。
- 使った製品は廃棄する。

*【使用上の注意】

- 本品は、膣内に精液を挿入する目的で使用してください。
- 使用時、シリンジ上部取手（滑り防止グリップ）部分をよくつかんで落とさないように注意してください。
- 保管の取扱い不注意による個別包装フィルムの破損や製品が変形された場合は使用しないでください。
- 膣内挿入時、無理な力を加えようとすることがありますので、ご注意ください。
- 使用中、刺激や痛みを感じた場合は直ちに使用を中止し、専門医やお客さま相談室にお問い合わせください。

*【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光・紫外線・高温多湿・凍結を避けて保管してください。
- 小さいお子様や動物の手の届かない衛生的な場所に保管してください。
- 使用期限は化粧箱と個別包装フィルムに記載（期限は自己認証による）。

【製造販売業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者：株式会社ハナミスイ
〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目15番1号
セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿
TEL：03-6304-5797