

機械器具76 医療用吸入器
一般医療機器 超音波ネブライザ 12719000

メッシュ式ネブライザ エアプラスIII

【警告】


- ・薬液の種類、用量、用法については、必ず医師の指導に従ってください。症状が悪化する恐れがあります。
- ・ご購入後初めて使用するとき、長期間しなかったときは、使用前に薬液カップ、カップ蓋を洗浄、消毒してください。
- ・薬液カップ、カップ蓋、マスク、マウスピースなどは、使用後に洗浄、消毒してください。
- ・洗浄、消毒したパーツは完全に乾燥させた後、清潔な場所に保管してください。
- ・複数の人が使用する場合は、必ず使用する人ごとに消毒済みのパーツをご使用ください。

【禁忌・禁止】

- ・製品の使用は必ず大人の方が行ってください。
- ・吸入するときは、座るなど安定した姿勢で使用してください。

【形状・構造及び原理等】

1. 各部の名称

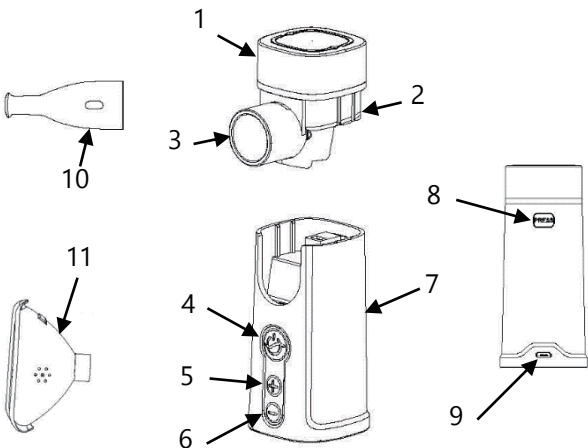

1	カップ蓋	7	製品本体
2	薬液カップ	8	ロックボタン
3	ノズル	9	充電端子
4	電源スイッチ	10	マウスピース
5	プラスボタン	11	マスク
6	マイナスボタン		

2. 構成

製品本体、薬液カップ(予備)、マウスピース、マスク(大・小)、充電用ケーブル、取扱説明書

3. 原理

本品は、患者に吸入させるため、エアロゾル化した水又は医薬品を供給するために用いる。
薬液カップ内の水又は薬液を、振動子の機械的振動でメッシュの微細孔から押し出すことにより、エアロゾル化して外部に噴霧する。

4. 体に接触する部分の組成

- ・薬液カップ:ポリカーボネート
- ・カップ蓋:ポリカーボネート
- ・製品本体:ABS樹脂、ポリカーボネート
- ・マウスピース:ポリプロピレン
- ・マスク:ポリ塩化ビニル

5. 寸法及び質量

- ・本体の寸法:56mm×42mm×98mm
- ・本体の質量:約109g

6. 電氣的定格

- ・定格入力:DC5V
- ・電源:リチウムイオン電池を内蔵
- ・電撃に対する保護の形式による分類:内部電源機器
- ・電撃に対する保護の程度による分類:BF形装着部
- ・電磁両立性:IEC 60601-1-2:2014に適合
- ・防塵防水保護等級:IP22

7. 仕様に係る事項

- ・超音波発振周波数:130KHz±10%
- ・噴霧能力:0.15mL /分~0.90mL /分
- ・噴霧粒子径:MMAD<5µm
- ・薬液カップ容量:最大10mL

【使用目的又は効果】

機械的振動により発生させたエアロゾル化した水又は医薬品を供給する装置である。

【使用方法等】

1. 充電

- ・初めて使用するとき又は、電池残量が少なくなったときは、充電を行ってください。
- ・充電中はスイッチが緑色に点滅します。

2. 薬液を入れる

- ・薬液カップのカップ蓋を開けて、薬液カップに薬液を入れます。
- ・カップ蓋をしっかり閉めてください。

3. マスク又はマウスピースを取り付ける

- ・ノズルにマスク又はマウスピースを取り付けます。
- ・マスクはノズルの奥までしっかりと差し込んでください。
- ・マウスピースは、カチッとハマるまで、押し込んでください。

4. 操作方法

- ・電源スイッチを押すと噴霧が開始されます。
- ・プラスボタンを押すと、噴霧量が増加します。
- ・マイナスボタンを押すと、噴霧量が減少します。
- ・噴霧は約10分間で自動的に停止します。引き続き噴霧が必要なときは、再度電源スイッチを押してください。
- ・電源スイッチを押すと噴霧が止まります。

5. 使用後のお手入れ

- ・マスク又はマウスピースをノズルから外して下さい。
- ・製品裏のロックボタンを押して、薬液カップを製品本体から外します。
- ・薬液カップに残った薬液を捨ててください。
- ・使用したマスク又はマウスピース、薬液カップ、カップ蓋を洗浄しよく乾燥させた後、乾燥した清潔な場所に保管してください。

【使用上の注意】

- ・使用前に取扱説明書をよく読んでから、使用してください。
- ・製品の手入れにベンジン、シンナーなどの薬品を使用しないでください。
- ・薬液カップが空の状態では電源スイッチを入れないでください。
- ・高温多湿の場所、直射日光の当たる場所、暖房器具の近くに置かないでください。
- ・薬液カップに水又は薬液を入れたまま放置したり、携帯しないでください。
- ・製品を使用目的以外の目的で使用しないでください。
- ・製品を落下させるなど強い衝撃を与えないでください。
- ・製品を、分解、改造、修理など行わないでください。
- ・製品本体は防水構造ではありませんので、水につけないでください。
- ・マウスピース及びマスクは、必ず製品付属のものを使用してください。他の製品のものは使用できません。

【保管方法及び有効期間等】

1. 直射日光を避け、乾燥した清潔な場所で保管してください。
2. 耐用期間:5年(自己認証(製造元データによる))

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: ヒュービディックジャパン株式会社
東京都八王子市北野町507番6号
電話: 042-649-1920
製造業者: FEELLIFE HEALTH INC.
中華人民共和国