

機械器具80 はり又はきゅう用器具
一般医療機器 非能動型接触鍼 70613001

マッサージスティック


【禁忌・禁止】

- この製品は成人向けであるため、子供に使用してはならない。
- 皮膚に異常がある場所に使用してはならない。

【形状・構造及び原理等】

1.形状及び構造

身体各部の患部を刺激するために複数の突起を持つ。

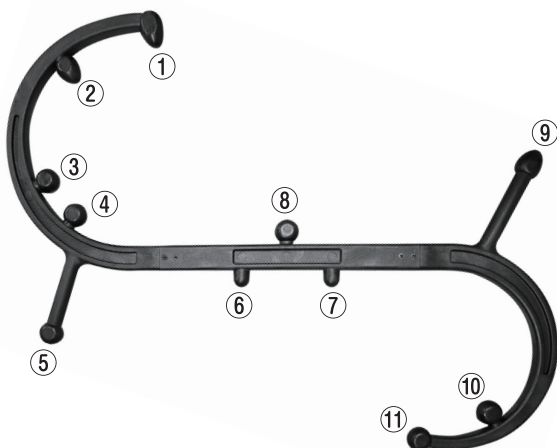

- 体のどこでも、特に肩と背中を優しくまたは深くマッサージします。
- 肩と足のリフレクソロジーとマッサージに最適な位置にあります。
- ③と④ 首の後ろの筋肉をマッサージするのに最適です。
- ⑤ 胸、首、背中、お尻、脚用の汎用ノブ。
- ⑥と⑦ はツールの中央にあり、特に背骨の両側にある臀部の上部と背中をマッサージするように設計されています。
- ⑧ 汎用ノブです。
- ⑨ 先の尖ったノブはマッサージ師の肘の動きを再現します。
- ⑩ 足のリフレクソロジーに非常に効果的です。
- ⑪ 体のあらゆる部分に直接深く圧力をかけるマッサージポイントです。

2.本体の寸法及び質量

- 寸法: 63Cm×40Cm
- 質量: 約635g

【使用目的又は効果】

本製品は、製品の突起部を身体各部の凝っている場所などに当てて加圧することにより、凝りや疼痛の緩和、又は他の治療効果を促進するために使用することを目的とする。

【使用上の注意】

- 同一場所を長時間加圧しないでください。
- 加圧は柄を手で持って行ってください。
- 体重を掛けるなど、過度な加圧は行わないでください。
- 製品に落とすなどの強い衝撃を与えないでください。
- 他の医療機器と併用しないでください。
- 体に異常を感じたり、加圧部に発疹、発赤、かゆみ等の症状が現れたときは使用を中止してください。

【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光を避け、乾燥した清潔な場所で保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

【取扱い上の注意】

- 製品が汚れた場合は、水洗いができます。
- 汚れがひどい場合は中性洗剤を使用して水洗いしてください。
- シンナー、アルコール、有機溶剤等は使用しないでください。
- 製品が破損したときは、使用しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: ヒュービディックジャパン株式会社
東京都八王子市北野町507番6号
電話:042-649-1920
製造業者 : HuBDIC Co., Ltd.
大韓民国