

機械器具76 医療用吸入器
一般医療機器 超音波ネブライザ 12719000

メッシュ式ネブライザ HNB-N5

【警告】


- ・薬液の種類、用量、用法については、必ず医師の指導に従ってください。症状が悪化する恐れがあります。
- ・ご購入後初めて使用するとき、長期間しなかったときは、使用前に薬液カップ、カップ蓋を洗浄、消毒してください。
- ・薬液カップ、カップ蓋、マスク、マウスピースなどは、使用後に洗浄、消毒してください。
- ・洗浄、消毒したパーツは完全に乾燥させた後、清潔な場所に保管してください。
- ・複数の人が使用する場合は、必ず使用する人ごとに消毒済みのパーツをご使用ください。

【禁忌・禁止】

- ・製品の使用は必ず大人の方が行ってください。
- ・吸入するときは、座るなど安定した姿勢で使用してください。

【形状・構造及び原理等】

1. 各部の名称

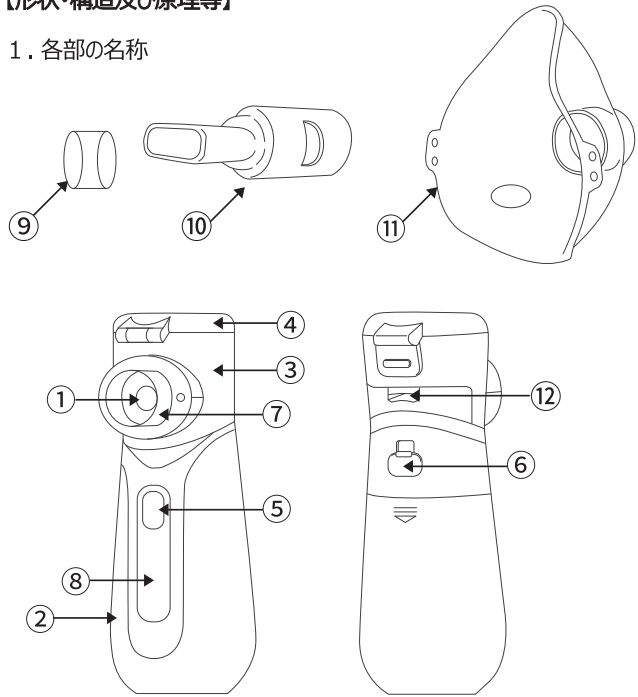

①	メッシュ	⑦	ノズル
②	製品本体	⑧	LED
③	薬液カップ	⑨	ノズルキャップ
④	薬液カップの蓋	⑩	マウスピース
⑤	電源スイッチ	⑪	マスク
⑥	充電端子	⑫	ロックボタン

2. 構成

- ・製品本体、薬液カップ(2個)、マウスピース、マスク(大・小)、充電用ケーブル、取扱説明書

3. 原理

- ・本品は、患者に吸入させるため、エアロゾル化した水又は医薬品を供給するために用いる。
- ・薬液カップ内の水又は薬液を、振動子の機械的振動でメッシュの微細孔から押し出すことにより、エアロゾル化して外部に噴霧する。

4. 体に接触する部分の組成

- ・薬液カップ：ポリカーボネイト
- ・カップ蓋：ABS樹脂
- ・製品本体：ABS樹脂
- ・マウスピース：ポリプロピレン
- ・マスク：ポリ塩化ビニル

5. 仕様に係る事項

- ・本体の寸法：60.5mm×46.7mm×127mm
- ・本体の質量：約93g(本体のみ)

6. 電氣的定格

- ・定格入力：DC5V
- ・電源リチウムイオン電池を内蔵
- ・電撃に対する保護の形式による分類：内部電源機器
- ・電撃に対する保護の程度による分類：BF形装着部
- ・電磁両立性：IEC 60601-1-2:2014に適合
- ・防塵防水保護等級：IP22

7. 仕様に係る事項

- ・超音波発振周波数：110±10KHz
- ・噴霧能力：0.2mL /分
- ・噴霧粒子径：MMAD = 3.5μm±25%
- ・薬液カップ容量：最大10mL

【使用目的又は効果】

機械的振動により発生させたエアロゾル化した水又は医薬品を供給する装置である。

【使用方法等】

1)充電

- ・初めて使用する際は、必ず充電してからご使用ください。
- ・バッテリー残量が少ないことを示す赤いライトが5回点滅すると製品は自動的にシャットダウンします。
- ・充電中は赤いバッテリーライトが点滅し、充電が完了すると緑のライトが点灯します。

2)薬液を入れる

- ・薬液カップのカップ蓋を開けて、薬液カップに薬液を入れます。
- ・カップ蓋をしっかり閉めてください。
- ・薬液カップを本体にセットします。
- ・薬液カップ内に液体が無い場合、青い水アイコンが3回点滅し、製品は自動的にシャットダウンします。

3)マスク又はマウスピースを取り付ける

- ・ノズルにマスク又はマウスピースを取り付けます。
- ・マスクはノズルの奥までしっかりと差し込んでください。
- ・マウスピースは、カチッとハマるまで、押し込んでください。

4)操作方法

- ・電源スイッチを押すと噴霧が開始されます。
- ・1回押すと弱い噴霧、2回押すと中程度の噴霧、3回押すと強い噴霧になります。
- ・電源スイッチを4回目に押すと噴霧が止まります。

5)使用後のお手入れ

- ・ノズルからマウスピースまたはマスクを取り外し、薬液カップの蓋を開けて残留液を排出します。薬液カップに少量(2～5mL)の 純水を入れ、蓋を閉めます。薬液カップを軽く振って残留物を純水に溶かします。
- ・薬液カップの蓋を開け、カップ内の溶液を捨てて、もう一度少量(2～5mL)の純水を入れます。
- ・電源ボタンを押し続けると、インジケータライトが上下動きながら点滅します。この時洗浄モードに入り、純水が噴霧されてメッシュ付近に残った液を排出します。(残留液がなくなると、自動的にシャットダウンします。)
- ・本体：湿らせたガーゼで本体の汚れを優しく拭き取り、新しいガーゼで乾かします。
- ・薬液カップと本体の電極を清掃し、カップと本体の接続を良好に保ちます。
※洗浄モードを使用することで、メッシュの詰まりを予防し、次回も快適にご使用いただけます。

【使用上の注意】

- ・使用前に取扱説明書をよく読んでから、使用してください。
- ・製品の手入にベンジン、シンナーなどの薬品を使用しないでください。
- ・薬液カップが空の状態電源スイッチを入れないでください。
- ・高温多湿の場所、直射日光の当たる場所、暖房器具の近くに置かないでください。
- ・薬液カップに水又は薬液を入れたまま放置したり、携帯しないでください。
- ・製品を使用目的以外の目的で使用しないでください。
- ・製品を落下させるなど強い衝撃を与えないでください。
- ・製品を、分解、改造、修理など行わないでください。
- ・製品本体は防水構造ではありませんので、水につけないでください。
- ・マウスピース及びマスクは、必ず製品付属のものを使用してください。他の製品のものは使用できません。

【保管方法及び有効期間等】

1. 直射日光を避け、乾燥した清潔な場所で保管してください。
2. 耐用期間：3年(自己認証(製造元データによる))

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ヒュービディックジャパン株式会社
東京都八王子市北野町507番6号
電話：042-649-1920
製造業者：True Illusion (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
中華人民共和国