


非接触スキャン体温計 700

【禁忌・禁止】

- ・電池は子供の手の届かないところにおいてください。
- ・子供だけで使用させないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 各部の名称

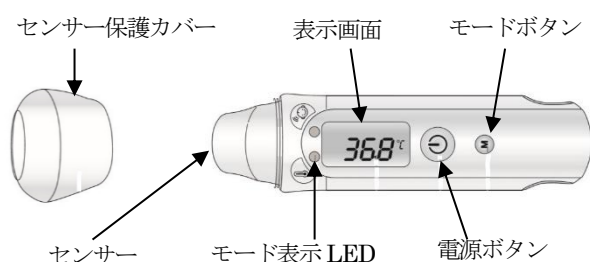

2. 本体の寸法及び質量

- ・外観寸法：φ35×128mm（センサー保護カバーを除く）
- ・質量：約 52g（センサー保護カバー、電池を除く）

3. 電氣的定格

- ・電源：コイン型リチウム電池（CR2032）1 個、(3V)
- ・電池寿命：約 2,500 回測定可能
- ・電撃に対する保護の形式による分類：内部電源機器
- ・電撃に対する保護の程度による分類：BF 形装着部
- ・電磁両立性：IEC 60601-1-2:2014 に適合
- ・防塵防水保護等級：IP22

4. 原理

本品は、人体の表面から放射される赤外線を、センサーで非接触的に測定し、体温に換算して表示する体温計である。

5. 仕様に係る事項

- ・測定温度範囲-体温計モード：34.0℃ ～ 42.5℃
- ・温度測定範囲-温度計モード：0℃ ～ 100℃
- ・最大許容誤差-体温計モード：±0.2℃
- ・最大許容誤差-温度計モード：±3℃
- ・使用環境：温度+15℃ ～ +40℃、湿度 15% ～ 90%
- ・保管環境：温度-25℃ ～ +70℃、湿度 15% ～ 90%
- ・補正温度：センサーで測定した温度を舌下温に換算して表示

【使用目的又は効果】

体表面上の皮膚の体温を測定するために用いること。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

- ・電源ボタンを押して、電池残量少マークが表示されたら、次の手順で電池を交換します。
- ・製品裏面の電池収納部のふたを下にスライドさせて開けます。
- ・プラスドライバーで電池を押さえているプレートのネジをはずし、プレートをはずします。
- ・電池を新しいものと交換します。
- ・電池を押さえるプレートを元に戻し、プラスドライバーでネジを締めます
- ・電池収納部のふたを元に戻します。
- ・電源ボタンを押して、電池残量少マークが表示されないことを確認します。
- ・体温測定及び温度測定を行うときは、センサー保護カバーを外してから使用してください。

2. 使用

1) セルフチェックモード

- ・電源ボタンを押すと、2つのモード表示 LED、表示画面の中の青と赤の LED が順番に点滅し、その後室温が約 1 秒間表示されます。

2) 体温の測定

- ・電源ボタンを押して、セルフチェックモードが終了すると、体温計モードになります。
- ・額から 2～3cm 離れたところにセンサーを向けて、電源ボタンを押しながら、ゆっくりとこめかみの方に動かしてゆきます。
- ・この時、ピッピッピッピッピと 5 回音が鳴り、最後にピロツと音が鳴りますので、最後の音が鳴ったら電源ボタンから指を離して表示画面を見ると、体温が表示されています。
- ・体温が 38℃以上のときは、表示画面の中に赤の LED が約 3 秒間点灯します。
- ・体温が 34.0℃～37.9℃のときは、表示画面の中に青の LED が約 3 秒間点灯します。

3) 温度の測定

- ・電源ボタンを押すと、まず体温計モードになっていますので、モードボタンを押して温度計モードに切り替えます。このとき、温度計モードのモード表示 LED が約 2 秒間点灯し、表示画面の中の体温計モードのマークが消えます。

- ・温度を測定したいものから 2～3cm 離れたところにセンサーを向けて電源ボタンを押します。
- ・ピッピッと 2 回音が鳴るので、2 回目の音が鳴ったら電源ボタンから指を離して表示画面を見ると、温度が表示されます。青の LED が約 3 秒間点灯します。

3. 使用後の処置

- ・体温測定又は温度測定が終了してから、約 1 分で自動的に電源が OFF になります。
- ・体温測定又は温度測定が終わりましたら、センサー保護カバーを取り付けてください。

【使用上の注意】

- ・センサー部分に物を入れたり、触ったりしないでください。
- ・防水構造ではないため、水や液体につけないでください。
- ・修理、分解、改造等は絶対に行わないでください。
- ・動物の体温測定には使用できません。
- ・落下などの強い衝撃を与えないでください。
- ・電池及び電池収納部のふたは、乳幼児が誤飲の恐れがありますので、十分に注意してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 直射日光を避け、乾燥した清潔な場所で保管してください。
2. 耐用期間：5 年（自己認証（製造元データによる））

【保守・点検に係る事項】

- ・汚れは乾いた布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどい場合は中性洗剤を含ませた布で拭いてください。水洗いは絶対にしないでください。
- ・有機溶剤等は使用しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売業者：ヒュービディックジャパン株式会社

東京都八王子市北野町 507-6

電話：042-649-1920

製造業者：HuBDIC Co., Ltd

大韓民国