


パワフル電動鼻吸い器

【禁忌・禁止】

- ・乳幼児の手の届かないところで保管してください。吸引ノズルを誤飲する恐れがあります。
- ・本書に記載されている使用目的以外の用途で使用しないでください。
- ・鼻の穴に傷、炎症、出血などが見られる場合は、使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

*1. 各部の名称

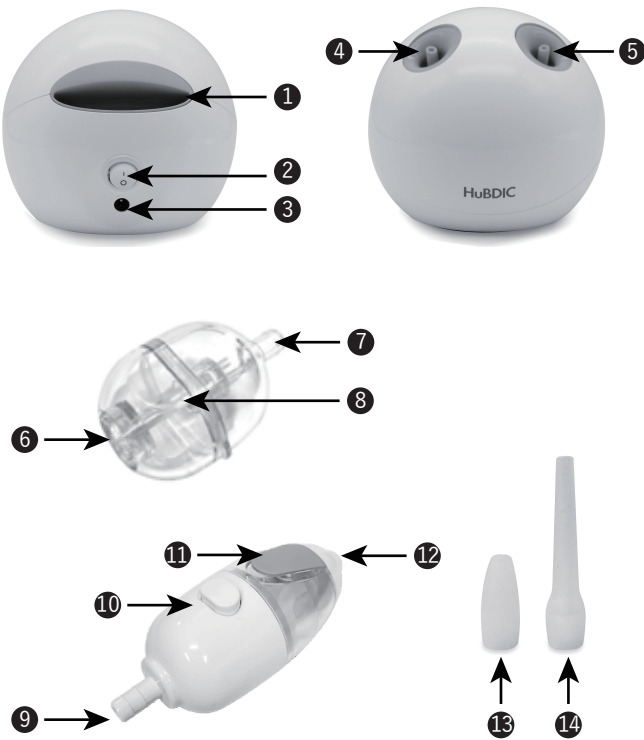

1	持ち手	噴射キット	
2	電源ボタン	9	ホース接続部
3	DCジャック	10	噴射ボタン
4	噴射用ホース接続部	11	注水口
5	吸引用ホース接続部	12	噴射口
吸引キット		ノズル	
6	ホース接続部	13	ぴったりノズル
7	吸引ノズル接続部	14	細長ノズル
8	逆流防止キャップ		

2. 本体の寸法及び質量

- ・本体外観寸法:145mm×120mm
- ・質量:約562g(本体)

3. 電氣的定格

- ・電源:専用ACアダプタを使用。DC12V。
- ・電撃に対する保護の形式による分類:クラスII機器
- ・電撃に対する保護の程度による分類:BF形装着部
- ・電磁両立性:IEC 60601-1-2:2014に適合
- ・防塵防水保護等級:IP22

4. 原理

電動モーターを使ったポンプで吸引キット内を陰圧にして、吸引キットに取り付けたノズルから鼻水を吸引する。

5. 仕様に係る事項

- ・吸引圧:-83KPa±9%
- ・吸引ポンプの排気流量:10L /分±20%

【使用目的又は効果】

乳幼児及び小児の鼻水の吸引に用いる。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

- ・電源ボタンがオフになっていることを確認して、付属の専用ACアダプタをコンセントにつないで、DC プラグを本体のDCジャックに繋ぎます。

2. 使用

1)吸引キットの使用

- ・ホースの両端を吸引キットのホース接続部と、本体の吸引用ホース接続部に接続します。
- ・吸引キットの吸引ノズル接続部にぴったりノズル又は細長ノズルを取り付けます。
- ・電源ボタンをオンにすると、吸引が始まります。
- ・吸引ノズルを鼻の穴に軽く押し当てて、鼻水を吸引します。
- ・吸引された鼻水は、吸引キットの中に溜まります。
- ・電源ボタンをオフにすると、吸引が止まります。

2)噴射キットの使用

- ・ホースの両端を噴射キットのホース接続部と、本体の噴射用ホース接続部に接続します。
- ・噴射キットの注水口から、水を入れます。
- ・噴射口を鼻の穴に向けて、電源ボタンをオンにしてから噴射ボタンを押すと噴射が始まります。
- ・電源ボタンをオフにすると、噴射が止まります。

3. 使用後の処置

- ・吸引キットは分解して、吸引ノズルとともに流水で洗浄した後、十分に乾燥させてから保管してください。

【使用上の注意】

- ・ご使用前に、本書及び取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
- ・初めて、又は長期間保管後にご使用になるときは、本品をよく洗浄してからご使用ください。
- ・ご使用後は必ず洗浄し、乾燥した清潔な場所で保管してください。
- ・製品は必ず大人の方が操作してください。また、吸引するときは座るなど安定した姿勢で使用してください。
- ・浴室内で使用しないでください。防水構造ではありません。
- ・吸引ノズルは鼻に軽く押し当てる様にしてご使用ください。鼻の奥深くに吸引ノズルを無理に入れないでください。
- ・本体を水につけないでください。
- ・製品をヒーターなどの熱源に近づけないでください。
- ・本体を落下させる等、強い衝撃を与えないでください。
- ・分解、改造、修理をしないでください。
- ・本体に異常を感じたときは、使用しないでください。
- ・ACアダプタは必ず製品付属のものを使用してください。他の機器のACアダプタは使用しないでください。
- ・吸引ノズルは本製品専用のものをご使用ください。他社の製品の吸引ノズルは使用できません

【保管方法及び有効期間等】

直射日光を避け、乾燥した清潔な場所で保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ヒュービディックジャパン株式会社
東京都八王子市北野町507番6号
電話：042-649-1920

製造業者：HuBDIC Co., Ltd.
大韓民国