

機械器具 32 医療用吸引器
管理医療機器 電動式可搬型吸引器 36616030


ポータブル電動鼻吸引器

【禁忌・禁止】

- ・本書に記載されている使用目的以外の用途で使用しないでください。
- ・鼻の穴に傷、炎症、出血などが見られる場合は、使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 各部の名称

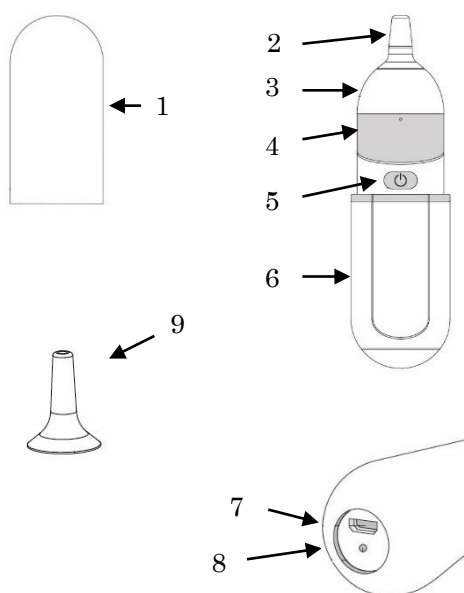

1	カバー	6	本体
2	吸引ノズル 1	7	充電端子
3	吸引タンク	8	LED
4	ベース	9	吸引ノズル 2
5	電源スイッチ		

2. 本体の寸法及び質量

- ・本体外観寸法：189mm×50mm
- ・質量：約 200g（本体のみ）

3. 電氣的定格

- ・電源：直流 3.7V、420mAh（リチウムポリマー充電電池）
- ・充電電圧：直流 5V
- ・電撃に対する保護の形式による分類：内部電源機器

- ・電撃に対する保護の程度による分類：BF 形装着部
- ・電磁両立性：本製品は IEC 60601-1-2:2014 に適合している
- ・防塵防水保護等級：IP22

4. 原理

電動モーターを使ったポンプでタンク内を陰圧にして、タンクに取り付けた吸引ノズルから鼻水を吸引する。

5. 仕様に係る事項

- ・吸引圧：-62KPa±10%
- ・吸引ポンプの排気流量：1.7～2.1L/分

【使用目的又は効果】

乳幼児及び小児の鼻水の吸引に用いる。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

- ・電源スイッチを押して、LED が緑色に点灯し、吸引器が動作することを確認する。
- ・LED が赤く点灯した場合は、電池の充電を行ってください。
- ・電源スイッチを押して電源を切る。

2. 使用

- ・カバーを外し、吸引タンクに吸引ノズル 1 又は吸引ノズル 2 を取り付けます。
- ・ベース部分は回転して傾斜がつけられるので、使いやすい角度に合わせます。
- ・電源スイッチを押すと、吸引が始まります。
- ・本体を持ち、吸引ノズルを鼻の穴に軽く押し当てて、鼻水を吸引します。
- ・電源スイッチを押すと、吸引が止まります。

3. 使用後の処置

- ・吸引ノズル、吸引タンクなどを本体から取り外し、流水で洗浄した後十分に乾燥させてから保管してください。

【使用上の注意】

- ・ご使用前に取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
- ・初めて又は長期間保管後にご使用になるときは、よく洗浄してからご使用ください。
- ・ご使用後は必ず洗浄し乾燥した清潔な場所で保管してください。
- ・乳幼児の手の届かないところで保管してください。吸引ノズルを誤飲する恐れがあります。

取扱い説明書を必ずご参照ください

- ・この製品は充電中は使用できない構造となっています。
- ・製品は必ず大人の方が操作してください。また、吸引するときは座るなど安定した姿勢で使用してください。
- ・浴室内で使用しないでください。防水構造ではありません。
- ・吸引ノズルは鼻に軽く押し当てる様にしてご使用ください。鼻の奥深くに吸引ノズルを無理に入れないでください。
- ・本体を水につけないでください。
- ・製品をヒーターなどの熱源に近づけないでください。
- ・本体を落下させる等、強い衝撃を与えないでください。
- ・分解、改造、修理をしないでください。
- ・本体に異常を感じたときは、使用しないでください。
- ・吸引ノズルは本製品専用のものをご使用ください。他社の製品の吸引ノズルは使用できません。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光を避け、乾燥した清潔な場所で保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売業者：ヒュービディックジャパン株式会社

東京都八王子市北野町 507-6

電話：042-649-1920

製造業者：HuBDIC Co., Ltd

(大韓民国)