

機械器具32 医療用吸引器
管理医療機器 電動式可搬型吸引器 36616030



鼻水吸引器HK-100

【禁忌・禁止】

- ・本書に記載されている使用目的以外の用途で使用しないでください。
- ・鼻の穴に傷、炎症、出血などがみられる場合は、使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 各部の名称

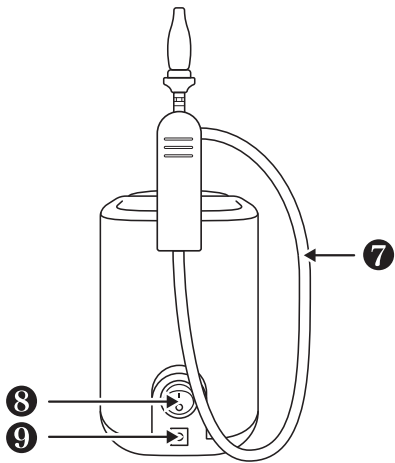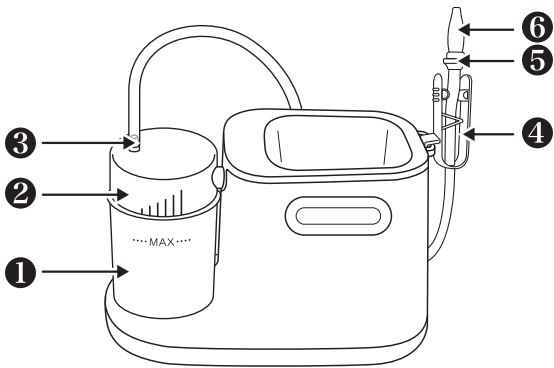

1	吸引ボトル	2	吸引ボトル蓋
3	チューブ接続部	4	チューブクリップ
5	ノズルコネクター	6	シリコンノズル
7	シリコンチューブ	8	電源スイッチ
9	DCジャック		

2. 本体の寸法及び質量

- ・本体外観の寸法:220 (W)×110 (D)×160 (H) mm
- ・質量:約840g(本体のみ)

3. 電氣的定格

- ・定格入力:DC 12V
専用ACアダプターを使用する。
- ・電撃に対する保護の形式による分類:クラスII機器
- ・電撃に対する保護の程度による分類:BF形装着部
- ・電磁両立性:IEC 60601-1-2に適合している。
- ・防塵防水保護等級:IP22

4. 原理

電動モーターを使用したポンプで吸引ボトル内を陰圧にして、シリコンチューブに取り付けたシリコンノズルから鼻水を吸引する。

5. 仕様に係る事項

- ・吸引圧:-83kPa±10%
- ・吸引ポンプの排気流量:10L / min±20%

【使用目的又は効果】

乳幼児及び小児の鼻水の吸引に用いる。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

- ・付属の専用ACアダプターを使用して、製品本体のDCジャックに接続します。
- ・シリコンチューブをチューブ接続部に差し込み、他端にシリコンノズルを取り付けます。

2. 使用

- ・電源スイッチを入れると、吸引が開始されます。
- ・チューブクリップを握る力の加減で、吸引の圧力を調節することができます。
- ・シリコンノズルを鼻の穴に軽く当てて、鼻水を吸引します。
- ・鼻の穴に強く押し込まないでください。
- ・チューブクリップで吸引圧力を調節しながら、吸引を行います。
- ・吸引された鼻水は、吸引ボトルの中に溜まります。
- ・吸引が終了したら電源スイッチをオフにします。

3. 使用後の処置

- ・吸引ボトルを製品本体から外します。
- ・吸引ボトル、吸引ボトル蓋、シリコンチューブ、シリコンノズルを分解し、洗浄した後十分に乾燥させてから保管してください。

【使用上の注意】

- ・ご使用前に取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
- ・初めて又は長期間保管後にご使用になるときは、よく洗浄してからご使用ください。
- ・ご使用後は毎回必ず吸引ボトルからシリコンノズルまでを分解して洗浄し、乾燥した清潔な場所で保管してください。
- ・製品は必ず大人の方が操作してください。また、吸引するときは座るなど、安定した姿勢で使用してください。
- ・シリコンノズルは鼻に軽く押し当てる様にして、ご使用ください。鼻の奥深くに無理に入れないでください。
- ・製品本体は防水構造ではありませんので、水につけないでください。
- ・電源は、製品に付属の専用ACアダプターを使用してください。
- ・シリコンノズルは、本製品に付属のものをご使用ください。他社製品のノズルは使用できません。
- ・製品に、落下させるなどの強い衝撃を与えないでください。
- ・製品を分解、改造、修理などを行わないでください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 直射日光を避け、乾燥した清潔な場所で保管してください。
2. 耐用期間：5年（自己認証（製造元データによる））

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ヒュービディックジャパン株式会社
東京都八王子市北野町507番6号
電話：042-649-1920

製造業者：HuBDIC Co., Ltd.
大韓民国