

機械器具16 体温計

管理医療機器 皮膚赤外線体温計 17888000


非接触赤外線体温計 1500

【禁忌・禁止】

- 電池は子供の手の届かないところにおいてください。
- 子供だけで使用させないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 各部の名称

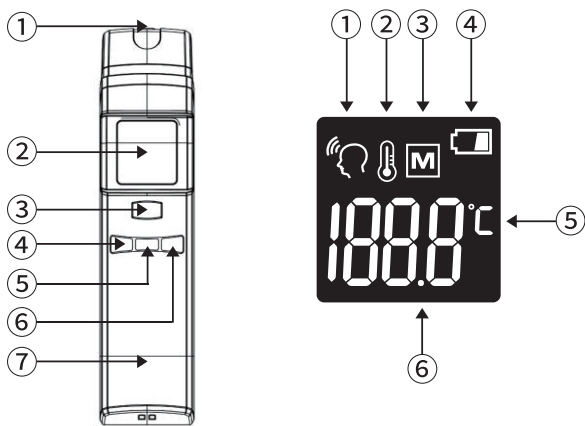

製品本体

①	センサー部	⑤	モードボタン
②	表示画面	⑥	メモリーボタン
③	スタートボタン	⑦	電池蓋 (裏面)
④	サウンドボタン		

表示画面

①	体温計モード	④	電池残量少マーク
②	温度計モード	⑤	単位
③	メモリー	⑥	測定結果

2. 本体の寸法及び質量

- ・外観寸法:152×36×37 mm
- ・質量:約59g (電池を除く)

3. 電氣的定格

- ・電源:アルカリ単4乾電池2本 (DC3V)
- ・電池寿命:約2,500回測定可能
- ・電撃に対する保護の形式による分類:内部電源機器
- ・電撃に対する保護の程度による分類:BF形装着部
- ・電磁両立性:IEC 60601-1-2:2014に適合
- ・防塵防水保護等級:IP22

4. 原理

本品は、人体の表面から放射される赤外線を、センサーで非接触的に測定し、体温に換算して表示する体温計である。

5. 仕様に係る事項

- ・測定温度範囲-体温計モード:22℃～43℃
- ・温度測定範囲-温度計モード:0℃～100℃
- ・最大許容誤差-体温計モード:±0.2℃ (36℃～39℃)
±0.3℃ (その他の温度範囲)
- ・最大許容誤差-温度計モード:±3℃
- ・使用環境:温度5℃～40℃、湿度15%～90%
- ・保管環境:温度-20℃～50℃、湿度15%～90%
- ・補正温度:センサーで測定したこめかみ部の温度を舌下温に換算して表示

【使用目的又は効果】

体表面上の皮膚の体温を測定するために用いること。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

- ・スタートボタンを押して、電池残量少マークのみが点灯していないことを確認する。
- ・表示画面に電池残量少マークが表示されたときは、以下の手順で電池を交換します。
- ・本体裏面の電池収納部のふたを下にスライドさせて開けます。
- ・古い電池を取り出して、新しい単4アルカリ乾電池2本と交換して、ふたを閉めます。
- ・電源ボタンを押して、電池残量少マークが表示されていないことを確認します。

2. 使用

1)セルフチェックモード

- ・電源ボタンを押すと、表示画面の中に全てのマークが約1秒間点灯し、次に体温計モードになります。

2)体温の測定

- ・表示画面で体温計モードになっていることを確認します。
- ・センサー部を2～3センチの距離でこめかみ部に向けて、スタートボタンを押します。
- ・ピッと音がして、次にピーと鳴ったら測定が終了して表示画面に体温が表示されます。
- ・ピットなった後ピーと鳴るまでは、体温計をこめかみ部から離さないでください。

3)温度の測定

- ・モードボタンを押して温度計モードに切り替えます。
- ・センサー部を測定したいものから2～3センチに近づけて、スタートボタンを押します。
- ・ピット鳴った後次にピーと鳴るまで、温度計の位置を保持してください。
- ・表示画面に温度が表示されています。

3. 使用後の処置

- ・測定終了後約60秒で電源が自動的にオフになります。

メモリーのチェック

- ・メモリーボタンを押すと、体温の測定記録を確認することができます。
- ・メモリーボタンを押すごとに、最後に測定した結果から順次古い結果が表示されます。
- ・メモリーは体温の測定結果のみ100件記録され、100件を超えると古い記録から順次書き換えられます。温度計の測定結果は、記録されません。

操作音の切換え

- ・サウンドボタンを押すと、操作音のオンオフを切り替えることができます。
- ・サウンドボタンを押してOFFと表示されると、その後操作音がなくなります。
- ・再度サウンドボタンを押すとONと表示され、その後操作音になる様になります。

【使用上の注意】

- ・センサー部分に物を入れたり、触ったりしないでください。
- ・防水構造ではないため、水や液体につけないでください。
- ・修理、分解、改造等は絶対に行わないでください。
- ・動物の体温測定には使用できません。
- ・落下などの強い衝撃を与えないでください。
- ・電池及び電池収納部のふたは、乳幼児が誤飲の恐れがありますので、十分に注意してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 直射日光を避け、乾燥した清潔な場所で保管してください。
2. 耐用期間：5年（自己認証（製造元データによる））

【保守・点検に係る事項】

- ・汚れは乾いた布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどい場合は中性洗剤を含ませた布で拭いてください。水洗いは絶対にしないでください。
- ・有機溶剤等は使用しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ヒュービディックジャパン株式会社
東京都八王子市北野町507番6号
電話：042-649-1920

製造業者：HuBDIC Co., Ltd
大韓民国