

機械器具16 体温計

管理医療機器 皮膚赤外線体温計 17888000

非接触赤外線体温計 3000


【禁忌・禁止】

・電池は子供の手の届かないところにおいてください。

・子供だけで使用させないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 各部の名称

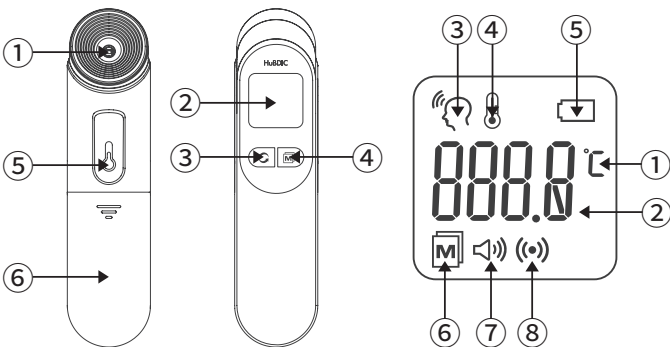

①	センサー	④	メモリーボタン
②	表示画面	⑤	スイッチ
③	モードボタン	⑥	電池蓋

①	単位	⑤	電池残量少マーク
②	測定結果	⑥	メモリーマーク
③	体温計モード	⑦	操作音マーク
④	温度計モード	⑧	ブルートゥースマーク (HFS-3000B)

2. 本体の寸法及び質量

- ・外観寸法:67.2×38.5×156.6mm
- ・質量:約85g (電池を除く)

3. 電気的定格

- ・電源:アルカリ単3乾電池2本 (DC3V)
- ・電池寿命:約10,000回測定可能
- ・電撃に対する保護の形式による分類:内部電源機器
- ・電撃に対する保護の程度による分類:BF形装着部
- ・電磁両立性:IEC 60601-1-2:2014に適合
- ・防塵防水保護等級:IP22

4. 原理

本品は、人体の表面から放射される赤外線を、センサーで非接触的に測定し、体温に換算して表示する体温計である。

5. 仕様に係る事項

- ・測定温度範囲-体温計モード:22℃ ～ 43℃
- ・温度測定範囲-温度計モード:0℃ ～ 100℃
- ・最大許容誤差-体温計モード:±0.2℃ (36℃ ～ 39℃)
他の温度範囲:±0.3℃
- ・最大許容誤差-温度計モード:±3℃
- ・使用環境:温度5℃ ～ 40℃、湿度15% ～ 90%
- ・保管環境:温度-20℃ ～ 50℃、湿度 15% ～ 90%
- ・補正温度:センサーで測定したこめかみ部の温度を舌下温に換算して表示

【使用目的又は効果】

体表面上の皮膚の体温を測定するために用いること。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

- ・スイッチを押して、電池残量少のマークのみが表示されていないことを確認する。

2. 使用

1)セルフチェックモード

- ・スイッチを押すと、表示画面の中に全てのマークが約1秒間表示され、次に室内の温度が表示されて、体温計モードの画面になります。

2)体温の測定

- ・スイッチを入れると体温計モードになるので、すぐに測定ができます。
- ・こめかみから2～3センチの距離にセンサーを向けてください。
- ・スイッチを押すとピッと音がして測定が開始されますので、体温計の位置を保持してください。
- ・約1秒でピーという音がすると測定が終了し、表示画面に体温が表示されます。

3)温度の測定

- ・モードボタンを押して温度計モードに切り替えます。表示画面のマークを確認してください。
- ・温度を測りたいものから2～3センチの距離で、スイッチを押すと、ピッと音がして測定が開始されますので、温度計をそのままの位置で保持してください。
- ・約1秒でピーという音がすると測定が終了し、表示画面に温度が表示されます。

3. 使用後の処置

- ・体温測定又は温度測定が終了してから、約30秒で自動的に電源がOFFになります。

取扱い説明書を必ずご参照ください

【使用上の注意】

- ・センサー部分に物を入れたり、触ったりしないでください。
- ・防水構造ではないため、水や液体につけないでください。
- ・修理、分解、改造等は絶対に行わないでください。
- ・動物の体温測定には使用できません。
- ・落下などの強い衝撃を与えないでください。
- ・電池及び電池収納部のふたは、乳幼児が誤飲の恐れがありますので、十分に注意してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 直射日光を避け、乾燥した清潔な場所で保管してください。
2. 耐用期間:5年(自己認証(製造元データによる))

【保守・点検に係る事項】

- ・汚れは乾いた布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどい場合は中性洗剤を含ませた布で拭いてください。
水洗いは絶対にしないでください。
- ・有機溶剤等は使用しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:ヒュービディックジャパン株式会社
東京都八王子市北野町507番6号
電話:042-649-1920

製造業者 :HuBDIC Co., Ltd
大韓民国